

SuperNova Magnifier & Screen Reader

Version 20



Dolphin Computer Access

Ausgabedatum: 04 February 2021

Copyright ©1998-2020 Dolphin Computer Access Ltd.

Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Tel: +44 (0) 1905 754577 Tel: +44 (0) 1905 754559

All Rechte welweit vorbehalten.

KAPITEL 1

Wie Sie Hilfe erhalten

1.1 Nutzen Sie die Schnellreferenz

Die Schnellreferenz befindet sich in der Verpackung, welche Ihre SuperNova Software beinhaltet. Dieses Buch enthält Informationen, wie Sie mit SuperNova beginnen, ebenso die gebräuchlichen Tastenkommandos, welche sie mit dieser Software benutzen.

1.2 Tastenhilfe

SuperNova beinhaltet eine große Anzahl an Tastenkombinationen, mit deren Hilfe nützliche Eigenschaften sowie Produkt Einstellungen mit einem einfachen Tastendruck ermöglicht werden Die Funktion zur Tastenhilfe in SuperNova hilft dabei, die richtige Tastenkombinatinon für eine besondere Eigenschaft oder Produkteinstellung zu finden, wenn Ihnen die Tastenkombination entfallen ist.

Wenn Sie eine Variante mit Sprachausgabe von SuperNova benutzen, kann es z.B. sinnvoll sein, das Kommando zur Ansage der Excel Formularleiste zu wissen. Anstatt die anwendungsspezifische Hilfe aus SuperNova für Excel zu öffnen und alle verfügbaren Tastenkombinationen zu lesen oder die Tastenkombinationen von SuperNova durch FESTSTELLTASTE + SCHRÄGSTRICH zu öffnen und dann verschiedene Tastenkombinationen auszuprobieren, können Sie die Tastenhilfe verwenden. Drücken Sie LINKE STRG + FESTSTELLTASTE + F1 oder öffnen Sie die Tastenhilfe in der Menüleiste von SuperNova durch FESTSTELLTASTE + F1, um im Hilfemenü auswählen. Tippen Sie nun das Wort "Formular" in das Sucheingabefeld ein. Es wird eine Liste aller Tastenkombinationen angezeigt, die sich auf das Arbeiten mit Formularen beziehen.

Sie können die Standardtasten von SuperNova zum Durchsuchen des Webs nutzen, um die Inhalte der Tastenhilfe zu SuperNova im HTML Fenster zu überprüfen.

1.3 Hilfe zu einer Anwendung bekommen

SuperNova beinhaltet Hilfe, wie Sie viele der gebräuchlichen Anwendungen benutzen.

Die Hilfe enthält:

- Wie Sie die Anwendungen für die beste Leistung konfigurieren.
- Wie Sie viele übliche Aufgaben erledigen, wenn Sie nur die Tastatur verwenden.
- Eine Liste der gebräuchlichen Tastenkommandos.

Während SuperNova läuft, können Sie die SuperNova Hilfe aus der Anwendung heraus öffnen. Wenn Sie das SuperNova Hilfemenü öffnen, gibt der erste Eintrag Auskunft darüber, wie Sie SuperNova mit der aktiven Anwendung benutzen.

Um dies zu tun:

1. Drücken Sie FESTSTELLTASTE + F1.

Ein Kontextmenü öffnet sich.

2. Drücken Sie CURSOR AB, um Ihre Anwendung auszuwählen. Zum Beispiel: Microsoft Word 2007, Drücken Sie dann Enter.

SuperNova öffnet ein HTML Hilfefenster, welches die entsprechende Hilfe beinhaltet.

Wenn sie zu Ihrer Anwendung zurückkehren wollen, drücken Sie ALT + F4, um das Hilfefenster zu schließen.

In der Hilfe navigieren 1.3.1

Nutzen Sie die Cursortasten, um zwischen den Themen zu wechseln. Verwenden Sie folgenden Kommandos für die Navigation auf der HTML Seite des Hilfethemas. Lesen Sie den Abschnitt "Internet Explorer" aus dem SuperNova Handbuch. Hier finden Sie eine Liste aller Tastaturkommandos zur Navigation auf einer Webseite.

- zur nächsten Überschrift springen, H.
- zur vorherigen Überschrift springen, UMSCHALT + H.
- zum nächsten Link springen, TAB.
- zum vorherigen Link springen, UMSCHALT + TAB.
- zum Ende des Dokuments springen, STRG + ENDE.
- zum Anfang des Dokuments springen, STRG + POS1.
- "Lesen hat hier" bis zum Ende des Dokuments, "Lesen hat hier" Tastaturkommando.

Lesen ab hier

Funktion	Standardwerte	Laptop Universal
	des Zahlenblocks	
Starte "Lesen hat hier"	NUM PLUS	FESTSTELLTAST E + CURSOR AB
Stopp "Lesen hat hier"	NUM PLUS oder ESCAPE oder LINKE STRG	LEERTASTE oder ESCAPE oder STRG

Drücken Sie ALT + F4, um die Hilfe zu schließen und zu Ihrer Applikation zurückzukehren.

1.3.2 Zwischen den Hilfethemen wechseln

Verwenden Sie Links am Beginn einer jeden Seite um zum nächsten oder vorherigen Thema zu wechseln.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie es die STRG + POS1, um zum Anfang des Dokumentes zu springen.
- Drücken Sie die TAB Taste, bis die Ansage "vorheriges Thema" oder "nächstes Thema" zu hören ist. Drücken Sie UMSCHALT + TAB, um rückwärts zu springen.
- 3. Folgen Sie den gewählten Link, indem Sie ENTER drücken.

Verwenden Sie den Link "Startseite", um auf die Seite zu gelangen, die alle relevanten Themen zur aktiven Applikation enthält.

Drücken Sie Alt + F4, um die Hilfe zu schließen und zur Applikation zurückzukehren.

1.3.3 Wechsel zwischen Applikation und Hilfe

Wenn Sie das Fenster der SuperNova Hilfe geöffnet lassen, können Sie immer wieder zu der letzten Position zurückkehren. Damit lassen sich die gelesenen Hilfeanweisungen Stück für Stück in der Applikation ausprobieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wechseln Sie aus der SuperNova Hilfe mit ALT + TAB zurück in Ihre Applikation.
- 2. Führen Sie die gewünschten Funktionen aus.
- 3. Drücken Sie erneut ALT + TAB, um an die letzte Position im Hilfefenster zurückzukehren.

Drücken Sie ALT + F4, um das Hilfefenster zu schließen

1.3.4 Persönliche Notizen hinzufügen

Sie können persönliche Notizen in der Hilfe von SuperNova hinzufügen. Dies können Sie tun, um bestimmte Tastenkommandos oder Schritte mit Notizen zu versehen, welche Sie brauchen, um bestimmte Aufgaben innerhalb Ihrer Anwendung zu erledigen.

Um dies zu tun:

- Führen Sie die Anwendung aus.
- 2. Drücken Sie FESTSTELLTASTE + F1.

Das Hilfemenü von SuperNova öffnet sich.

3. Verwenden Sie CURSOR AB bis zu "Meine Notizen" und drücken Sie ENTER.

Ein leeres Dokument in NotePad oder einem ähnlichen Textverarbeitungsprogramm öffnet sich.

- 4. Geben Sie Ihren Text in die Datei ein.
- 5. Speichern und schließen Sie die Datei.

Sie können sich Ihre Notizen ansehen und ergänzen, indem Sie "Meine Notizen" in dem SuperNova Hilfemenü auswählen. Die Texte, die Sie erstellen, werden im Ordner ¥Eigene Dateien gespeichert.

1.4 Hilfe für die Systemsteuerung von SuperNova

Die Systemsteuerung von SuperNova bietet zwei Möglichkeiten an, um Hilfe zu bekommen:

- die Schaltfläche "Hilfe".
- das Menü "Hilfe".

1.4.1 Die Schaltfläche "Hilfe"

Mit der Schaltfläche "Hilfe" in der Systemsteuerung von SuperNova erhalten Sie kontextsensitive Hilfe. Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird SuperNova den entsprechenden Abschnitt des Handbuchs in der Hilfe öffnen.

Zum Öffnen der Systemsteuerung von SuperNova drücken Sie LINKE STEUERUNG + LEERTASTE.

Sie können die Schaltfläche "Hilfe" mit der Tastatur oder der Maus aktivieren:

- Drücken Sie die linke Maustaste auf der Schaltfläche "Hilfe" in der Systemsteuerung.
- Drücken Sie die TAB Taste, bis Sie zur Schaltfläche "Hilfe" gelangen und drücken Sie anschließend die LEERTASTE.
- Drücken Sie F1.

1.4.2 Das Menü Hilfe

Im Menü "Hilfe" ist das komplette Handbuch von SuperNova verfügbar. Damit erhalten Sie in jeder Situation entsprechende Hilfeinformationen.

- 1. Zum Öffnen der Systemsteuerung von SuperNova drücken Sie linke STRG + LEERTASTE.
- 2. In der Systemsteuerung von SuperNova drücken Sie ALT + H, um das Menü "Hilfe" zu öffnen. Der erste Eintrag im Menü heißt Handbuch.
- 3. Drücken Sie ENTER, um das Handbuch von SuperNova zu öffnen.

Nutzen Sie die folgenden Tasten, um im Handbuch von SuperNova zu navigieren:

- Ein Thema auswählen, CURSORTASTEN AUF und AB.
- Ein Thema öffnen oder schließen, CURSORTASTEN LINKS und RECHTS.
- Das Thema öffnen, ENTER.
- Zwischen dem Inhaltsverzeichnis und dem geöffneten Thema wechseln, F6.

Unterstützung für SuperNova 1.5

1.5.1 Hilfe auf der Dolphin Webseite

Die Dolphin Webseite bietet eine Vielzahl von Informationen, die Ihnen dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Dolphin Produkt zu ziehen. Eine große Anzahl von Dokumentationen ist verfügbar, angefangen von einfachen Tipps und Hinweisen, bis hin zu technischen Artikeln mit Lösungen zu speziellen Problemen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie ihren Internet Browser und besuchen Sie http://www.YourDolphin.com.
- 2. In der Navigation der Hauptseite aktivieren Sie den Link "Support".
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Handbücher und Bedienungsanleitungen. Die Trainings-Handbücher und Starthilfen von Dolphin verhelfen Ihnen zu einem schnellen und einfachen Start mit unseren Produkten.
 - Tipps und Tricks. Sie Schritt für Schritt Anleitungen führen Sie durch die Funktionen des Produkts.
 - Wissens-Datenbank (Knowledge Base). Die umfangreiche Wissens-Datenbank kann nach Lösungen zu Problemen mit Ihrem DOLPHIN Produkt durchsucht werden.

1.5.2 Kontakt zu ihrem Dolphin Händler

Wenn Sie Ihre Dolphin Software von einem registrierten Dolphin Händler erhalten haben, können Sie diesen Händler direkt kontaktieren, um schnellstmöglich Unterstützung zu erhalten.

Wenn Sie die Kontaktdaten Ihres Händlers nicht verfügbar haben, erhalten Sie diese auf der Dolphin Webseite.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie den Internet Browser und besuchen sie http://www.YourDolphin.com.
- 2. Wählen Sie den Link "Händler" (Dealers) aus der Navigation der Hauptseite. Nun wird die Seite mit den Händleradressen geöffnet (Dealer Locator).

- 3. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste und aktivieren Sie die Schaltfläche "Senden" (Submit). Es wird eine Liste der deutschen Händler dieses Landes geöffnet.
- 4. Hier sollte die Adresse des Händlers erscheinen, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

1.5.3 Kontaktieren Sie den Dolphin UK Produkt Support

Wir sind stolz auf den Produktsupport bei Dolphin, den wir allen unseren Kunden anbieten. Unser Ziel ist es, den unübertroffenen Produkt Support weiter auszubauen. Sie können unser Team vom Produkt Support auf verschiedene Weise kontaktieren.

Nutzen Sie folgende Möglichkeiten:

- Telefon: +44 (0)1905 754765.
- Telefon (UK Lokal): 0345 130 5454.
- Fax: +44 (0) 1905 754 559.
- E-Mail: support@yourdolphin.com.

1.5.4 **Dolphin USA Produkt Support**

Den amerikanischen Produkt-Support von Dolphin können Sie auf verschiedene Arten erreichen:

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Per Telefon (kostenlos): +1 (888) 519 4694.
- Per Telefon (in USA): +1 (609) 803 2171.
- Per E-Mail: support@dolphinusa.com.

1.5.5 So finden Sie Ihre Produktversionsnummer und Ihre Seriennummer.

Im Dialogfeld "Über" von SuperNova finden Sie Informationen über:

- Ihre SuperNova Versionsnummer.
- Ihre persönliche SuperNova Seriennummer.
- Eine Kopie der SuperNova Software Lizenzvereinbarungen.

Um dieses Dialogfeld aufzurufen:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + H. Das "Hilfe" Menü wird geöffnet.
- 3. Drücken Sie CURSOR AB bis "Über" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Über" wird geöffnet.

1.5.6 Erweitertes Produkt Training

Dolphin hat ein Netzwerk von erprobten Trainern, die für hoch qualifiziertes Training bei Ihnen zuhause oder am Arbeitsplatz bereitstehen. Unsere Trainer können sich individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen und damit ihre Unabhängigkeit vergrößern. Nehmen Sie Kontakt zu Dolphin auf, um einen Trainer in ihrer Region zu finden.

Sie erreichen uns:

- Per Telefon: +44 (0)1905 754577.
- Per E-Mail: info@dolphinuk.co.uk.

KAPITEL 2

Installation und Konfiguration

2.1 SuperNova starten

SuperNova wird automatisch nach der Anmeldung starten, außer sie haben die während der Installation dagegen entschieden.

Sie können SuperNova manuell starten, indem Sie das Tastaturkommando zum Start von SuperNova verwenden.

Drücken Sie STRG + UMSCHALT + S.

Wenn Sie eine neue Version parallel zu einer existierenden Version installiert haben, wird automatisch ein anderes Tastaturkommando vergeben:

Drücken Sie STRG + UMSCHALT + D.

Außerdem können Sie SuperNova starten, indem Sie den Eintrag aus dem Windows Startmenü aktivieren. Sie finden ihn in dem Untermenü "Dolphin".

2.2 Starte SuperNova zum ersten Mal

Sie werden durch den Aktivierungsprozess geführt, wenn Sie SuperNova das erste Mal nach der Installation ausführen.

Im Prozess der Aktivierung werden Sie zur Freischaltung und Aktivierung angeleitet.

2.3 Tastenkommandos kennenlernen

Nutzen Sie die Tastaturhilfe von SuperNova, um sich mit den Tastenkommandos von SuperNova vertraut zu machen.

Die Applikation wird auf keine der Tastenkommandos reagieren, wenn die Tastaturhilfe aktiv ist.

Um die Tastaturhilfe zu aktivieren:

Tastaturhilfe

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte des Nummernblock s	Laptop Universal
Um die Tastaturhilfe zu aktivieren:	FESTSTELLTA STE + MINUS	FESTSTELLTA STE + 1

2.4 SuperNova beenden


Zum Beenden von SuperNova:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + D. Das Menü "Datei" wird geöffnet.
- 3. Bewegen Sie sich zum Eintrag "SuperNova beenden" und drücken Sie ENTER. Sie müssen den Vorgang in einer Meldung bestätigen.
- 4. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Ja".

KAPITEL 3

SuperNova Systemsteuerung

3.1 Einführung in die Systemsteuerung von SuperNova

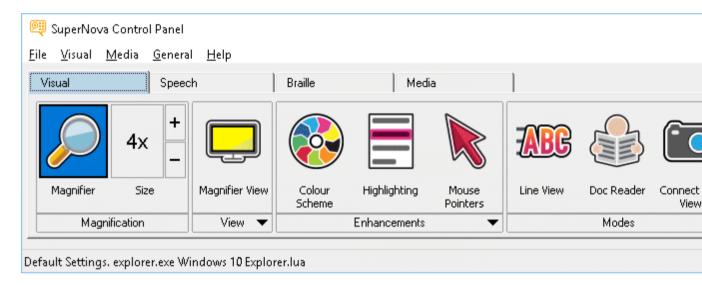

Die Systemsteuerung von SuperNova beinhaltet alle Einstellungen für SuperNova.

Sie finden die SuperNova's Einstellungen in der Menü- oder Tasten Zeile der Systemsteuerung.

Die Menüleiste ist die horizontale Leiste unter der Titelleiste; in dieser Menüleiste finden Sie die Aufklappmenüs, die alle verfügbaren Einstellungen von SuperNova enthalten. Die Schaltflächenleiste finden Sie direkt unter der Menüleiste. Mit der Schaltflächenleiste können Sie schnell und einfach die meist genutzten Einstellungen von SuperNova erreichen.

Der letzte Bereich der Systemsteuerung von SuperNova ist die Statusleiste. Die Statuszeile, die horizontale Zeile am unteren Teil der SuperNova Systemsteuerung gibt Auskunft über: Einstellungsdateien Sie benutzen.

Sie können von einer Vollversion zu einer kompakten Version der Systemsteuerung wechseln, indem Sie die Verkleinern oder Maximieren Tasten in der Titelzeile der Systemsteuerung benutzen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen. Benutzen Sie die, die Ihnen am sinnvollsten erscheint.

Um die Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen:

Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Damit öffnet sich die komplette Systemsteuerung als Dialogfeld.

Alternativ können Sie die Maus benutzen, um die Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen

:

Dazu klicken Sie einfach das Symbol von SuperNova im Windows Infobereich an.

Um die Systemsteuerung von SuperNova als Menü zu öffnen:

Drücken Sie die FESTSTELLTASTE + LEERTASTE oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol von SuperNova im Windows Infobereich.



3.2 Tastenkommandos, um sich in der Systemsteuerung von SuperNova zu bewegen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Tastenkommandos, mit denen Sie sich in der Systemsteuerung von SuperNova bewegen können. Beachten Sie, dass diese Tastenkommandos auch Standard Windows Kommandos sind, die Sie überall im Windows benutzen können.

Tastenkommandos für die Menüleiste.

Funktion	Tastenkommando
Bewegen des Fokus zur	ALT
Menüleiste.	
Bewegen des Fokus in der	CURSOR LINKS oder
Menüleiste.	CURSOR RECHTS
Öffnen des fokussierten	CURSOR AB oder
Menüeintrags	ENTER
Zum Menüleisteneintrag	ALT + unterstrichener
springen und öffnen.	Buchstabe
Bewegen durch ein geöffnetes	CURSOR AB oder
Menü	CURSOR AUF
Untermenü öffnen.	CURSOR RECHTS
	oder ENTER
Untermenü schließen	CURSOR LINKS oder
	ESCAPE
Menüeintrag auswählen	ENTER

Tastenkommandos für Dialogfelder

Funktion	Tastenkommando
Bewegen zum nächsten	TABULATOR
Steuerelement	
Bewegen zum vorherigen	UMSCHALT +
Steuerelement	TABULATOR

Betätigen einer Schaltfläche, Kontrollfeld an/aus oder Auswahl einer Option	LEERTASTE
Direktes Ansteuern eines	ALT + Unterstrichener
Steuerelementes	Buchstabe
Wechseln zum nächsten	STRG + TABULATOR
Register in einem Dialogfeld mit	
mehreren Registerkarten	
Wechseln zum vorherigen	STRG + UMSCHALT +
Register in einem Dialogfeld mit	TABULATOR
mehreren Registerkarten	
Abbrechen	ESCAPE

3.3 Einstellungen in der Systemsteuerung von SuperNova

Alle Optionen von SuperNova können über die Menüs in der Systemsteuerung von SuperNova erreicht werden. Die folgende Liste gibt eine Zusammenfassung der Menüs.

Menü Datei

Das Menü "Datei" beinhaltet Optionen zur Auswahl des Benutzerprofils sowie zur Verwaltung der SuperNova Einstellungsdateien. Dies beinhaltet das Erstellen, Bearbeiten, Importieren und Exportieren von Einstellungsdateien. Das Menü "Datei" beinhaltet ebenso den Befehl zum Verlassen von SuperNova.

Menü Visuell.

Das Menü "Visuell" beinhaltet die Optionen zur Steuerung der Vergrößerung, Bildschirmfarbe, Hervorhebung und anderen visuellen Effekten. Viele dieser Einstellungen können Sie auch über die Schaltflächenleiste von SuperNova erreichen.

• Menü Sprache.

Das Menü "Sprache" beinhaltet Optionen zur Sprachsteuerung von SuperNova. Es beinhaltet das Einstellen der Stimme, wie Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke. Außerdem gibt es Optionen zur Steuerung, was in SuperNova beim Schreiben, Lesen und Bearbeiten von Texten angesagt wird.

Braille Menü

Das Menü "Braille" enthält Optionen zur Steuerung der Ausgabe auf einer Braillezeile. Dies beinhaltet Brailletabellen, Sprache und Textattribute.

Menü Bibliothek.

Das Menü "Bibliothek" beinhaltet Optionen zum Scannen, Suchen von Büchern, Lesen von Online-Nachrichten, Radiohören und Abspielen von Podcasts.

Menü Allgemein.

Das Menü "Allgemein" enthält Optionen zur Steuerung von SuperNova Eigenschaften beim Starten, Update Einstellungen, Darstellung der Systemsteuerung von SuperNova und der Zuweisung von Schnelltasten.

• Hilfe Menü.

Im Menü "Hilfe" finden Sie nützliche Hilfeeinträge und Tipps, das SuperNova Handbuch, Online Hilfen und die Option "Über". Die Option "Über" beinhaltet Ihre Kundennummer, Ausgabe und Version Ihrer aktuellen SuperNova Software. Für den Fall, dass Sie technische Unterstützung benötigen, sollten Sie diese Angaben zur Hand haben.

3.4 Ändern der Darstellung der Systemsteuerung von SuperNova

Sie können viele Änderungen in der Systemsteuerung von SuperNova vornehmen. Sie können z.B. die Schaltflächen- und Statusleiste ausblenden, das Erscheinen der Systemsteuerung ausschalten, wenn Sie

SuperNova benutzen oder die Systemsteuerung von der Windows Taskleiste entfernen.

Für weitere Informationen zum Ändern der Systemsteuerung von SuperNova, siehe Dialogfeld "Allgemeine Systemsteuerung".

3.5 Schließen der Systemsteuerung von SuperNova

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Systemsteuerung von SuperNova zu schließen.

Um dies zu tun:

Drücken Sie ESCAPE.

oder

klicken Sie auf das Symbol Minimieren in der Titelleiste der Systemsteuerung von SuperNova.

Wenn Sie das Symbol Minimieren betätigt haben, wird die Systemsteuerung von SuperNova ausgeblendet und der Fokus kehrt zu Ihrer zuletzt benutzten Anwendung zurück. SuperNova läuft weiterhin.

Bemerkung: Wenn Sie ALT + F4 drücken oder die Schaltfläche "Schließen" in der Titelleiste der Systemsteuerung von SuperNova anklicken, nimmt SuperNova an, dass Sie das Programm verlassen wollen. Vor dem Verlassen des Programms erscheint ein Meldungsfenster, in dem Sie aufgefordert werden, das Beenden zu bestätigen.

KAPITEL 4

Vergrößerung

4.1 Die Vergrößerung ein- oder ausschalten



Sie können die Vergrößerung mit den Optionen der Registerkarte "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova oder den Tastenkommandos einoder ausschalten. Wenn Sie ein Gerät mit Touchscreen verwenden, können Sie die Vergrößerung auch ein- oder ausschalten, wenn Sie mit drei Fingern doppelt tippen.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universell
Vergrößerung ein- oder ausschalten	LINKE STRG + NUM ENTER	ALT + 0

Wenn Sie mehrere Bildschirme nutzen und in den Einstellungen zu SuperNova die Option "verschiedene Vergrößerungsstufen auf jedem Bildschirm nutzen" aktiviert haben, wird die Vergrößerung bei Verwendung des Tastenkommandos nur auf dem Bildschirm verändert, auf dem der Mauszeiger aktiv ist.

4.2 Ändern der Vergrößerung



Sie können die Werte von 1,2 bis zu 64facher Vergrößerung einstellen. Sie können die Vergrößerung ein- oder ausschalten, indem Sie die "Visuell" Optionen in der Systemsteuerung von SuperNova oder ein Tastenkommando benutzen. Wenn Sie ein Gerät mit Touchscreen verwenden, können Sie die Vergrößerung auch ein- oder ausschalten, wenn Sie 2 Finger Pinch oder mit 2 Fingern auseinander streichen.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop Tastenkomman dos	Laptop - Universell
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF	ALT + UMSCHALT + 0 oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF
Vergrößerung reduzieren	LINKE STRG + NUM MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB	ALT + MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB

Wenn Sie mehrere Bildschirme nutzen und in den Einstellungen zu SuperNova die Option "verschiedene Vergrößerungsstufen auf jedem Bildschirm nutzen" aktiviert haben, wird die Vergrößerung bei Verwendung des Tastenkommandos nur auf dem Bildschirm verändert, auf dem der Mauszeiger aktiv ist.

4.3 Modus der Vergrößerung verändern



Sie können zwischen verschiedenen Ansichten der Bildschirmvergrößerung von SuperNova wechseln. Hierbei können die folgenden Vergrößerungsmodi verwendet werden:

- Vollbild.
 In dieser Ansicht wird ein Teil des gesamten Bildschirms vergrößert angezeigt.
- Statisches Fenster.
 Diese Ansicht zeigt einen vergrößerten Bereich des Bildschirms in einem kleineren statischen Fenster an. Sie können die Größe und Position des Fensters festlegen.
- Vergrößerungslupe
 In dieser Ansicht verhält sich die Vergrößerung wie eine Lupe, die Sie über den Bildschirm bewegen. Sie sehen den vergrößerten Ausschnitt in einem kleinen, sich bewegenden Fenster. Größe und Position des Fensters sind einstellbar.
- Automatische Vergrößerungslupe
 Dieser Ansicht ist identisch zu Vergrößerungslupe, allerdings wird sich
 die Größe des Fensters automatisch an den Fokus anpassen.
 Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie mit der Tastatur unter
 Windows navigieren. Sie erhalten damit den größtmöglichen
 Überblick auf den nicht vergrößerten Bereich.
- Bildschirmteilung
 In dieser Ansicht wird der Bildschirm in zwei Bereiche geteilt: Ein

vergrößerter und ein nicht vergrößerter Bereich. Sie können die Größe des Bereichs bestimmen und wo er angezeigt werden soll.

 Die Grenze zwischen den beiden Bereichen wird als schwarze Linie angezeigt. Die Bildschirmteilung wird oft genutzt, wenn ein zusätzliches Kamerabild eingeblendet werden soll.

Verändern Sie den Vergrößerungsmodus mit Tastaturkommandos oder in der Registerkarte "Visuell" der Systemsteuerung von <Produktname>.

Tastaturkommandos für den Vergrößerungsmodus

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
\/		ΛΙ Τ .
Vergrößerungsmodus	LINKE STRG +	ALT +
wechseln	NUM 7	UMSCHALT +
		M
Ausschnitt in der	LINKE STRG +	nicht verfügbar
Bildschirmteilung wechseln	NUM 1	

Die Rahmenfarbe und -größe für das statische Fenster, die Lupen sowie die Bildschirmteilung sind ebenfalls einstellbar. Diese Einstellungen können Sie in den erweiterten Optionen zur Vergrößerung vornehmen.

4.4 Größe und Position eines vergrößerten Fenster verändern

Die Größe und Position des statischen Fensters, der Vergrößerungslupe und der Bildschirmteilung sind einstellbar.

Die Veränderung nehmen Sie mit der Tastatur vor.

Um die Größe und Position des statischen Fensters zu verändern:

1. Wählen Sie "statischen Fenster" als Vergrößerungsmodus.

2. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 4, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie RECHTE STRG + F3, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen.

Während der Anpassung beginnt der Rahmen des Fensters zu blinken.

- Benutzen Sie die Cursortasten, um das Fenster auf dem Bildschirm zu positionieren. Mit der Maus können Sie die Position des Fensters verändern, indem Sie die Taste "Y" festhalten und den Mauszeiger bewegen.
- 4. Verwenden Sie die LINKE STRG + CURSORTASTEN, um die Größe des Fensters einzustellen. Mit der Maus halten Sie die Taste "X" gedrückt und bewegen den Mauszeiger.
- 5. Drücken Sie ESCAPE, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

Um die Größe des Fensters für die Vergrößerungslupe zu verändern:

- 1. Wählen Sie als Vergrößerungsmodus die Vergrößerungslupe.
- 2. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 4, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie RECHTE STRG + F3, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen.

Während der Anpassung beginnt der Rahmen des Fensters zu blinken.

- 3. Verwenden Sie LINKE STRG + CURSORTASTEN, um die Größe des Fensters zu verändern. Mit der Maus halten Sie die Taste "X" gedrückt und bewegen den Mauszeiger.
- 4. Drücken Sie ESCAPE, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

Um die Größe des Ausschnitts in der Bildschirmteilung zu verändern:

- 1. Wählen Sie eine geeignete Bildschirmteilung.
- 2. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 4, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen. wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie RECHTE STRG + F3, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen.

Während der Anpassung beginnt der Rahmen des Fensters zu blinken.

- 3. Verwenden Sie LINKE STRG + CURSORTASTEN, um die Größe des Fensters zu verändern. Mit der Maus halten Sie die Taste "X" gedrückt und bewegen den Mauszeiger.
- 4. Drücken Sie ESCAPE, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

4.5 Bewegung auf dem Bildschirm

In der Vergrößerung wird nur ein Teil des Bildschirms angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildschirm oder verwenden Sie die Tastaturkommandos von SuperNova, um sich mit der Vergrößerung über den Bildschirm zu bewegen.

Die Bewegung des vergrößerten Ausschnitts mit Tastaturkommandos wird als Springen, Bewegen oder Rollen bezeichnet.

Schwenken

Beim Schwenken bewegt sich der vergrößerte Ausschnitt mit konstanter Geschwindigkeit in die gewählte Richtung über den Bildschirm. Die Geschwindigkeit der Bewegung kann mit den Tasten verändert werden. Um über den Bildschirm zu schwenken, drücken Sie RECHTE STRG + CURSORTASTE. Halten Sie die RECHTE STRG-Taste gedrückt, solange die Bewegung anhalten soll. Drücken sie die gleiche CURSORTASTE bei gehaltener STRG-Taste mehrmals hintereinander, um die Geschwindigkeit der Bewegung zu erhöhen. Nutzen Sie die gegenüberliegende CURSORTASTE, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Nutzen Sie andere Cursortasten, um die Richtung zu ändern. Lassen Sie die rechte STRG-Taste los, um die Bewegung zu stoppen.

Bewegen (beschleunigtes Schwenken).

Bei einer aktivierten Bewegung des vergrößerten Ausschnitts wird die Geschwindigkeit der Bewegung automatisch bis zum Maximum erhöht, solange die Tasten gedrückt halten.

Um den vergrößerten Ausschnitt auf diese Art und Weise zu bewegen, drücken und halten Sie RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT zusammen mit einer CURSORTASTE. Lassen Sie alle Tasten los, wenn die Bewegung stoppen soll.

Springen

Sie können mit dem vergrößerten Ausschnitt auch direkt zu verschiedenen Bereichen des Bildschirms springen. die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Befehle mit den entsprechenden Bereichen an.

Sprungkommandos

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
oben links	RECHTE STRG + NUM 7	nicht verfügbar
oben	RECHTE STRG + NUM 8	nicht verfügbar

oben rechts	RECHTE STRG + NUM 9	nicht verfügbar
links	RECHTE STRG + NUM 4	nicht verfügbar
Mitte	RECHTE STRG + NUM 5	nicht verfügbar
rechts	RECHTE STRG + NUM 6	nicht verfügbar
unten links	RECHTE STRG + NUM 1	nicht verfügbar
unten	RECHTE STRG + NUM 2	nicht verfügbar
unten rechts	RECHTE STRG + NUM 3	nicht verfügbar

• Sprungbewegung

Die Bewegung des vergrößerten Ausschnitts kann auch in Stufen erfolgen. Im Unterschied zum Schwenken erfolgt die Bewegung nicht fließend, sondern sprunghaft.

Springen in Stufen

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
aufwärts	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + NUM 8	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AUF

abwärts	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 2	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR AB
links	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 4	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR
		LINKS
rechts	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 6	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR
		RECHTS

Die Bildschirmposition speichern und wiederherstellen

Sie haben die Möglichkeit die aktuelle Bildschirmposition zu speichern. Damit können Sie zu dieser Position mit einem Tastaturkommando zurück springen.

Zum Speichern der Bildschirmposition:

- 1. Bewegen Sie den vergrößerten Ausschnitt zu der gewünschten Position.
- 2. Drücken Sie RECHTE STRG + NUM 0 zum Speichern der Position.

Um den vergrößerten Ausschnitt an die gespeicherte Position zu bewegen:

Drücken Sie RECHTE STRG + NUM KOMMA.

4.6 Ansicht der Vergrößerung in der Übersicht

Die Position des vergrößerten Ausschnitts kann in der Übersicht dargestellt werden. Zum Wechsel zwischen Übersicht und Vergrößerung nutzen Sie ein Tastaturkommando.

Um die Übersicht zu aktivieren oder zu verlassen:

Drücken Sie LINKE STRG + KLEINER ALS.

4.7 Feste Vergrößerungsfenster

Sie können einzelne, vergrößerte Fenster auf dem Bildschirm einblenden, die einen bestimmten Bereich des Bildschirms dauerhaft anzeigen. Damit behalten Sie wichtige Informationen immer im Blick.

SuperNova nennt diese Fenster Fixbereiche. Für Fixbereiche können eigene Vergrößerungsstufen eingestellt werden. Außerdem sind diese Bereiche auch sichtbar, wenn Sie die Vergrößerung abgeschaltet haben.

Beispiele:

- Sie können einen Fixbereich für die Uhr im Infobereich festlegen, um die Uhrzeit im Blick zu behalten.
- Sie k\u00f6nnen die Statusleiste ihrer Textverarbeitung als Fixbereich festlegen, um die Angaben zum aktuellen Abschnitt und zur aktuellen Zeile zu \u00fcberwachen.
- Sie k\u00f6nnen die Funktionsleiste in der Tabellenkalkulationen als Fixbereich festlegen, damit der aktuelle Zelleninhalt immer sichtbar ist.

Ein Fixbereich kann mit der Maus oder der Tastatur festgelegt werden.

4.7.1 Einen Überwachungsbereich mit Tasten erstellen

Um einen Überwachungsbereich zu erstellen und die Größe und Position mit Tastenkommandos zu ändern, muss der Änderungsmodus aktiv sein.

Um einen Überwachungsbereich zu erstellen und die Größe und Position zu ändern:

1. Wenn Sie das Desktop Tastenlayout verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUMPAD 5, um einen neuen Überwachungsbereich zu erstellen und automatisch den Änderungsmodus zu aktivieren. Wenn Sie das Laptop Tastenlayout verwenden, drücken Sie LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + ALT + H, um einen neuen Überwachungsbereich zu erstellen und automatisch den Änderungsmodus zu aktivieren.

Während der Änderung der Vergrößerung wird das zu bearbeitende Objekt durch blinkende Rahmen markiert.

- 2. Nutzen Sie die Tastenkommandos zur Vergrößerung, um die Größe innerhalb des Überwachungsbereichs zu verändern.
- 3. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Position des Fensters auf dem Bildschirm zu bestimmen. Halten Sie dazu die Taste "Z" fest und bewegen Sie den Mauszeiger.
- 4. Drücken Sie LINKE UMSCHALT + Pfeiltasten, um den angezeigten Bereich innerhalb des Fenster zu verschieben. Halten Sie dazu die Taste "C" fest und bewegen Sie den Mauszeiger.
- Drücken Sie LINKE STRG + Pfeiltasten, um die Größe des Fensters zu verändern. Halten Sie dazu die Taste "X" fest und bewegen Sie den Mauszeiger.

6. Drücken Sie ESCAPE, um die Änderungsmodus zu verlassen.

Während der Erstellung kann es vorkommen, dass Sie einige Einstellungen wiederholt anwenden müssen, damit Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

4.7.2 Einen Fixbereich mit der Tastatur bearbeiten

Um einen vorhandenen Fixbereich zu bearbeiten:

- 1. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 6. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie LINKE STRG + F6. Der Modus zur Anpassung der Vergrößerung wird aktiviert und der aktuelle Fixbereich wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.
- Wenn Sie mehrere Fixbereiche festgelegt haben, können Sie die Auswahl wechseln, indem Sie LINKE STRG + NUM 6 drücken (Desktop Tasten). Für die Auswahl des Fixbereich mit dem Laptop Tasten verwenden Sie LINKE STRG + F6.
- 3. Nutzen Sie die verfügbaren Tastenkommandos zur Einstellung der Vergrößerung und für den Modus zur Anpassung der Vergrößerung, um die Größe, die Position und den Inhalt zu verändern.
- Drücken Sie Escape, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

4.7.3 Einen Fixbereich mit der Tastatur löschen

Um einen vorhandenen Fixbereich zu löschen:

- Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 6. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie LINKE STRG + F6. Der Modus zur Anpassung der Vergrößerung wird aktiviert und der aktuelle Fixbereich wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.
- Wenn Sie mehrere Fixbereiche festgelegt haben, können Sie die Auswahl wechseln, indem Sie LINKE STRG + NUM 6 drücken (Desktop Tasten). Für die Auswahl des Fixbereich mit dem Laptop Tasten verwenden Sie LINKE STRG + F6.
- 3. Drücken Sie die Taste ENTFERNEN, um den aktiven Fixbereich zu löschen.

Wenn ein Fixbereich gelöscht wird, wird automatisch der nächste Fixbereich aktiv. Wenn kein Fixbereich mehr vorhanden ist, wird der Modus zur Anpassung der Vergrößerung automatisch verlassen. Wenn weitere Fixbereiche vorhanden sind, die Sie nicht verändern möchten, drücken Sie Escape.

4.7.4 Einen Fixbereich mit der Maus erstellen

Um einen Fixbereich zu erstellen, nutzen Sie das Dialogfeld "Fixbereich erstellen". Dafür öffnen Sie das Menü "Visuell und wählen den Menü Eintrag "Erweiterte Optionen". Im Dialogfeld "Erweiterte Optionen" im Register "Fixbereiche" aktivieren Sie die Schaltfläche "Neu".

Im Dialogfeld "Fixbereich erstellen" werden Sie:

- 1. Eine eindeutige Beschreibung für den überwachten Bereich eingeben.
- 2. Akivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollfeld Fokusverfolgung.

Die Fokusverfolgung gibt an, ob der Inhalt des zu überwachenden Bereichs fest sein soll, oder ab Fokus verfolgt werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn der Fokus im zu überwachenden Bereich verfolgt werden soll. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, wird die Schaltfläche "Fixbereich auswählen" inaktiv, da ein bestimmter Bereich nicht definiert ist.

- 3. Wählen Sie die Schaltfläche "Fixbereich auswählen", um einen Bildschirmbereich zu definieren.
- 4. Halten Sie die LINKE MAUSTASTE gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, um einen neuen Bereich zu erzeugen. Drücken Sie ENTER oder die RECHTE MAUSTASTE um diese Aktion zu bestätigen oder ESCAPE, um die Aktion abzubrechen.
- 5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollfeld "Bildglättung".
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Zum Fixbereich springen", um den Fixbereich zu aktivieren und den Vergrößerungsfaktor festzulegen.

Der Vergrößerungsfaktor wird über die Standard Tastenkommandos festgelegt. Bewegen Sie die Maus oder die CURSOR TASTEN, um den Fixbereich zu verschieben. Drücken Sie ENTER oder die LINKE MAUSTASTE, um diese Aktion zu bestätigen oder ESCAPE, um die Aktion abzubrechen.

7. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK", um die Einstellungen zu bestätigen und den neuen Fixbereich zu speichern.

Sie können sich eine Liste der erzeugten Fixbereiche in der Registerkarte "Fixbereiche" des Dialogfelds "Erweiterte Optionen" anzeigen lassen. Außerdem können Sie in dieser Registerkarte existierende Fixbereiche sortieren, verändern und löschen.

4.7.5 Fixbereiche anzeigen oder verbergen

Fixbereiche lassen sich mit einem Tastaturkommando ein- oder ausblenden. Verbergen Sie die Fixbereiche, wenn Sie die dahinterliegenden Teile des Bildschirms in der Ansicht benötigen.

Fixbereich ein/aus

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Fixbereich ein/aus	LINKE STRG +	Nicht
	NUM 3	zugewiesen

KAPITEL 5

Bildschirmerweiterungen

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Bildschirmausschnitt zu finden, den Fokus zu verfolgen oder den Mauszeiger zu sehen, sollten Sie eventuell die Bildschirmerweiterungen von SuperNova verwenden.

5.1 Erleichtert das Auffinden des Focus



SuperNova enthält Optionen die das Betrachten des Bildschirms komfortabler gestalten. Eine dieser Optionen ist das SuperNova Farbschema, mit der der Kontrast, die Helligkeit und die Farben des Bildschirms verändert werden kann.

Sie können ein vordefiniertes Schema von SuperNova verwenden oder ein eigenes erstellen. Ein Farbschema wird auf den gesamten Bildschirm angewendet und ist auch aktiv, wenn die Vergrößerung abgeschaltet ist.

Wählen Sie ein Schema in den Optionen "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova. Sie können das Farbschema ebenfalls in den Optionen zu "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova umschalten oder mit einem Hotkey ein oder ausschalten.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard	Laptop - Universell
	Nummernblock	
Farbschema ein- oder	LINKE STRG +	ALT + SHIFT +
ausschalten	NUM 0	С

Um ein eigenes Schema zu erzeugen, müssen Sie zunächst "Benutzerdefiniertes Schema" auswählen bevor Sie den Eintrag "Einstellungen" aus der Liste der Farbschemata wählen können. Wenn Sie "Konfigurieren" wählen, wird das "Eigenes Farbschema konfigurieren"Dialogfeld geöffnet. Das Dialogfeld zeigt verschiedene Steuerelemente in Abhängigkeit Ihrer Auswahl. Hierzu gehören Helligkeit, Kontrast und Farbe und Farbersetzung.

Wenn Sie mehrere Bildschirme nutzen und in den Einstellungen zu SuperNova die Option "unabhängige Farbeinstelllungen auf jedem Bildschirm nutzen" aktiviert haben, wird die Vergrößerung bei Verwendung des Tastenkommandos für die Farbschemata nur auf dem Bildschirm verändert, auf dem der Mauszeiger aktiv ist.

5.2 Erleichtert das Auffinden des Focus



SuperNova enthält Optionen die das Betrachten des Bildschirms komfortabler gestalten. Eine dieser Optionen ist die Fokushervorhebung von SuperNova. Sie erleichtert das Auffinden verschiedener Fokuselemente mit einer visuellen Hervorhebung.

Unterstützte Fokuselemente:

- Maus (der Mauszeiger, den die Maus steuert).
- Cursor (Schreibmarke, die in Eingabefeldern verwendet wird).

- Zeile (die Zeile in der die sich die Schreibmarke befindet).
- Fokus (der Fokus in Dialogfeldern und Menüs).

Sie können ein von SuperNova vorgegebenes Schema für die Fokushervorhebung verwenden. Zusätzlich können Sie Ihr eigenes Schema erstellen. Wählen Sie ein Schema in den Optionen "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova.

Um ein eigenes Schema zu erstellen wählen Sie "Einstellungen" aus der Liste der Schemata. Mit der Auswahl von "Einstellungen" wird SuperNova automatisch zum benutzerdefinierten Schema wechseln, bevor das Dialogfeld mit den Optionen zur Fokushervorhebung geöffnet wird. SuperNova wird ebenfalls die vorherigen Werte verwenden um diese für das neue benutzerdefinierte Schema zu nutzen.

Tipp: Wenn Sie keine visuellen Effekte erkennen, während Sie ein Schema auswählen, vergewissern Sie sich, dass die Hervorhebungen aktiviert sind. Sie können die Hervorhebungen aktivieren, indem Sie die Option "Hervorhebung" im Menü "Visuell" aktivieren oder indem Sie die Schaltfläche "Hervorhebung" in der Registerkarte "Visuell" der Systemsteuerung von SuperNova anwählen.

5.3 Machen Sie den Zeiger leichter zu sehen



SuperNova enthält Optionen die das Betrachten des Bildschirms komfortabler gestalten. Eine dieser Optionen ist die Einstellung der SuperNova Mauszeiger, die das Verändern der Größe und Farbe zulässt. Sie können die vordefinierten Schemata der Mauszeiger von SuperNova verwenden oder eigene Schemata in der Systemsteuerung von SuperNova unter dem Eintrag "Visuell" erstellen.

Die vorgegebenen Schemata beinhalten:


- Groß rot
- Groß weiß
- Groß gelb

Die Auswahl des Schemas "Windows Standard" wird die Einstellung auf den Standard zurücksetzen.

KAPITEL 6

Spracheinstellungen.

6.1 Aus- und Einschalten der Sprachausgabe

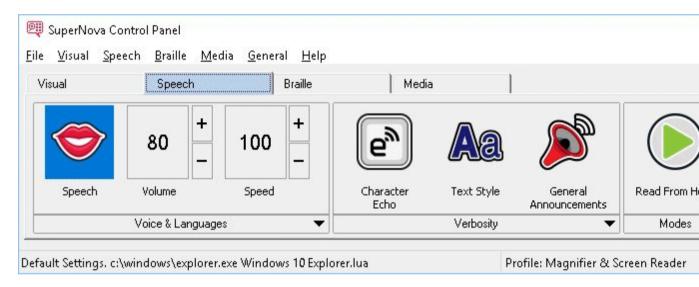

Sie können die Sprachausgabe ein- oder ausschalten in dem Sie die Optionen "Sprache" in der SuperNova Systemsteuerung oder Tastenkommandos verwenden.

Um die Sprachausgabe auszuschalten bis sie manuell wieder aktiviert wird:

Sprache Tastenkommandos

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Sprachausgabe ein- und	LINKE STRG +	LINKE STRG +
ausschalten	0	ALT 0
Stumm	LINKE STRG	STRG

6.2 Lautstärke verändern



In der deutschen Version von SuperNova steht kein Tastenkommando für die Lautstärke zur Verfügung. Nutzen Sie die Einstellung zur Lautstärke in der Systemsteuerung unter Stimmeneinstellungen oder verwenden Sie die Lautstärke Einstellungen von Windows.

Sprache Tastenkommando

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Lautstärke erhöhen	nicht verfügbar	nicht verfügbar
Lautstärke verringern	nicht verfügbar	nicht verfügbar

6.3 Geschwindigkeit verändern



Die spricht Geschwindigkeit der Sprachausgabe kann in der Systemsteuerung oder mit Tastenkommandos verändert werden.

Geschwindigkeit

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Sprechgeschwindigkeit erhöhen	LINKE STRG +	STRG + ALT + BILD AUF
Sprechgeschwindigkeit reduzieren	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + ß	STRG + ALT + BILD AB

6.4 Stimme ändern



Synthesizer beinhalten oft verschiedenen Stimmen, aus denen Sie auswählen können. Jede Stimme hat ihre eigene Betonung, erstellt und verfügbar innerhalb der Sprachparameter.

Um die Stimme zu ändern:

1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Drücken Sie ALT + S.

Das "Sprache" Menü öffnet sich.

3. Drücken Sie die CURSOR AB bis zu "Stimmeneinstellungen" und drücken Sie EINGABE.

Das Dialogfeld "Stimmeneinstellungen" öffnet sich.

4. Drücken Sie STRG + TAB bis Sie die Registerkarte "Stimme und Sprache" geöffnet haben.

- 5. Drücken Sie die TAB Taste bis zur Ausklappliste "Landessprache" und benutzen Sie die CURSORTASTEN, um eine Sprache auszuwählen.
- 6. Wenn Sie verschiedene Sprachen für unterschiedliche Textinhalte einstellen wollen, drücken Sie TAB, bis zum Kontrollfeld "wie Screenreader" und drücken Sie die LEERTASTE, um diese Option abzuwählen. Bewegen Sie sich mit TAB, um die Ausklapplisten der verschiedenen Kategorie zu erreichen. Benutzen Sie die CURSORTASTEN, um eine Stimme auszuwählen.

Anmerkung: Ein Stimmkontext ist eine spezielle Eigenschaft des Textes, welche gesprochen wird um anzuzeigen, wo er herkommt oder welche Einstellung für SuperNova Sie verwenden.

7. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

SuperNova speichert die Änderungen und schließt das Dialogfeld

Wenn Sie keine angenehme Stimme finden sollten, versuchen Sie doch einmal einen anderen Synthesizer oder eine eigene Stimme anzulegen, indem Sie die Optionen auf der Registerkarte "Benutzerdefinierte Stimmen" im Dialogfeld "Stimmeneinstellungen" verwenden.

6.5 Lesestimme ändern



SuperNova kann automatisch die Sythesizer Landessprache ändern, um den Lesefluss zu optimieren. Sie können automatisch zwischen Landessprachen wechseln, einschließlich Latein, arabisch, chinesisch (Mandarin), griechisch, hebräisch, Hindi (Devanagari) und russisch (kyrillisch).

In den Fällen, in denen SuperNova die Landessprache nicht eindeutig bestimmen kann, z.B. weil das gleiche Alphabet in verschiedenen Landessprachen verwendet wird, können Sie ein Tastenkommando benutzen, um die Synthesizer Landessprache auszuwählen.

Beachten Sie, dass nicht alle Synthesizer diese Funktion unterstützen. Für weitere Informationen zu den Synthesizern bzw. den verfügbaren Synthesizer Landessprachen wenden Sie sich bitte an Dolphin oder Ihren örtlichen Dolphin Händler.

6.5.1 Den automatischen Wechsel zwischen Landessprachen aktivieren

Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Drücken Sie ALT + S.

Das Menü "Sprache" öffnet sich.

3. Drücken Sie CURSOR AB bis zu "Stimmeneinstellungen" und drücken Sie EINGABE.

Das Dialogfeld "Stimmeneinstellungen" öffnet sich.

- 4. Drücken Sie STRG + TAB bis zu "Stimme und Sprache".
- Springen Sie mit TABULATOR zum Kontrollfeld "Automatisches Wechseln der Landessprache aktivieren" und drücken Sie die LEERTASTE, um die Option auszuwählen.
- 6. Wenn Sie verhindern möchten, dass die Sprache wechselt, wenn Satzzeichen und Zahlen angesagt werden, springen Sie mit TABULATOR zum Kontrollfeld "Sprechen Ziffern & Satzzeichen in einheitlicher Landessprache" und drücken Sie LEERTASTE.
- 7. Springen Sie mit TABULATOR bis zur Schaltfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

SuperNova speichert die Änderungen und schließt das Dialogfeld

Wenn Sie eine nicht-europäische Version von SuperNova benutzen und das automatische Vorlesen eines Textes in einer europäischen Sprache erforderlich ist, können Sie zusätzlich zu den oben genannten Schritten, in den Einstellungen "Stimme und Sprache" das Kontrollfeld "wie ScreenReader" deaktivieren und die gewünschte europäische Landessprache über die Liste "Standard Landessprache" auswählen.

Sie können die Option "Landessprache" ebenfalls mit den Tastenkommandos für "nächste Landessprache" oder "vorherige Landessprache" ändern. Dies ermöglicht Ihnen den Wechsel der Synthesizer Landessprache ohne dabei das gerade vorgelesene Dokument zu verlassen.

Sprache Tastenkommandos

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des	
	Zahlenblocks	
nächste Landessprache	LINKE STRG +	Keine Belegung
	PUNKT	
vorherige Landessprache	LINKE STRG +	Keine Belegung
	KOMMA	

6.6 Synthesizer ändern

SuperNova arbeitet mit vielen verschiedenen Synthesizern. Die große Anzahl unterstützter Synthesizer bedeutet, dass Sie einen Synthesizer mit zugehöriger Stimme benutzen können, wenn Sie diese als angenehm, klar und verständlich empfinden. Um zu sehen, welche Synthesizer verfügbar sind, besuchen Sie bitte die Dolphin Webseite oder kontaktieren Sie ihren lokalen Dolphin Händler.

Um zu einem anderen Synthesizer zu wechseln:

Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Drücken Sie ALT + S.

Das "Sprache" Menü öffnet sich.

3. Drücken Sie die CURSOR AB bis zu "Stimmeneinstellungen" und drücken Sie EINGABE.

Das Dialogfeld "Stimmeneinstellungen" öffnet sich.

- 4. Drücken Sie STRG + TAB bis Sie die Registerkarte "Konfiguration des Synthesizers" geöffnet haben.
- Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

Das Dialogfeld "Synthesizer wählen" öffnet sich.

- 6. Benutzen Sie die Cursortasten, um einen alternativen Synthesizer auszuwählen.
- 7. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

SuperNova schließt das Dialogfeld und spricht nun mit dem neuen Synthesizer.

Sollten Sie die neue Stimme nicht mögen, öffnen Sie die Registerkarte "Stimme und Sprache", um eine neue Stimme auszuwählen . Nutzen Sie außerdem die Registerkarte "Benutzerdefinierte Stimmen", um die Parameter der bestehenden Stimme zu ändern.

8. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

SuperNova schließt das Dialogfeld "Stimmeneinstellungen".

KAPITEL 7

Lesen und Eingabe.

7.1 Zeichen lesen

Sprechtaste

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
Zeichen an der aktuellen Fokus Position lesen	NUM 4	FESTSTELLTA STE + CURSOR LINKS

Zusätzlich Informationen zum aktuellen Zeichen erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

- x2 das Zeichen wird phonetisch buchstabiert.
- x3 die Attribute des Zeichens inklusive Schriftart und -größe und Schriftschnitt werden angesagt.
- x4 der Unicode Wert des Zeichens wird angesagt.

7.2 Wort lesen

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
der Wort an der aktuellen Fokus Position lesen	NUM 5	FESTSTELLTA STE +
		CURSOR RECHTS

Zusätzliche Informationen zum Wort erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

- x2 das Wort wird buchstabiert.
- x3 das Wort wird phonetisch buchstabiert.

7.3 Zeile lesen, Zeile bis zum Cursor lesen und Zeile ab dem Cursor lesen.

Sie können die aktuelle Zeile lesen, die aktuelle Zeile bis zur Position des Cursors lesen und die aktuelle Zeile von der Position des Cursors an lesen.

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Lesen der Zeile ab der aktuellen Position des Fokus	NUM 6	Keine Belegung
Lesen bis zur Position des Cursors in der aktuellen Zeile	LINKE UMSCHALT + NUM 1	FESTSTELLTA STE + POS1

Lesen ab Cursor in der	LINKE	Drücken Sie
aktuellen Zeile	UMSCHALT +	FESTSTELLTA
	NUM 2	STE + END.

Weitere Informationen über die Zeile erhalten sie, wenn die Tastenkommando mehrmals drücken.

- x2 Die Zeile wird mit Ansage von Großbuchstaben und Leerzeichen gesprochen.
- x3 Die Zeile wird buchstabiert.

7.4 Markierten Text lesen

Der markierte Text in Ihrem Dokument kann mit einem Tastenkommandos vorgelesen werden.

Sprechtaste

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
Markierten Text lesen	NUM 1	FESTSTELLTA STE + UMSCHALT + CURSOR AB

Weitere Informationen über den markierten Text erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

- x2 Der markierte Text wird mit Ansage von Großbuchstaben und Leerzeichen gesprochen.
- x3 Der markierte Text wird phonetisch buchstabiert.

7.5 Fokus lesen

Sprechtaste

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Zahlenblocks	
Den aktuellen Fokus lesen	NUM 0	Drücken Sie FESTSTELLTA STE + UP.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Taste mehrmals drücken.

- x2 Der aktuelle Fokus wird mit Großbuchstaben und Leerzeichen angesagt.
- x3 Der aktuelle Fokus wird phonetisch buchstabiert.

7.6 Steuerelement lesen

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Text des aktuellen	NUM Komma	nicht verfügbar
Steuerelement lesen		

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

- x2 Der Text des aktuellen Steuerelements wird mit Großbuchstaben und Leerzeichen angesagt.
- x3 Der Text des aktuellen Steuerelements wird phonetisch buchstabiert.

7.7 Fenster lesen

Sprechtaste

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
Fenster lesen	NUM 9	FESTSTELLTA STE + B

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

 x2 - Der Text des aktuellen Fensters wird mit Großbuchstaben und Leerzeichen angesagt.

7.8 Status lesen

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Statusinformationen lesen,	NUM 2	FESTSTELLTA
z.B. die Statusleiste		STE + BILD AB

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

- x2 Der Text des aktuellen Status wird mit Großbuchstaben und Leerzeichen angesagt.
- x3 Der Text des aktuellen Status wird phonetisch buchstabiert.

In einigen Applikationen sind unter Umständen andere Befehle für dieses Tastenkommando hinterlegt. Nutzen Sie die Hilfe zur Applikation, um weitere Informationen zu erhalten.

7.9 Kurztaste lesen

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	Universal
Die aktuelle Kurztaste lesen	LINKE	nicht verfügbar
	UMSCHALT +	
	NUM KOMMA	

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das Tastenkommando mehrmals drücken.

• x2 - Die aktuelle Kurztaste wird phonetisch angesagt.

7.10 Datum und Uhrzeit lesen

Mit diesem Tastenkommando wird das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angesagt. Datum und Uhrzeit werden von Windows bereitgestellt.

Sprechtasten

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Datum und Uhrzeit ansagen	LINKE STRG +	FESTSTELLTA
	LINKE	STE + F12
	UMSCHALT +	
	NUM MINUS	

7.11 Überprüfen, wo Sie sind

Sie können sich mit einem Tastenkommando ansagen lassen, an welcher Position Sie gerade stehen. Die Ansage erfolgt abhängig von Ihrer Position mit verschiedenen Informationen zur Umgebung.

Beispiele:

 In einem Textverarbeitungsprogramm sagt die Sprachausgabe den Fenstertitel, den Dokumentnamen und die aktuelle Zeile an. In einem Dialogfeld sagt die Sprachausgabe den Fenstertitel, das aktuelle Register, den Gruppennamen sowie die Informationen zum aktuellen Steuerelement an.

Sprechtasten

Funktion	Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop Universal
Wo bin ich	NUM 7	FESTSTELLTA STE + BILD AUF

7.12 Fortlaufend lesen

Lesen ab hier ist ein spezieller Lesemodus, verfügbar in SuperNova.

Sie können die Funktion "Lesen ab hier" verwenden, um ein Dokument kontinuierlich zu lesen. Es wird bis zum Ende des Dokumentes gelesen oder bis Sie eine Tastenkommando drücken, um das Lesen zu unterbrechen. Das Drücken eines Tastenkommandos, um das Lesen mit SuperNova zu stoppen bewegt den Cursor zum zuletzt gelesenen Wort.

Sie können die Geschwindigkeit der Stimme während des Lesens verändern und sowohl vor- als auch rückwärts durch den Inhalt des Dokuments navigieren, während vorgelesen wird. Beachten Sie dabei, dass der gelesene Dokumentbereich die Navigation des Dolphin Cursors nach Einheiten unterstützen muss, um nach Zeilen, Sätzen, Absätzen und Überschriften bewegt werden zu können. Beispiele für unterstütze Dokumentbereiche sind: Microsoft Word Dokumente und Microsoft Outlook E-Mails.

Lesen ab hier

Funktion	Desktop - Standard	Laptop - Universell
	Nummernblock	
Lesen ab hier starten	NUM PLUS	FESTSTELLTA
		STE +
		CURSOR AB
Start/Stop Lesen ab Hier	LEERTASTE	LEERTASTE
Lesen ab hier stoppen	NUM PLUS	LEERTASTE
	oder Escape	oder Escape
	oder LINKE STRG	oder STRG

7.12.1 Lesen ab hier mit dem Dolphin Cursor

Die Funktion "Lesen ab hier" ist auch mit dem Dolphin Cursor möglich. Dies erlaubt Ihnen, kontinuierlich Informationen zu lesen, die Sie normalerweise nicht lesen könnten - eingeschlossen: Webseiten, Dialogfelder, Listen und Menüs.

Sie können ebenfalls den Dolphin Cursor ausschalten, wenn Sie "Lesen ab hier" anhalten. Wenn Sie den Dolphin Cursor einschalten, wird sich dieser beim zuletzt gelesenen Wort platzieren. Die Anwendung bewegt den Fokus nicht auf eine neue Position.

Lesen ab hier

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Lesen ab hier anhalten und den Dolphin Cursor ausschalten.	NUM MINUS	LEERTASTE

7.12.2 Erweitertes Lesen ab hier

Erweitertes Lesen ab hier erstellt für Sie eine alternative Lesemöglichkeit, wenn Sie den Lesen ab hier Befehl verwenden.

In dieser Lesemöglichkeit zeigt Ihnen ein vergrößertes Fenster den aktuell gelesenen Text als fließenden Text ohne Zeilenumbrüche oben auf dem Bildschirm. Der Rest des Bildschirms ist unvergrößert und bietet die Möglichkeit das visuelle Layout des Dokuments während eines kontinuierlichen Leseprozesses zu verfolgen.

Um diese Option abzuschalten, können Sie entweder die Registerkarte "Erweitertes Lesen ab hier" im Menü "Sprache" der Systemsteuerung SuperNova oder ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Sprache Tastenkommandos

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des	
	Zahlenblocks	
Erweitertes Lesen ab hier	LINKE STRG +	Keine Belegung
	FESTSTELLTA	
	STE + 1	

Anmerkungen:

- Dieses Tastenkommando startet nicht den kontinuierlichen Leseprozess. Sie k\u00f6nnen das kontinuierliche Lesen kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos von "Lesen ab hier" verwenden.
- Erweitertes Lesen ab hier funktioniert nur, wenn Sie eine Vergrößerung verwenden. Wenn die Vergrößerung deaktiviert ist, kann der Lesemodus nicht initialisiert werden. Dies liegt daran, dass das vergrößerte Fenster oben am Bildschirm proportional zu der, von ihnen verwendeten, Vergrößerung ist.

7.13 Die Maus zum Lesen benutzen

Sie können die Maus dazu verwenden, die Funktion "Lesen ab hier" mit einem Mausklick zu starten. SuperNova kann außerdem so eingestellt werden, dass der Text unter dem Mauszeiger automatisch gelesen wird.

7.13.1 Klicken und lesen

Wenn dies das erste Mal ist, das Sie die Funktion "Klicken und lesen" verwenden, müssen Sie diese Option aktivieren.

Um dies zu tun:

Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Drücken Sie ALT + S.

Das "Sprache" Menü öffnet sich.

- 3. Benutzen Sie CURSOR AB bis "Lesen ab hier" und die CURSOR RECHTS, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Benutzen Sie CURSOR AB bis "Klicken und Lesen ab hier" und drücken Sie EINGABE, um diese Option zu aktivieren.
- 5. Drücken Sie ESCAPE, um die SuperNova Systemsteuerung zu schließen.

Sie können "Lesen ab hier starten", indem Sie die MITTLERE MAUSTASTE drücken. Das startet das Lesen von der Position des Mauszeigers. Erneutes Drücken beendet das Lesen.

7.13.2 Text an der Mauszeigerposition lesen

Um die Funktion "Text am Mauszeiger lesen" zu aktivieren:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- Aktivieren Sie den Eintrag "Allgemeine Meldungen". Das Dialogfeld wird geöffnet.
- 4. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Text unter Maus ansagen".
- 5. Aktivieren Sie die Schaltfläche OK. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen.
- 6. Drücken Sie ESCAPE um die Systemsteuerung von SuperNova zu schließen.

Der Text unter dem Mauszeiger wird nun automatisch vorgelesen.

7.14 Ändern der Ansage während der Eingabe

Sie können einstellen:

- Jeder Buchstabe, den Sie eingeben, wird gesprochen.
- Jedes Wort, das Sie eingeben, wird gesprochen.
- Jeder Buchstabe und jedes Wort, das Sie eingeben, wird gesprochen.
- Während der Eingabe wird nichts gesprochen.

Sie können diese Einstellungen in der Systemsteuerung von SuperNova vornehmen.

Um dies zu tun:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Benutzen Sie CURSOR AB bis "Tastenecho" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Tastenecho" wird geöffnet.
- 4. Wählen Sie aus den gegebenen Optionen was Sie während der Eingabe gesprochen werden soll.
- 5. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

Sie können das Tastenecho auch ändern, indem Sie ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Sprache Tastenkommando

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Zahlenblocks	
Zeichenecho umschalten	Drücken Sie FESTSTELLTA STE + Ö	FESTSTELLTA STE + 2

7.15 Großbuchstaben ansagen

Sie können die Ansage von Großbuchstaben in der Systemsteuerung von SuperNova einstellen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass die Einstellungen für SuperNova in Abhängigkeit zu dem von Ihnen verwendeten Synthesizer variieren können.

7.15.1 Die Ansage von Großbuchstaben aktivieren

Sie können die Ansage von Großbuchstaben aktivieren, wenn Sie das Kontrollfeld "Großbuchstaben" im Dialogfeld "Ansage von Textformaten" anklicken, oder ein Tatsenkommando von SuperNova verwenden.

Um das Kontrollfeld "Großbuchstaben" zu aktivieren:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Verwenden Sie die CURSOR AB bis "Textformate" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Ansage von Textformaten" wird geöffnet. Das ist ein Dialogfeld mit mehreren Registerkarten.
- 4. Wenn sie die Ansage der Großbuchstaben in zu bearbeitenden Bereichen verwenden wollen, öffnen Sie die Registerkarte "Textfelder", wählen Sie das Kontrollfeld "Großbuchstaben" und drücken Sie LEERTASTE, um diese Funktion zu aktivieren.
- 5. Wenn sie die Ansage von Großbuchstaben in Bereichen wie Dialogfeldern verwenden wollen, Drücken Sie STRG + TABULATOR TASTE um die Registerkarte "Dialogfelder" zu öffnen, wählen Sie das Kontrollfeld "Großbuchstaben" und drücken Sie LEERTASTE, um diese Funktion zu aktivieren.
- 6. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle anderen Bereiche und Modi, in denen Sie die Ansage der Großbuchstaben aktivieren wollen.

7. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

Um das Tastenkommando von SuperNova zu benutzen:

Sprache Tastenkommandos

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Zahlenblocks	
Großbuchstaben an / aus	Drücken Sie FESTSTELLTA STE + Ä.	Keine Belegung

Beachten Sie, dass dieses Tastenkommando den Status des Kontrollfeldes im Dialogfeld "Ansage von Textformaten" für das Element mit dem derzeitigen Fokus entsprechend ändert.

Beispiel:

- Drücken Sie die Tastenkommando in einem Eingabefeld und es wird sich nur der Status des Kontrollfelds "Großbuchstaben" im Register "Textfelder" des Dialogs "Ansage von Textformaten" ändern.
- Drücken Sie die Tastenkommando in einem Menü und es wird sich nur der Status des Kontrollfelds "Großbuchstaben" im Register "Menü" des Dialogs "Ansage von Textformaten" ändern.

7.15.2 Die Ansage von Großbuchstaben während des Lesens aktivieren

Im Standard wird SuperNova bei Aktivierung der Großbuchstabenansage in Eingabefeldern die Großbuchstaben ansagen, wenn Sie Zeichen eingeben oder in der Zeile navigieren. Um die Großbuchstaben ebenfalls beim Lesen einer Zeile zu aktivieren, z.B. wenn Sie die CURSOR

ABWÄRTS drücken, um Ihren Fokus auf eine neue Zeile zu verschieben, müssen Sie das Kontrollfeld "Großbuchstaben beim Zeile lesen ansagen" aktivieren.

Um dies zu tun:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- Verwenden Sie die CURSOR AB bis "Allgemeine Meldungen" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Allgemeine Meldungen" wird geöffnet.
- 4. Wählen Sie das Kontrollfeld "Großbuchstaben beim Zeile lesen ansagen" und drücken Sie die LEERTASTE, um dieses zu aktivieren.
- Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

7.15.3 Sounds benutzen, um Großbuchstaben zu kennzeichnen

Mit den Standardeinstellungen wird SuperNova die Großbuchstaben mit Worten ansagen. Die Verwendung der Ansage wird von allen Synthesizern unterstützt. Mit einigen Synthesizern ist es ebenfalls möglich, Klänge zu verwenden, um Großbuchstaben zu kennzeichnen.

Um dies zu tun:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.

- Verwenden Sie die CURSOR AB bis "Allgemeine Meldungen" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Allgemeine Meldungen" wird geöffnet.
- 4. Wählen Sie das Kontrollfeld "Nutze Signalton zur Großbuchstabenkennzeichnung" und drücken Sie die LEERTASTE, um diese Option zu aktivieren. Beachten Sie, dass diese Option nicht verfügbar sein wird, wenn Ihr aktueller Synthesizer diese Einstellung nicht unterstützt.
- 5. Wählen Sie die in der Ausklappliste "Klänge" mit den CURSORTASTEN einen Sound, den Sie für die Anzeige von Großbuchstaben verwenden wollen.
- Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

Die folgende Tabelle beschreibt, wie SuperNova Großbuchstaben kennzeichnet, wenn Sie Worte oder Klänge verwenden.

Ansage von Großbuchstaben

Beschreibung	Worte	Klänge
Einen einzigen	Großbuchstabe	1x akustisches
Großbuchstaben lesen	+ Buchstabe	Signal
Ein Wort, beginnend mit	Großbuchstabe	1x akustisches
einem Großbuchstaben,	+ Wort	Signal
lesen		
Ein Wort lesen, in welchem	Alle	2x akustisches
Großbuchstaben verwendet	Großbuchstabe	Signal
wurden	n + Wort	
Ein Wort lesen, das aus	Gemischt	2x akustisches
Groß- und Kleinbuchstaben	Großbuchstabe	Signal
besteht	n + Wort	

7.15.4 Tonhöhe verändern, um Großbuchstaben während der Eingabe zu kennzeichnen

Sie können Großbuchstaben kennzeichnen lassen, wenn Sie die Tonhöhe der Stimme Ihres Synthesizers verändern. Diese Option ist beim Buchstabieren verfügbar.

Beispiele, wenn Sie Text buchstabieren lassen:

- Das Tastenecho zur Ansage jedes Zeichens, dass Sie eingeben, ist aktiv.
- Sie bewegen sich über einen Buchstaben in einer Zeile.
- Sie löschen einen Buchstaben.

Um Großbuchstaben mit der Änderung der Tonhöhe zu kennzeichnen:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Drücken Sie die CURSOR AB bis zu "Stimmeneinstellungen" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Stimmeneinstellungen" wird geöffnet.
- 4. Wählen Sie das Kontrollfeld "Tonhöhe für gesprochene Großbuchstaben erhöhen" und drücken Sie die LEERTASTE, um diese Option zu aktivieren. Beachten Sie, dass diese Option nicht verfügbar sein wird, wenn Ihr aktueller Synthesizer diese Einstellung nicht unterstützt.
- Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

7.16 Die Taste sprechen, die Sie drücken

Die Taste, die gedrückt wird, kann gesprochen werden. Die Kontrolle über die Tastatur wird somit vergrößert. Die Funktion wird Tastenecho genannt.

Um das Tastenecho zu aktivieren:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Tastenecho" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Tastenecho" wird geöffnet.
- 4. Drücken Sie LEERTASTE im Kontrollfeld "Automatisches Tastenecho", wenn das automatische Tastenecho abgeschaltet werden soll und Sie stattdessen eigene Einstellungen festlegen möchten.
- 5. In der Gruppe "Gewähltes Tastenecho" legen Sie mit den Kontrollfeldern fest, welche Tasten oder Tastengruppen bei der Eingabe angesagt werden sollen.
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen.

7.17 Ändern Sie die Ansage von SuperNova für jedes Steuerelement.



Sie können die Art der Ansage von SuperNova zu Schaltflächen, Kontrollfeldern, Menüs oder anderen Steuerelementen ändern, indem Sie die Stufe der Ausführlichkeit verändern. Je kleiner die Ausführlichkeitsstufe ist, desto weniger Informationen gibt Ihnen SuperNova über das Steuerelement aus.

Um die Ausführlichkeit zu ändern:

1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Drücken Sie ALT + S.

Das Menü "Sprache" öffnet sich.

3. Suchen Sie den Eintrag "Ausführlichkeitsstufe" und öffnen Sie mit Cursor rechts.

Das Untermenü wird geöffnet.

4. Nutzen Sie die Cursortasten, um einen Eintrag zu wählen, bestätigen Sie mit ENTER.

Die Ausführlichkeitsstufe wird geändert, das Menü wird geschlossen.

Sie können die Ausführlichkeit auch verändern, indem Sie ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Sprache Tastenkommando

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Ausführlichkeitsschema wechseln	Keine Belegung	FESTSTELL + V

7.18 Ansage wiederholter Zeichen ändern

Die Art und Weise der Ansage von wiederholten Zeichen innerhalb einer Zeile können Sie verändern. Die nebeneinander angezeigten Zeichen (z.B. Bindestriche) können individuell gesprochen, als Anzahl oder mit einem Signal ausgegeben werden.

Die Einstellung nehmen Sie in der Systemsteuerung vor:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie den Eintrag "Allgemeine Ansagen". Das Dialogfeld wird geöffnet.
- 4. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Wiederholungen". Ein weiteres Dialogfeld wird geöffnet.
- 5. Wählen Sie hier zwischen den verschiedenen Optionen die gewünschte Ansage für die Wiederholungen aus.
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche Schließen. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen.

Damit die Einstellungen wirksam werden können, müssen Sie im Dialog "Textformate" aktiviert werden.

Aktivierung der Wiederholungen:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie den Eintrag "Textformate". Das Dialogfeld wird geöffnet.

- 4. Für jeden Bereich, in dem die Ansage zu Wiederholungen aktiv werden soll, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollfeld.
- 5. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen.

KAPITEL 8

Braille Einstellungen

8.1 Brailleausgabe ein- oder ausschalten



Die Brailleausgabe kann in der Systemsteuerung von SuperNova oder mit einem Tastenkommando ein- oder ausgeschaltet werden.

Um die Brailleausgabe ein- oder auszuschalten:

Drücken Sie LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + 0.

8.2 Anzeige von Großbuchstaben

In einigen Kurzschriftvarianten werden Großbuchstaben mit einem speziellen Vorzeichen versehen, um die Großschreibung kenntlich zu machen.

Die Anzeige des Vorzeichens für die Braille Kurzschrift kann eingestellt werden:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie den Eintrag "Zeichen" und aktivieren Sie das Untermenü.

- 4. Wählen Sie "Optionen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld wird geöffnet.
- In der Gruppe "Kurzschrift" aktivieren Sie das Kontrollfeld "Zeige Großbuchstaben", um das Vorzeichen für die Kennzeichnung in Braille Kurzschrift zu aktivieren. Deaktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn das Vorzeichen nicht erscheinen soll.
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen, das Dialogfeld wird geschlossen.

Als zusätzliche Option können die Großbuchstaben unabhängig von Computerbraille oder Kurzschrift auf der Braillezeile auch blinkend präsentiert werden. Die Einstellung dazu finden Sie ebenfalls im Dialogfeld "Zeichen".

Mit dieser Einstellung wird jeder Großbuchstabe auf der Braillezeile blinken. Die Blinkrate können Sie im Dialogfeld "Cursor" für die Braillezeile festlegen. Die Anzeige der blinkenden Großbuchstaben ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Großbuchstaben in Computerbraille mit den Punkten 7 und 8 gekennzeichnet werden.

8.3 Anzeigen der Cursorposition

Sie können sich die Cursorposition auf Ihrer Braillezeile anzeigen lassen. Das kann nützlich sein, wenn Sie sich in Eingabebereichen befinden.

Zum Anzeigen der Cursorposition auf der Braillezeile:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.

- 3. Navigieren Sie mit CURSOR AB bis "Cursor" und drücjken Sie CURSOR RECHTS, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Wählen Sie den Eintrag "sichtbar" und bestätigen Sie mit ENTER.

Wenn Sie die Funktion "Anzeigen der Cursorposition" ausschalten wollen, wiederholen Sie einfach die oben genannten Schritte und deaktivieren Sie den Menüeintrag "sichtbar".

Sie können die Cursorposition auch ein- und ausblenden, indem Sie ein Braille Tastenkommando verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Übersicht der Braille Tastenkommandos Ihrer Braillezeile.

8.4 Attribute anzeigen (fett, kursiv, etc.)

Erweiterte Zeichen werden auf der Braillezeile mit einem zusätzlichen Punkt 8 markiert. Ein erweitertes Zeichen ist jedes Zeichen, das nicht normal angezeigt wird, wie z.B. fett, unterstrichen, andere Schriftgröße.

Ein sinnvolles Beispiel ist die Anzeige der Kennbuchstaben in einem Menü oder einem Dialogfeld. Für den unterstrichenen Buchstaben wird ein zusätzlicher Punkt 8 angezeigt.

Um die Attributkennzeichnung zu aktivieren:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Anzeige" und drücken Sie ENTER, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Selektieren Sie den Eintrag "Attribute" und drücken Sie ENTER, um ggf. zu aktivieren.

Wenn die Anzeige der Attribute abgeschaltet werden soll, wiederholen Sie die Schritte, um den Eintrag "Attribute" zu deaktivieren.

Die Cursorposition kann außerdem mit einem Brailletastenkommando einund ausgeblendet werden. Informieren Sie sich in der Übersicht der Braille Tastenkommandos für weitere Informationen.

Die Festlegung der erweiterten Zeichen nehmen Sie im Dialogfeld "Einstellungen" vor. Das Dialogfeld wird mit dem Eintrag "Einstellungen" aus dem Untermenü "Anzeige" geöffnet. Das Dialogfeld enthält das Gruppenfeld "Zeichenattribute".

8.5 Fokusverfolgung abschalten

Im Standard folgt die Braillezeile dem Fokus und präsentiert die entsprechende Zeile. SuperNova nennt dies Fokusverfolgung.

Die Fokusverfolgung kann abgeschaltet werden. der Inhalt der Braillezeile kann damit unabhängig vom aktuellen Fokus präsentiert werden. So können Sie z.B. die Fokusverfolgung abschalten und den Fortschritt eines Internet Downloads kontrollieren.

Um die Fokusverfolgung abzuschalten:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Braille Modus" und öffnen Sie das Untermenü.
- 4. Wählen Sie "Verfolgung" und drücken Sie ENTER um den Eintrag zu aktivieren.

Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie die Fokusverfolgung wieder einschalten wollen.

Die Fokusverfolgung kann ebenfalls mit einem Tastenkommandos an der Braillezeile ein-oder ausgeschaltet werden.

Lesen Sie die den Abschnitt über die Tastenkommandos für die Braillezeile, um weitere Informationen zu erhalten.

Hinweise:

- Beim Abschalten der Fokusverfolgung wechseln Sie automatisch in den physischen Modus. Beim Einschalten der Fokusverfolgung wird in den zuvor aktiven Braillemodus zurück gewechselt.
- Die Navigation mit dem Fokus oder dem Cursor ist auch bei abgeschalteter Fokusverfolgung möglich.

8.6 Den tatsächlichen Inhalt des Bildschirms präsentieren

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Präsentation der Informationen auf der Braillezeile.

- Logischer Modus.
 - Dies ist der Standard, der von SuperNova verwendet wird. In dieser Präsentationsart wird die Braillezeile den Text im logischen Zusammenhang mit dem Fokus anzeigen. Dies entspricht der Sprachausgabe. Im logischen Modus wird die Braillezeile nicht die Position der Information auf den Bildschirm bezogen anzeigen.
- Physischer Modus.
 In diesem Modus zeigt die Braillezeile den tatsächlichen Inhalt des Bildschirms. Im physischen Modus können Sie die Zeichen der Zeile und die Zwischenräume anzeigen lassen oder eine detaillierte Ansicht des Bildschirmlayouts für eine genaue Formatierung wählen.

Um den physischen Modus zu aktivieren:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Braille-Modus" und drücken Sie ENTER, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Selektieren Sie den Eintrag "Physischer Modus" und drücken Sie ENTER, um ggf. zu aktivieren.

Wenn der logische Modus eingeschaltet werden soll, wiederholen Sie die Schritte, um den Eintrag "physischer Modus" zu deaktivieren.

Die Umschaltung zwischen physischem und logischem Modus kann außerdem mit einem Brailletastenkommando erfolgen. Informieren Sie sich in der Übersicht der Braille Tastenkommandos für weitere Informationen.

Die Art und Weise, wie der physische Modus den Bildschirminhalt präsentiert, legen Sie im Dialogfeld "Braille Anzeige Einstellungen" fest. Das Dialogfeld wird mit dem Eintrag "Einstellungen" aus dem Untermenü "Anzeige" geöffnet.

8.7 Auswahl Computer Braille oder Braille (Kurzschrift)

SuperNova unterstützt zwei Arten der Brailleausgabe:

- Computer Braille.
 Computer Braille verwendet konsequent ein Braille Modul pro Zeichen.
 Computerbraille wird in den meisten Appliaktionen erforderlich, wo jedes einzelne Zeichen von Beutung ist.
- Braille Übersetzung
 Mit der Braille Übersetzung werden einzelne
 Buchstabenkombinationen abhängig von der Landessprache in eine

Kurzform umgewandelt. Dadurch wird Platz gespart. Die Braille Übersetzung umfasst sowohl Vollschrift als auch Kurzschrift. Die Braille Übersetzung ist vorteilhaft zum Lesen von einfachen Texten.

Um zur Braille Übersetzung zu wechseln

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie CURSOR AB bis "Zeichen" und bestätigen Sie mit ENTER, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Wählen Sie "Braille Kurzschrift" und drücken sie ENTER.

Um wieder zum Computer Braille zurückzukehren, wiederholen Sie einfach die oben genannten Schritte und deaktivieren den Menüeintrag "Braille Kurzschrift".

Sie können auch zwischen Computer Braille und Braille Kurzschrift hin und her springen, indem Sie ein Braille Tastenkommando verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Übersicht der Braille Tastenkommandos Ihrer Braillezeile.

Um eine Auswahl zu treffen, welche Braille Ausgabetabelle und Braille Sprache verwendet werden, benutzen Sie die Optionen in dem Dialogfeld "Allgemeine Braille Einstellungen".

8.8 Braille Eingabe mit Ihrer Braillezeile



Einige Braillezeilen verfügen über eine Gruppe mit sechs oder acht Schaltflächen, die wie bei einer Punktschriftmaschine angeordnet sind. Mit diesen Schaltflächen simulieren Sie die Eingabe auf der Computer Tastatur.

Ein-/Ausschalten der Braille Eingabe:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Eingabe" und drücken ENTER, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Wählen Sie "Braille Tasten" und bestätigen Sie mit ENTER. Die Braille Eingabe ist aktiv, wenn der Menüeintrag markiert ist. Wenn Sie die Markierung im Menüeintrag entfernen, ist die Braille Eingabe ausgeschaltet.

Sie können Ihre Eingaben entweder mit Computer Braille oder Braille (Kurzschrift) vornehmen. Wenn Sie die Braille Kurzschrift nutzen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass der Eintrag "Braille Kurzschrift Eingabe" im gleichen Untermenü ausgewählt ist. Die Eingabe in Computer Braille ist aktiv, wenn der Eintrag "Braille Kurzschrift Eingabe" nicht markiert ist.

Im Eingabemodus "Computer Braille" werden 8 Punkte benutzt. Jedes Braillezeichen, das Sie eingeben ist auch ein Zeichen in Ihrem Dokument.

Wenn Sie den Eingabemodus Braille (Kurzschrift) benutzen, werden 6 Punkte und verkürztes oder nicht verkürztes Braille verwendet (abhängig von der eingestellten Eingabesprache). Bitte beachten Sie, dass das Braillezeichen, das Sie schreiben nur in Ihrem Dokument erscheint, wenn Sie die Braille Leertaste drücken oder eine andere Taste, die keine Kombination von Braillepunkten ist.

Um eine Auswahl zu treffen, welche Braille Ausgabetabelle und Braille Sprache verwendet werden, benutzen Sie die Optionen in dem Dialogfeld "Braille Allgemeine Einstellungen".

8.9 Ändern der Braille Tabelle

SuperNova unterstützt zwei Arten der Brailleausgabe: Computer Braille oder Braille Übersetzung. Die Braille Übersetzung umfasst sowohl Vollschrift als auch Kurzschrift.

Um eine Auswahl zu treffen, welche Braille Tabelle und Braille Sprache verwendet werden, benutzen Sie die Optionen in dem Dialogfeld "Allgemeine Braille Einstellungen". Hier können Sie eine Landessprache für die "Unicode in Braille Konvertierung" (Computer Braille) Tabelle und eine Landessprache für die "Unicode in Braille (Kurzform) Konvertierung" Tabelle einstellen.

Tipp: Mit dem Eintrag "Braille Übersetzung" im Untermenü "Braille", "Zeichen" können Sie zwischen der Computer Braille Ausgabe und der Braille (Kurzschrift) Ausgabe hin und her schalten.. Deaktivieren Sie diesen Menüeintrag, um die Computer Braille Ausgabe zu nutzen. Für weitere Informationen siehe "Auswahl Computer Braille oder Braille (Kurzschrift)".

8.10 Braillezeile ändern

SuperNova arbeitet mit vielen verschiedenen Braillezeilen. Eine Liste aller unterstützen Braillezeilen finden auf der Webseite von Dolphin.

Um eine Braillezeile zu wählen:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Allgemeine Einstellungen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld wird geöffnet.

- 4. Wählen Sie das Register "Braillezeile".
- Nutzen Sie die Tabulatortaste, um zur Schaltfläche "Braillezeile wählen" zu gelangen. Drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld zeigt eine Liste aller momentan von SuperNova am PC erkannten Braillezeilen an.
- 6. Wählen Sie das gewünschte Modell mit den Cursortasten.
- 7. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen. Sie gelangen zu den "Allgemeinen Einstellungen" zurück.

Die neue Braillezeile sollte nun arbeiten.

Wenn die neue Braillezeile nicht in der Liste erscheint:

- Prüfen Sie, ob die Braillezeile korrekt am PC angeschlossen wurde.
- Prüfen Sie, ob die Installation und Konfiguration des Herstellers der Braillezeile korrekt abgeschlossen wurde.
- Prüfen Sie, ob Dolphin SAM die Braillezeile korrekt erkennt. Die SAM Konfiguration finden Sie, wenn Sie im Menü "Allgemein" der Systemsteuerung von SuperNova den Eintrag "Erweiterte Optionen" aktivieren. Im Register "Konfiguration" finden Sie die Schaltfläche "SAM Konfiguration".

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Hersteller der Braillezeile für Unterstützung.

KAPITEL 9

Braille lesen

9.1 Brailletasten kennenlernen

Sie können die Tastaturhilfe von SuperNova nutzen, zum die Tasten Ihrer Braillezeile kennen zu lernen. Die Tasten werden nicht an die Applikation weitergegeben, wenn die Tastaturhilfe aktiv ist.

Um die Tastaturhilfe zu aktivieren:

Drücken Sie FESTSTELLTASTE + MINUS.

Um eine Liste der neuesten Braillekommandos zu erhalten, besuchen Sie www.yourdolphin.com/braillekeys. http://www.yourdolphin.com/braillekeys

9.2 Navigation über den Bildschirm

In der Applikation wird die Braillezeile automatisch das Steuerelement anzeigen, auf dem der Fokus steht. Im logischen Modus wird außerdem jeder Text, der mit dem Steuerelement in Verbindung steht, angezeigt.

Sie können die Funktionen zur Navigation an der Braillezeile nutzen, um eine andere Zeile anzuzeigen oder das Lesefenster in den nächsten Bereich zu verschieben.

Die wichtigsten Tasten an der Braillezeile sind die Funktionen zu "Lesen vorwärts" und "Lesen rückwärts". Hierbei wird das Lesefenster der Braillezeile in den nächsten bzw. vorherigen Textbereich verschoben.

Braille Tasten zur Navigation

Funktion	Tasten	Braille Tasten
Vorwärts lesen	LINKE STRG +	Vorwärts lesen
	LINKE	
	UMSCHALT +	
	PUNKT	
Rückwärts lesen	LINKE STRG +	Rückwärts
	LINKE	lesen
	UMSCHALT +	
	KOMMA	

Die Anzahl der Module, um die das Braillefenster verschoben wird, kann in der Systemsteuerung mit dem Wert für den Bildlaufrand festgelegt werden. Sie finden die Einstellung dazu im Menü "Allgemeine Einstellungen", im Register "Braille".

Weitere Navigationstasten, die in der Regel mit einer Taste an der Braillezeile auszuführen sind:

Zeilenanfang

Das Lesefenster der Braillezeile zeigt den Zeilenanfang. Im logischen Modus wird der Anfang der aktuellen Beschreibung angezeigt.

Zeilenende

Das Lesefenster zeigt das Zeilenende. Im logischen Modus wird das Ende des beschreibenden Textblocks angezeigt.

Breite nach links

Die Braillezeile springt um die volle Anzahl der Module nach links.

Breite nach rechts

Die Braillezeile springt um die volle Anzahl der Module nach rechts.

Halbe Breite links

Die Braillezeile springt um die Hälfte der Anzahl der Module nach links.

Halbe Breite rechts

Die Braillezeile springt um die volle Anzahl der Module nach rechts.

Zelle links

Die Braillezeile springt ein Modul nach links.

Zelle rechts

Die Braillezeile springt ein Modul nach rechts.

Zeile auf

Die Braillezeile springt eine Zeile nach oben.

Zeile ab

Die Braillezeile springt eine Zeile nach unten.

Oben

Die Braillezeile zeigt die oberste Zeile des Fensters.

Unten

Die Braillezeile zeigt die unterste Zeile des Fensters.

Zum Fokus

Die Braillezeile springt an die Fokusposition zurück.

Die Funktion "zurück zum Fokus" setzt die Braillezeile an die Position zurück, an der Sie die Navigation gestartet haben, in der Regel ist dies die aktuelle Fokusposition. Die Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Dokument

bearbeiten und direkt zum Fokus zurück springen möchten. Natürlich wird die Braillezeile an den Fokus gesetzt, wenn Sie eine Eingabe vornehmen, jedoch erlaubt diese Funktion die Fokusposition zu erreichen, ohne die Applikation zu beeinflussen.

Hinweise:

- Wenn Sie auf- und abwärts navigieren, wechseln Sie zwischenzeitlich in den physischen Modus. Der logische Modus wird wieder aktiviert, wenn Sie zum Fokus zurück springen.
- Die Navigation mit der Braillezeile ist immer unabhängig von der Sprachausgabe und dem Cursor.

9.3 Change what SuperNova tells you about each type of control



Sie können mit der Braille Ausführlichkeit die Auswahl der Informationen festlegen, die von SuperNova über die Steuerelemente wie Kontrollfelder, Schaltflächen, Menüeinträge oder andere zur Verfügung stehen. Je kleiner das Ausführlichkeitsschema, desto weniger Informationen wird SuperNova für das entsprechende Steuerelement anzeigen.

Um die Ausführlichkeitsstufe zu ändern:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Ausführlichkeitsstufe" und öffnen Sie das Untermenü.

4. Wählen Sie ein Ausführlichkeitsschema und drücken Sie ENTER.

Sie können die Ausführlichkeitsstufe auch mit einem Tastenkommando von SuperNova ändern.

Um das Ausführlichkeitsstufe zu ändern:

Drücken Sie LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTASTE + ß.

9.4 Den Cursor mit den Routingtasten bewegen

Viele Braillezeilen verfügen über so genannte Cursorroutingtasten, die sich oberhalb der einzelnen Braillemodule befinden. Wenn Sie eine von diesen Tasten drücken, simuliert die Software einen einzelnen Mausklick an der Position, die der gedrückten Routingtaste entspricht.

Beispiele:

- In einem Eingabefeld wird die Schreibmarke dadurch sofort zu diesem Punkt bewegt.
- Durch das Drücken einer Routingtaste über einer Schaltfläche wird diese Schaltfläche aktiviert
- Das Drücken einer Routingtaste über einem Kontrollfeld aktiviert bzw. deaktiviert den Status des Kontrollfelds.

Einige Braillezeilen haben eine zweite Zeile mit Routingtasten. Diese zweite Zeile kann dazu verwendet werden, das Zeichen an der entsprechenden Position zu beschreiben.

9.4.1 Aktion der Cursorroutingtasten ändern

In der Systemsteuerung von SuperNova können Sie festlegen, welche Aktion die Cursorroutingtasten der Braillezeile ausführen sollen.

Um dies zu tun:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Eingabe" und drücken ENTER, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Wählen Sie den Eintrag "Routingtasten" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Routing" wird geöffnet.
- 5. Wählen Sie eine Aktion, die die Routingtaste ausführen soll.
- 6. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

9.4.2 Die Aktion der Routingtasten für den Dolphin Cursor festlegen.

Die Aktion der Routingtaste für den Dolphin Cursor ist einstellbar. Die Einstellung wird in der Systemsteuerung von SuperNova vorgenommen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.

- Wählen Sie "Eingabe" und drücken ENTER, um das Untermenü zu öffnen.
- 4. Wählen Sie den Eintrag "Routing-Tasten mit Dolphin Cursor" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Aktion der Routingtasten mit Dolphin Cursor" wird geöffnet.
- 5. Wählen Sie eine Aktion, die die Routingtaste ausführen soll.
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

9.4.3 Aktionen der Routingtasten für die Statusmodule

Mit den Routingtasten über den Statusmodulen können Sie Kommandos von SuperNova ausführen. Diese Routingtasten können nicht den Cursor bewegen, daher ist es sinnvoll, sie mit als Tastenkommandos zu verwenden.

Nutzen Sie das Dialogfeld Tastatur und die Tastenkommandos aus der Systemsteuerung, um diesen Routingtasten eine Funktion zu geben.

9.5 Textattribute prüfen

Jedes Zeichen hat bestimmte Eigenschaften (Attribute), z.B. die Schriftgröße die Schriftart und die Schriftfarbe.

Im Attributmodus werden diese Attribute angezeigt.

Zwei verschiedene Attributmodi sind verfügbar:

- Attributanzeige
- Attributbeschreibung (Zeichen beschreiben)

In der Attributanzeige wird eine spezielle Punktkombination verwendet, um das Attribut jedes Zeichen auf der Braillezeile zu präsentieren. In der Attributbeschreibung wird eine vollständige Beschreibung des aktiven Zeichens auf der Braillezeile angezeigt.

Braille Attributmodus

Funktion	Tasten	Braille Tasten
Attributanzeige des Zeichens	LINKE STRG +	Attribute
umschalten	LINKE	durchlaufen
	UMSCHALT +	
	6	
Attributbeschreibung	LINKE STRG +	Attributbeschrei
	LINKE	bung
	UMSCHALT +	
	7	

9.5.1 Attribute durchlaufen

Das Tastenkommando für diese Funktion schaltet zwischen den verschiedenen Attributanzeigen auf der Braillezeile um. Für jedes Zeichen wird nicht das Zeichen selbst, sondern eine Punktkombination für das entsprechende Attribut ausgegeben.

Das Kommando "Attribute durchlaufen" ist eine Mehrfach-Aktion.

- 1. Beim ersten Tastendruck wird die Größe jedes Zeichen angezeigt.
- 2. Beim zweiten Tastendruck wird der Schriftschnitt (Art) angezeigt.
- Beim dritten Tastendruck wird die Vorder- und Hintergrundfarbe der Zeichen angezeigt.
- 4. Beim vierten Tastendruck wird nur die Vordergrundfarbe angezeigt.

Braille lesen

- 5. Beim fünften Tastendruck wird die Schriftart des Zeichens präsentiert.
- 6. Beim nächsten Tastendruck verlassen Sie den Attributmodus.

Wenn der Attributmodus aktiv ist, kann er mit jeder anderen Taste abgebrochen werden.

Eine Beschreibung der Braille Ausgabe für jedes Attribut finden Sie unten.

Mit dieser Funktion ist es einfach herauszufinden, ob sich ein Attribut geändert hat. Nutzen Sie auch die Attributanzeige.

Größe

Die Größe des Zeichens wird mit einer zweistelligen Zahl angezeigt. Die oberen vier Punkte des Braillemoduls zeigen die erste Ziffer, die unteren vier Punkte die zweite Ziffer. Die Schriftgröße 10 wird so zum Beispiel mit den Punkten 1678 angezeigt (A über J).

Schriftschnitt (Art)

Der Schriftschnitt eines Zeichens wird wie folgt angezeigt:

- Punkt 1: kursiv
- Punkt 4: unterstrichen
- Punkt 2: durchgestrichen und/oder andere Farbe
- Punkt 5: fett
- Punkt 3: dünn
- Punkt 6: hervorgehoben
- Punkt 7: Link

 Punkt 8: Normal (nicht kursiv, nicht unterstrichen, nicht durchgestrichen, nicht fett und nicht dünn.)

Farbe

Die Vordergrundfarbe wird mit den oberen vier Punkten, die Hintergrundfarbe mit den unteren vier Punkten präsentiert.

Vordergrundfarbe

In der alleinigen Anzeige der Vordergrundfarbe werden alle acht Punkte zur Anzeige verwendet. Die Farbe wird im RGB System präsentiert: die Punkte 123 zeigen den Farbwert für rot, die Punkte 456 zeigen den Farbwert für grün, und die Punkte 78 zeigen den Farbwert für blau. Die Farbe Weiß wird mit allen acht Punkten, die Farbe Schwarz mit einem leeren Modul angezeigt.

Schriftart

Jedes Modul zeigt ein Symbol, dass die Schriftart des Zeichens repräsentiert. Da für jede Schriftart nur ein einziges Zeichen zur Verfügung steht, kann auf dem Symbol nicht sofort der Schriftartname ermittelt werden. Die Schriftart Arial wird z.B. mit den Punkten 15678 präsentiert. Um den Namen der Schriftart vollständig zu erhalten, benutzen Sie die Funktionen "Attributbeschreibung".

9.5.2 Attributbeschreibung

Das Tastenkommando zur Attributbeschreibung wird die gesamte Braillezeile für eine detaillierte Beschreibung des aktuellen Zeichens verwenden. Nutzen Sie diese Beschreibung, wenn die Anzeige mit einzelnen Punktkombinationen zu kompliziert wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie auf eine Punktkombination stoßen, die Sie nicht auf Anhieb interpretieren können.

- 1. Nutzen sie die Routingtaste, um den Cursor an das entsprechende Zeichen zu ziehen.
- 2. Drücken Sie das Tastenkommando für die Attributbeschreibung.
- 3. Verwenden Sie die Navigationstasten am der Braillezeile zum Lesen der Beschreibung, wenn diese länger als Ihrer Braillezeile sein sollte.

Die Beschreibung beinhaltet das Zeichen selbst zusammen mit allen Attributen, die verfügbar sind.

Die Beschreibung erfolgt in etwa so:

"€ Euro, Arial, normal, 14PT, Schwarz, Weiß, 20ac"

Erklärung:

- Das zu beschreibende Zeichen als Zeichen, in diesem Fall das Eurozeichen
- Der Name des Zeichens (das Eurozeichen).
- Die Schriftart des Zeichens
- Der Schriftschnitt (Art)
- Die Größe in Punkten.
- Die Vordergrundfarbe des Zeichens
- Die Hintergrundfarbe des Zeichens
- Der Unicode Wert des Zeichens

9.6 Informationen in den Statusmodule der Braillezeile

Viele Braillezeilen verfügen am linken Rand über Statusmodule. SuperNova benutzt dieses Statusmodule, um zusätzliche Informationen zum aktuellen Zeichen zu präsentieren. Dies kann z.B. die Schriftgröße oder Schriftfarbe sein.

Die folgenden Informationen können in den Status Modulen angezeigt werden:

- Funktionen der Braillezeile
- Cursorposition innerhalb der Zeile
- Typ des aktuellen Fokus
- Alle Attribute des aktuellen Zeichens am Cursor

Sie können so viele Optionen, wie Statusmodule verfügbar sind, anzeigen lassen.

Für jede Information wird ein Statusmodul verwendet.

Hinweis:

 Auch wenn Ihre Braillezeile nicht über separate Statusmodule verfügt, können Sie diese über den SAM Treiber simulieren. Starten Sie dazu die "SAM Konfiguration" aus der SAM Systemsteuerung. Die "SAM Konfiguration" erreichen Sie über das Dialogfeld "Erweiterte Optionen", dass aus dem Menü "Allgemein" aktiviert wird.

9.7 Die Brailleausgabe auf dem Bildschirm anzeigen

Die Anzeige der Braillezeile kann in einem schmalen Fenster auf dem Bildschirm präsentiert werden. Dies passiert mit dem Befehl "Zeige Braille am Bildschirm" aus dem Menü "Braille".

Um die Brailleausgabe am Bildschirm ein-oder auszuschalten:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + B. Das Menü "Braille" wird geöffnet.
- 3. Aktivieren Sie den Befehl "Zeige Braille am Bildschirm". Die Änderung wird übernommen und das Menü wird geschlossen.

Die Brailleanzeige am Bildschirm kann auch mit einem Tastenkommando ein-oder ausgeschaltet werden:

Drücken Sie LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + 1.

Sie können die Position und die Größe des Fensters in den "erweiterten Optionen" aus dem Menü "Braille" verändern.

KAPITEL 10

Dolphin Cursor

Der Dolphin Cursor ist ein spezieller Cursor von SuperNova. Der Dolphin Cursor erlaubt das Lesen des Bildschirminhalts mit der Tastatur Zeilenweise, Wortweise oder Zeichenweise. Nutzen Sie den Dolphin Cursor, um jeglichen Teil des Bildschirms zu erreichen.

10.1 Dolphin Cursor aktivieren

Der Dolphin Cursor kann bei Aktivierung an seine letzte Position oder an die aktuelle Fokus Position gesetzt werden.

Dolphin Cursor Tasten

Funktion	Standardwerte	Laptop
	des	Universal
	Zahlenblocks	
Dolphin Cursor aktivieren	NUM MINUS	FESTSTELLTA
		STE + Z
Dolphin Cursor aktivieren und	NUM STERN	nicht verfügbar
an die aktuelle Fokus		
Position setzen		

10.2 Dolphin Cursor ausschalten

Das Abschalten des Dolphin Cursors hängt davon ab, wie er aktiviert wurde. Der Dolphin Cursor kann automatisch von SuperNova oder manuell deaktiviert werden.

Dolphin Cursor Tasten

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Dolphin Cursor abschalten	NUM MINUS	FESTSTELLTA
nachdem er manuell aktiviert		STE + Z
wurde		
Dolphin Cursor abschalten	STRG + 4	nicht verfügbar
und verhindern das er		
automatisch wieder aktiviert		
wird		

Der Dolphin Cursor wird ebenfalls automatisch deaktiviert, wenn ein Ereignis auf dem Bildschirm eintritt, z.B. wenn ein Meldungsfenster erscheint.

10.3 Automatischen Dolphin Cursor abschalten

SuperNova schaltet den Dolphin Cursor in bestimmten Situationen automatisch ein. Dies passiert im immer dann, wenn der Text des Bildschirms nicht mit den Tasten der Tastatur zeilenweise lesbar ist.

Wenn Sie den automatischen Dolphin Cursor nicht nutzen wollen, müssen Sie diese Automatik abschalten.

Den automatischen Dolphin Cursor abschalten:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + S. Das Menü "Sprache" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Erweiterte Optionen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird geöffnet.

- 4. Wählen Sie das Kontrollfeld "Benutze Dolphin Cursor automatisch" im Register "Cursor" aus und stellen Sie sicher, dass es nicht aktiviert ist.
- 5. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.
- Drücken Sie ESCAPE, um die SuperNova Systemsteuerung zu verlassen.

Wenn Sie diese Einstellung einer bestimmten Applikation zuordnen wollen, müssen Sie zuvor eine Applikations-Einstellungsdatei erzeugen. Informieren Sie sich im Abschnitt "Applikationseinstellungen erzeugen".

10.4 Text mit dem Dolphin Cursor markieren

Text auf dem Bildschirm lässt sich mit dem Dolphin Cursor markieren. Dies beinhaltet Text in einem Dialogfeld oder Meldungsfenster oder auch Text auf einer Webseite oder in einem Dokument.

Um Text mit dem Dolphin Cursor zu markieren:

- Markieren Sie den Text mit den Tasten UMSCHALT + CURSORTASTEN oder drücken Sie Strg+ A, um den gesamten Text zu markieren.
- 2. Drücken Sie STRG + C, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren.
- 3. Bewegen Sie sich an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll.
- 4. Drücken Sie STRG + V, um den Inhalt der Zwischenablage einzufügen.

10.5 Mit dem Dolphin Cursor Suchbefehl suchen

Sie können den Dolphin Cursor Suchbefehl verwenden, um eine Standardsuche nach Text auf dem Bildschirm, in Dokumenten oder Webseiten zu starten. In manchen Anwendungen gibt es erweiterte Dolphin Cursor Suchbefehle.

Eine Standardsuche ausführen:

- 1. Aktivieren Sie den Dolphin Cursor.
- Drücken Sie F3. Sie gelangen Sie in ein nicht sichtbares Eingabefeld.
- 3. Geben Sie Ihren Suchbefehl ein. Der eingegebene Suchbegriff ist abhängig von der Groß-/Kleinschreibung, es wird immer eingefügt, das Tastaturlayout wird von der Applikation vorgegeben.
- Drücken Sie EINGABE und starten Sie die Suche im aktuellen Fenster.
 Der Dolphin Cursor springt zum ersten gefundenen Ergebnis.
- 5. Um den nächsten Treffer zu finden, drücken Sie F4. Um den vorherigen Treffer zu finden, drücken Sie F2.

Beachten Sie, dass SuperNova Ihren letzten Suchabschnitt speichert, bis Sie SuperNova schließen. Das bedeutet, dass Sie die gleiche Suche wieder ausführen können, ohne den Suchbefehl erneut eingeben zu müssen. Sie müssen lediglich den Dolphin Cursor aktivieren und F4 oder F2 drücken, um nach dem nächsten oder vorherigen Treffer zu suchen.

KAPITEL 11

Laufschrift



Laufschrift ist ein Lesemodus von SuperNova. Die Laufschrift zeigt den Inhalt des Bildschirms in einer einzelnen Zeile an, deren Inhalt bewegt werden kann. Sie können die Größe, Farbe, Schriftart und Geschwindigkeit sowie die Position der Anzeige einstellen.

11.1 Laufschrift starten

Sie können die Laufschrift aus der Systemsteuerung von SuperNova aktivieren oder ein Tastenkommando nutzen. Die Laufschrift kann an der aktuellen Fokusposition gestartet werden oder den gesamten Bildschirm vorlesen.

Laufschrift Tasten

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Laufschrift starten	LINKE STRG +	nicht verfügbar
(beschränkt auf das	NUM PUNKT	
Dokumentfenster)		
Laufschrift Starten (gesamte	LINKE STRG +	nicht verfügbar
Bildschirm)	NUM 9	
Laufschrift an der aktuellen	LINKE STRG +	ALT +
Fokus Position starten	LINKE	UMSCHALT +
(beschränkt auf das aktuelle	UMSCHALT +	L
Dokumentfenster)	NUM 2	

Laufschrift an der aktuellen	LINKE STRG +	ALT +
Fokus Position starten	NUM 2	UMSCHALT +
(gesamte Bildschirm)		V

11.2 Bewegung in der Laufschrift

Für die Laufschrift stehen mehrere Tastenkommandos zur Verfügung.

Laufschrift Tasten

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Springe zum Fokus	NUM 0	F5
Start und Stopp	LEERTASTE	LEERTASTE
Springen zur ersten Zeile	POS1	POS1
Springen zur letzten Zeile	ENDE	ENDE
Vorherige Zeile	BILD AUF	BILD AUF
Nächste Zeile	BILD AB	BILD AB
Schneller	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Langsamer	CURSOR AB	CURSOR AB
Vorwärts springen	TAB	TAB
Vorwärts bewegen	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
Rückwärts bewegen	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Laufschrift verlassen	ESCAPE	ESCAPE

Tipp:

Die Laufschrift ist auf die Anzeige auf dem Bildschirm beschränkt. In einigen Applikationen ist es möglich, die Ansicht so zu verändern, das mehr Text angezeigt wird. So kann z.B. in Microsoft Word die Seitenvorschau aktiviert werden, in der es möglich ist, sechs Seiten auf

einmal anzuzeigen. In diesem Fall werden alle sechs Seiten in der Laufschrift präsentiert.

11.3 Farbe, Schriftart und Symbole in der Laufschrift verändern

Sie können die Farbe, Schriftart, Symbole und die Größe des Textes innerhalb der Laufschrift einstellen.

um die Optionen für den Laufschrift einzustellen:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + V. Das Menü "Visuell" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Erweiterte Optionen". Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen Vergrößerung" wird geöffnet.
- 4. Aktivieren Sie mit STRG + TAB die Registerkarte "Laufschrift".
- 5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen.

KAPITEL 12

Dokument Leser



Der Dokument Leser ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Leseumfeld zu erstellen. Sie können die Schrift, den Hintergrund und die Hervorhebungen so einstellen, dass das Lesen für Sie möglichst angenehm ist. Auf diesem Bildschirm können Sie Texte aus Dokumenten, Webseiten oder jeder anderen Quelle darstellen.

12.1 Dokument Leser starten

Sie können den Dokument Leser starten, indem Sie die Schaltfläche "Dokument Leser" auf der Seite "Visuell" der Systemsteuerung von SuperNova aktivieren oder ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Dokument Leser Tastenkommandos

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Dokument Leser starten	FESTSTELLTA STE + NUMPAD PLUS	ALT + UMSCHALT + D

Ihr Text wird in den Dokument Leser geladen. Dies kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Im Dokument Leser können Sie die CURSORTASTEN verwenden, um die Hervorhebung durch den Text zu

bewegen, oder Sie drücken TABULATOR, um sich durch die Symbolleiste des Dokumentlesers zu bewegen.

12.2 Lesen steuern

Die verfügbaren Optionen der Symbolleiste des Dokumentlesers steuern die Leseumgebung. Für weitere Einstellungen, inklusive der Farbeinstellungen, Schriftart, Lesegeschwindigkeit wechseln Sie bitte in das "Dokumenten Leser " Dialogfeld

Nach dem Starten des Dokumentlesers können Sie auf die Symbolleiste zugreifen, indem Sie TABULATOR drücken. Wiederholtes Drücken der TABULATOR Taste bewegt durch die Optionen der Symbolleiste und kehrt anschließend in das Dokument zurück. Sie können auch UMSCHALT + TABULATOR verwenden, um rückwärts durch die Symbolleiste zu navigieren.

Symbolleiste des Dokumentlesers.



Betätigen Sie diese Schaltfläche, um das Lesen des Dokuments zu starten oder zu stoppen. Durch das Betätigen der LEERTASTE können Sie das Lesen des Dokuments ebenfalls starten oder stoppen. Während Sie lesen, hebt der Dokument Leser das aktuelle Wort hervor und navigiert automatisch durch das Dokument.



Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Schriftgröße zu erhöhen. Die Änderung der Schriftgröße ist unabhängig von den aktuellen Schriftoptionen im Dialogfeld der Dokument Leser Optionen.



Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Schriftgröße zu verkleinern. Die Änderung der Schriftgröße ist unabhängig von den aktuellen Schriftoptionen im Dialogfeld der Dokument Leser Optionen.



Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um das Menü "Hervorhebung" zu öffnen, in dem Sie zwischen Zeile, Satz und Absatz auswählen können. Die gewählte Option markiert die aktuelle Hervorhebung als eine "Einheit" und die Geschwindigkeit, mit der Sie innerhalb des Textes auf und ab navigieren.



Verwenden SIe diese Schaltfläche, um das Menü "Modus" zu öffnen. Hier können Sie verschiedene Einstellungen wählen, z.B. "Wortumbruch" und "Einzelne Zeile".



Drücken Sie diese Schaltfläche, um das Dialogfeld "Dokument Leser Einstellungen" zu öffnen. In den Optionen können Farbe des Hintersowie Vordergrundes und Schriftarten ausgewählt und die Art des Dokumentdownloads festgelegt werden.

Anmerkung: in Dokumenten mit mehreren Seiten wird mit dem Tippen oder Doppelklicken der Inhalt der linken Seite des Dokumenten Lesers auf die nächste Seite verschoben, wobei der Inhalt der rechten Seite auf die vorherige Seite verschoben wird.

12.3 Dokument Leser schließen

Um dies zu tun:

Drücken Sie ESCAPE.

KAPITEL 13

Profile

SuperNova beinhaltet einige vorgefertigte Profile, mit denen Sie schnell die Sprachausführlichkeit von SuperNova anpassen können ohne einzelne Einstellungen vornehmen zu müssen.

Um ein Profil auszuwählen:

- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.
- Drücken Sie ALT + D. Das Menü Datei wird geöffnet.
- 3. Gehen Sie mit CURSOR AB zur Option "Profil" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Profile" wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie im Listenfeld "Profile" das gewünschte Profil aus. (Eine Erklärung für das momentan gewählte Profil wird im Feld "Beschreibung" angezeigt.)
- 5. Wenn Sie das gewünschtes Profil ausgewählt haben, gehen Sie mit TABULATOR zur Schaltfläche "OK" und drücken LEERTASTE. Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld wird geschlossen.

In der SuperNova Statuszeile der Systemsteuerung erscheint automatisch der Name des neuen Profils. Alle Optionen der SuperNova Systemsteuerung, die durch Ihr momentan gewähltes Profil deaktiviert werden, erscheinen grau unterlegt.

Mit einem rechten Mausklick auf den Profilnamen in der Statuszeile können Sie schnell zwischen Profilen wechseln.

Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren Profile:

Achtung: Nicht alle unten aufgeführten Profile sind in jeder SuperNova Version verfügbar.

Vergrößerung

Vergrößerung für Mausbenutzer, die schnelle Ergebnisse wünschen. Es wird alles vergrößert, was unter dem Mauszeiger und dem Cursor beim Schreiben erscheint. Dieses Profil deaktiviert Sprache und Braille.

Vergrößerung & Sprache mit der Maus

Vergrößerung mit gelegentlicher Sprache, entwickelt für Mausbenutzer. Dieses Profil aktiviert die Sprache bei Bedarf: Text, der sich unter dem Mauszeiger befindet, wird gesprochen. Es beinhaltet Tastenkommandos zum Lesen der laufenden Zeile, des laufenden Satzes oder Absatzes. Dieses Profil deaktiviert die automatische Sprachausgabe, den Dolphin Cursor, Lesegeräte und Ausgaben auf einer Braillezeile.

Vergrößerung & Sprache mit der Tastatur

Vergrößerung mit sporadisch automatischer Sprache für Maus- und Tastaturbenutzer. Mit diesem Profil wird das gesprochen, was Sie schreiben und vorgelesen, was im Fokus steht, wie z.B. Menüs, Listeneinträge. Es wechselt zum Dolphin Cursor, so dass Sie eine Webseite mit der Tastatur navigieren können. "Lesen ab hier" und "Dokumentleser" sind ebenfalls für das freihändiges Lesen verfügbar.

Dieses Profil deaktiviert das Auslesen des Bildschirms und die Ausgabe auf einer Braillezeile.

Vergrößerung & Braillezeile

Dieses Profil unterstützt sowohl Maus- als auch Tastaturbenutzer und bietet Vergrößerung und das Auslesen des Bildschirms mit Sprachausgabe und/oder die Ausgabe auf einer Braillezeile. Dieses Profil ist umfangreich und bietet größtmögliche Flexibilität.

Screenreader

Sprachausgabe und/oder Brailleausgabe; entwickelt für Tastaturbenutzer ohne visuelle Unterstützung. Dieses Profil deaktiviert die Vergrößerung und visuelle Effekte und aktiviert die Ausgabe über eine Braillezeile.

Screenreader und visuelle Effekte

Sprachausgabe und/oder Braille Ausgabe für Tastaturbenutzer. Dieses Profil deaktiviert die Vergrößerung doch ermöglicht es visuelle Effekte inklusive Hervorheben des Fokus. Dieses Profil empfiehlt sich für Menschen mit einem eingeschränkten Gesichtsfeld oder wenn sich ein Bildschirm mit einem sehenden Kollegen oder Trainer geteilt werden soll.

KAPITEL 14

Gast Modus und Abgesicherter Modus

Die USB-Version von SuperNova beinhaltet eine spezielle Funktion, die Gast Modus genannt wird. Mit dem Gast Modus können Sie in Computer-Umgebungen arbeiten, für die Sie keine Administratorrechte besitzen, wie z.B. öffentliche Bibliotheken und Hotels.

Starten

Um die USB-Version von SuperNova zu starten, laden Sie das Programm Go.exe, das Sie im Hauptverzeichnis des USB Sticks finden.

Falls Sie schon zusätzliche Komponenten der USB-Version von SuperNova auf Ihrem Computer installiert haben, wird automatisch gestartet, wenn Sie den USB Stick mit dem PC verbinden.

Wenn Sie die USB-Version auf einem Computer nutzen wollen, auf dem sich bereits eine Kopie von SuperNova befindet, die die gleiche Version (oder höher) hat wie Ihre USB-Version, können Sie die Option Gast Modus nicht nutzen. Stattdessen wird die USB-Version im Standard Modus gestartet.

Wenn Sie die USB-Version von SuperNova auf einem neuen Computer oder auf einem Computer ohne zusätzliche Komponenten installieren, erscheint ein Dialogfeld mit zwei Optionen:

Im Gast Modus fortsetzen

oder

Komponenten installieren und Neustart

Wenn Sie die Option "Fehlende Komponenten installieren und neu starten" wählen, wird ein Dialog der Benutzerkontensteuerung erscheinen, in dem Sie zur Eingabe einer administrativen Berechtigung aufgefordert werden. Wenn Sie "Ja" auswählen, werden die zusätzlichen Komponenten installiert. Unter Windows 7 wird der Computer neu gestartet. Unter Windows 8 und Windows 10 wird nur SuperNova neu gestartet und läuft anschließend im Standard Modus.

15.1 Einschränkungen im Gast Modus

- Die Bewegung beim Vergrößern wird nicht so geschmeidig sein wie im Standard Modus. Die Auslastung der CPU und GPU kann ein wenig höher sein als im Standard Modus, selbst wenn nicht gearbeitet wird. Die Vergrößerung kann auch bei Verwendung mehrerer Bildschirme qualitativ geringer sein.
- Der Bildaufbau bei "Connect and View" wird mit höchstens 30 Frames pro Sekunde erfolgen.
- Benutzerdefinierte Mauszeiger funktionieren nicht. Über die Windows Systemsteuerung können Sie versuchen, einen individuellen Mauszeiger zu definieren. Wegen eines Windowsfehlers könnte dieses zu Schwierigkeiten führen, wenn Sie einen Mauszeiger von SuperNova auswählen.
- Es gibt keine Sprache und Vergrößerung im Windows Anmeldebildschirm. (Sie können stattdessen die Windows Sprachausgabe "Narrator" und/oder die Windows Lupe verwenden).

- Windows Anmeldedialoge (Benutzerkontensteuerung) werden nicht vergrößert oder gesprochen.
- Jegliche Anwendungen, die als Administrator ausgeführt werden müssen, sind evtl. nicht zugänglich und können Probleme verursachen. Insbesondere werden keine Tastenkommandos von SuperNova funktionieren und die Sprach- und Braillausgabe ist eingeschränkt möglich. Dies könnte auch zu Einschränkungen in der Benutzung der Oberfläche von "Connect and View" und im Zeilenmodus führen. Im Fehlerfall wechseln Sie mit ALT+TAB in eine andere Anwendung.
- Der "Internet Updater" wird weiterhin nach Updates für Maps und Scripts suchen, jedoch keine Produktupdates durchführen.
- Apps für Windows 8/10 sollten wie im Standard Modus gesprochen und präsentiert werden. Eventuell arbeitet die Bildglättung in der Vergrößerung nicht.
- Mit der Taste DRUCK oder ALT+DRUCK kann ein Screenshot des Bildschirms oder des vergrößerten Bildausschnitts an der Stelle erzeugt werden, wo das Fenster unvergrößert erscheint. Um einen Screenshot des unvergrößerten Bildschirms zu erstellen, schalten Sie zuvor die Vergrößerung aus.
- Während einer TeamViewer Fernwartung wird der Screenshot immer unvergrößert erstellt.
- Die SuperNova Touch Gesten werden nicht arbeiten.
- Die SuperNova OCR Funktionen werden nicht arbeiten.

Bitte lesen Sie die Dolphin Webseite, um weitere Vorsichtsmaßnahmen zu erfahren.

Abgesicherter Modus

Wenn Sie SuperNova auf einer lokalen Festplatte Ihres Computers installiert haben, jedoch einige Komponenten fehlen, wird SuperNova im abgesicherten Modus starten. Es erscheint ein Dialogfeld mit zwei Optionen:

Weiter im abgesicherten Modus

oder

• Fehlende Komponenten installieren und neu starten

Wenn Sie die Option "Fehlende Komponenten installieren und neu starten" wählen, wird ein Dialog der Benutzerkontensteuerung erscheinen, in dem Sie zur Eingabe einer administrativen Berechtigung aufgefordert werden. Wählen Sie "Ja", um die zusätzlichen Komponenten zu installieren und den Computer neu zu starten.

Die Funktionen im abgesicherten Modus verhalten sich analog zum Gast Modus. Beachten Sie die oben aufgeführten Einschränkungen.

KAPITEL 15

Einstellungsdateien.

16.1 Art der Einstellungen

Einstellungen können in zwei Gruppen der folgenden umfangreichen Kategorien unterteilt werden:

- Die Eingabe Einstellungen kontrollieren, wie SuperNova mit dem aktuellen Umfeld interagiert. Diese Einstellungen werden in MAP Dateien und Script Dateien gespeichert.
- Ausgabe Einstellungen sind die Einstellungen, mit denen Sie SuperNova für eine Anwendung konfigurieren können.
 Anwendungseinstellungen und Situationseinstellungen beinhalten diese Dateien.
- Globale Einstellungen sind Einstellungen, die Sie nicht auf der Basis von Anwendungen konfigurieren. Hier beinhaltet sind Tastenkommandos, Systemsteuerungseinstellungen, Updateeinstellungen und Windowseinstellungen.

Sie können Eingabe- und Ausgabeeinstellungen erstellen, editieren, importieren und exportieren. Sie können dies tun, indem Sie Dateien aus dem Menü "Datei" der Systemsteuerung von SuperNova auswählen.

16.2 Applikationseinstellungen erzeugen

Wenn Sie häufiger die Ausgabeeinstellungen von SuperNova in verschiedenen Programmen verändern, lassen sich diese Veränderungen auch in einer Applikationseinstellung automatisch zuweisen.

Um eine Applikationseinstellung zu erstellen:

- 1 Ctartan Cia
- Starten Sie das Programm, für das eine Einstellung vorgenommen werden soll.
- 2. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 3. Drücken Sie ALT + D. Das Menü Datei wird geöffnet. Aktivieren Sie den Eintrag "Neu"
- 4. Öffnen Sie das Untermenü.
- 5. Wählen Sie den Eintrag "Applikationseinstellungen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Neue Applikationseinstellung" wird geöffnet.
- 6. Wählen Sie die Optionen "Neue Einstellungsdatei erzeugen..."
- 7. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK".
- 8. Geben Sie in das Eingabefeld einen Namen für die Einstellungsdatei ein. Legen Sie anschließend fest, ob eine leere Einstellungsdatei erzeugt werden oder eine existierende als Basis verwendet werden soll. Schließen Sie das Dialogfeld mit der Schaltfläche "OK". Sie gelangen zur Systemsteuerung von SuperNova zurück.

Die neue Einstellungsdatei für Ihre Applikation wird nun verwendet. Zur Kontrolle wird der Name der Einstellungsdatei in der Statuszeile der Systemsteuerung von SuperNova angezeigt.

16.3 Situations Einstellungen erzeugen

Falls Sie häufiger bestimmte Einstellungen von SuperNova für bestimmte Dialogfelder einer Applikation ändern, sollten Sie diese in einer Situationseinstellung speichern.

Situationseinstellungen sind eine Unterkategorie der Applikationseinstellung und werden in der selben Datei gespeichert.

Um eine Situationseinstellung zu erzeugen:

- 1. Starten Sie die Applikation und erzeugen Sie die Situation, für die Sie die Einstellung vornehmen wollen.
- 2. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 3. Drücken Sie ALT + D. Das Menü Datei wird geöffnet. Wählen Sie den Eintrag "Neu".
- 4. Öffnen Sie das Untermenü.
- 5. Wählen Sie die Eintrag "Situationseinstellungen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Neue Situationseinstellung" wird geöffnet.
- 6. Wählen Sie "Neue Situation erzeugen".
- 7. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Das Dialogfeld "Name der neuen Situation" erscheint"
- 8. Geben Sie einen Namen in das Eingabefeld ein und drücken Sie "OK".
- 9. Ein weiteres Dialogfeld erscheint, in dem Sie Einstellungen zum Fensternamen vornehmen müssen.
- 10. Falls erforderlich, ändern Sie den vorgegebenen Namen für das Fenster. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Dialogfelder werden geschlossen und sie gelangen zur Systemsteuerung von SuperNova zurück.

Die Situationseinstellung wird nun benutzt. Zur Kontrolle wird in der Name der Situationseinstellung, die zurzeit aktiv ist, in der Statusleiste der Systemsteuerung angezeigt.

16.4 Einstellungen speichern

SuperNova speichert die Änderungen in den Einstellungen automatisch.

Um dies zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern". Sie finden das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" im Dialog für die Starteinstellungen aus dem Menü "Allgemein" in der Systemsteuerung von SuperNova.

Wenn das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" deaktiviert ist, wird ein zusätzliches Kontrollfeld verfügbar: "Benutzer fragen". Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, wird eine Meldung eingeblendet, wenn Sie SuperNova beenden. Sie werden gefragt, ob Sie ohne Speichern fortfahren möchten.

Sie können die Änderungen an den Einstellungen jederzeit manuell speichern, indem Sie den Menüeintrag "Einstellungen speichern" aktivieren. Sie finden den Eintrag im Menü "Datei" der Systemsteuerung von SuperNova.

16.5 Ändern der MAP-Datei

Falls Sie ein Programm verwenden, das über keine spezifischen MAP-Dateien verfügt, dann verwendet SuperNova die "Default Application" MAP-Datei.

Wenn Sie feststellen, dass SuperNova nicht einwandfrei mit Ihrer Anwendung über die "Default Application" MAP-Datei arbeitet, können Sie eine andere MAP-Datei ausprobieren. Sie können so viele MAP-Dateien ausprobieren, wie Sie wollen.

Tipps:

- Probieren Sie eine MAP-Datei einer anderen Version Ihrer Anwendung aus. Unter Umständen kann eine MAP-Datei einer älteren Version der Anwendung ebenfalls mit der neuen Version arbeiten.
- Versuchen Sie, eine MAP-Datei einer Anwendung des gleichen Herstellers zu verwenden. Sie könnten eine MAP-Datei für eine andere Anwendung vom gleichen Hersteller verwenden, die ebenso mit Ihrer Anwendung arbeitet. Wenn Sie z.B. eine Microsoft Anwendung nutzen, versuchen Sie einmal die Microsoft Office MAP-Datei.
- Versuchen Sie die MAP-Datei "MSAA Application", falls Sie wissen, dass Ihre Anwendung MSAA unterstützt.

Um eine andere MAP-Datei auszuwählen:

- 1. Führen Sie die Anwendung aus.
- 2. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

3. Drücken Sie ALT + D.

Das Menü "Datei" öffnet sich mit dem Menüpunkt "Neu".

4. Verwenden Sie CURSOR RECHTS, um das Untermenü "Neu" zu öffnen, dann CURSOR ABWÄRTS bis "MAP." und drücken Sie EINGABE.

Das Dialogfeld "MAP-Datei auswählen oder erzeugen" öffnet sich.

- 5. Drücken Sie CURSOR ABWÄRTS, um die Option "Vorhandene MAP-Datei auswählen" zu aktivieren.
- 6. Drücken Sie die TAB Taste bis zur Liste der MAP-Dateien und benutzen Sie die Cursortasten, um eine MAP-Datei auszuwählen.

7. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

Das Dialogfeld wird geschlossen.

8. Drücken Sie ESCAPE.

Die Systemsteuerung von SuperNova wird geschlossen und Sie kehren zu Ihrer Anwendung zurück.

Die neuen Funktionen der MAP-Dateien werden sofort umgesetzt. Falls Sie nach wie vor Probleme haben, in Ihrer Anwendung zu arbeiten, kontaktieren Sie bitte Dolphin oder Ihren lokalen Dolphinhändler.

KAPITEL 16

Bibliothek.

In der Bibliothek können Sie nach Büchern suchen, Bücher und Magazine aus Online Bibliotheken herunterladen, neuen Einträgen folgen, Radiohören und beliebte Podcasts abspielen.

WICHTIG: Die verfügbaren Optionen in der Bibliothek können variieren, je nach eingestellter Sprache in der Systemsteuerung von SuperNova.

17.1 Bibliothek Scannen und Lesen

Sie können die Option "Scannen und Lesen" der Bibliothek nutzen, um gedrucktes Material und Bilddateien in ein Format zu konvertieren, das Sie auf Ihren Computer lesen können.

Wichtig: damit SuperNova erfolgreich mit einem Scanner zusammenarbeiten kann, muss das Gerät die Schnittstelle WIA unterstützen. Nahezu alle Geräte unterstützen heute den WIA Standard. Bitte lesen Sie dazu die Dokumentation des Herstellers.

17.1.1 Eine Datei scannen und lesen

Sie können die Option "Scannen und Lesen" der Bibliothek nutzen, um Bilddateien in ein Format zu konvertieren, das Sie auf Ihren Computer lesen können. Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Sie keinen Scanner oder Digitalkamera, die an Ihrem Computer angeschlossen ist.

Diese Funktion aktivieren Sie aus der Systemsteuerung von SuperNova:

- 1. Öffnen sie die Option "Bibliothek", wählen Sie "Scannen und Lesen" und anschließend "Aus Datei"
- 2. Wählen Sie die Datei, die sie umwandeln wollen. Wenn Sie die Tastatur nutzen, drücken Sie dazu UMSCHALT + TAB, um in die Dateiliste zu springen. Verwenden Sie die Cursortasten, um eine Datei zu auszuwählen und drücken Sie ENTER. Wenn sich die Datei in einem anderen Ordner befindet, gehen Sie mit der RÜCKTASTE eine Ebene nach oben und bestätigen Sie mit ENTER, um den Ordner zu öffnen. Wählen Sie Ihre Datei aus und drücken Sie erneut ENTER.
- 3. Wählen Sie die Einstellungen für die Konvertierung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen "Dokument in Microsoft Word öffnen" aktivieren müssen, wenn Sie das konvertierte Dokument bearbeiten wollen.
- 4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK". Es öffnet sich ein Nachrichtenfenster und zeigt Ihnen den Fortschritt der Konvertierung an. Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, wird das Buch in Microsoft Word oder im SuperNova Leser geöffnet.

17.1.2 Scannen und Lesen von gedrucktem Material

Sie können die Option "Scannen und Lesen" der Bibliothek nutzen, um gedrucktes Material in ein Format zu konvertieren, das Sie auf Ihren Computer lesen können.

Wichtig: damit SuperNova erfolgreich mit einem Scanner zusammenarbeiten kann, muss das Gerät die Schnittstelle WIA unterstützen. Nahezu alle Geräte unterstützen heute den WIA Standard. Bitte lesen Sie dazu die Dokumentation des Herstellers.

Das Scannen und Lesen von gedrucktem Material aktivieren Sie aus der SuperNova Systemsteuerung:

- Stellen Sie sicher, dass der Scanner korrekt an Ihrem Computer angeschlossen ist.
- 2. Öffnen sie die Option "Bibliothek", wählen Sie "Scannen und Lesen" und anschließend "Aus Datei".
- 3. Wählen Sie die Einstellungen für die Konvertierung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen "Dokument in Microsoft Word öffnen" aktivieren müssen, wenn Sie das konvertierte Dokument bearbeiten wollen.
- 4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK". Es öffnet sich ein Nachrichtenfenster und zeigt Ihnen den Fortschritt der Konvertierung an. Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, öffnet sich ein zweites Nachrichtenfenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie noch weitere Seiten scannen oder den Vorgang stoppen wollen.
- 5. Wenn Sie mehrere Seiten scannen möchten, legen Sie eine neue Seite in den Scanner und wählen Sie die Schaltfläche "Seiten hinzufügen". Wiederholen Sie den Vorgang so lange bis alle Seiten gescannt sind.
- Zum Beenden aktivieren Sie die Schaltfläche "Laden der Seiten beenden". Das Buch wird mit Microsoft Word oder dem SuperNova Leser geöffnet.

17.1.3 Scannen und Lesen eines Bildes aus der Zwischenablage

Sie können die Option "Scannen und Lesen" aus der Bibliothek wählen, um ein Bild aus der Windows Zwischenablage in ein lesbares Format zu konvertieren. Diese Funktion arbeitet am besten mit einfachen, unkomplizierten Bildern.

Zum Scannen und Lesen eines Bildes aus der Zwischenablage der SuperNova Systemsteuerung:

1. Öffnen Sie die Option "Bibliothek", wählen Sie "Scannen und Lesen" und anschließend "aus Zwischenablage" Beachten Sie, dass diese

Einstellung deaktiviert ist, wenn SuperNova keine Bilddatei in der Zwischenablage erkennt.

- 2. Wählen Sie die Einstellungen für die Konvertierung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen "Dokument in Microsoft Word öffnen" aktivieren müssen, wenn Sie das konvertierte Dokument bearbeiten wollen.
- Wählen Sie die Schaltfläche "OK". Es öffnet sich ein Nachrichtenfenster und zeigt Ihnen den Fortschritt der Konvertierung an. Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, wird das Bild in Microsoft Word oder im SuperNova Leser geöffnet.

Tipp: Wenn Sie mit der Konvertierung des Bildes aus der Zwischenablage nicht zufrieden sind, versuchen Sie das Bild als JPEG Datei zu speichern. Anschließend verwenden Sie die Funktion "Scannen und Lesen" mit der Option "aus Datei", um die Qualität zu verbessern.

17.1.4 Ändern der "Scannen und Lesen" Einstellungen

Das Dialogfeld "Scannen und Lesen" ermöglicht die Einstellung eines anderen Scanners, die Auswahl der Landessprache, die Einstellung der Farbtiefe und der Papiergröße sowie die Angabe des Ausgabeordners.

Sie gelangen in das Dialogfeld "Scannen und Lesen" der SuperNova Systemsteuerung, indem Sie die Option "Bibliothek" öffnen, "Scannen und Lesen" öffnen und die Einstellungen aktivieren. Um mehr über die Einstellungen zu erfahren, schauen Sie sich das Dialogfeld "Scannen und Lesen" an.

17.2 Bibliothek Bücher

Mit der Option "Bücher" können Sie nach Büchern und Magazinen in Online Bibliotheken suchen, sie herunterladen und öffnen. Sie können mit dieser Option auch Dateien auf dem Computer öffnen. Die von Ihnen ausgewählten Bücher und Dateien werden im Leser von SuperNova geöffnet..

17.2.1 Öffnen einer Datei im Leser von SuperNova:

Sie können mit der Bibliothek Dateien auf dem Computer öffnen. Dateiformate, die Sie öffnen können, sind Textdateien, EPUB, DAISY, HTML, und PDF Dateien. Die Dateien werden im SuperNova Leser geöffnet.

Öffnen Sie eine Datei in der SuperNova Systemsteuerung:

- 1. Öffnen Sie die Option "Bibliothek", wählen Sie "Bücher" und anschließend "Buch im Leser öffnen". Das Dialogfeld "Öffnen" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die Datei, die sie umwandeln wollen. Wenn Sie die Tastatur verwenden, drücken Sie UMSCHALT + TAB um in die Dateiliste zu gelangen, verwenden Sie die Cursortasten um eine Datei auszuwählen und drücken Sie dann ENTER. Wenn sich die Datei in einem anderen Ordner befindet, gehen Sie mit der RÜCKTASTE eine Ebene nach oben und bestätigen Sie mit ENTER, um den Ordner zu öffnen. Wählen Sie Ihre Datei aus und drücken Sie erneut ENTER.
- 3. Wählen Sie die Einstellungen für die Konvertierung.
- 4. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK". Es öffnet sich ein Nachrichtenfenster und zeigt Ihnen den Fortschritt der Konvertierung an. Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, wird das Buch im SuperNova Leser geöffnet.
- 5. Wenn Sie den Leser verlassen wollen, drücken Sie ALT + F4, um das Fenster zu schließen.

17.2.2 Öffnen eines Buches von einer Online Bibliothek.

Sie können die Bibliothek nutzen, um sich Bücher von Online Bibliotheken herunterzuladen und zu öffnen. Die Dateien werden im SuperNova Leser geöffnet.

Um ein Buch in der SuperNova Systemsteuerung zu öffnen:

- 1. Öffnen Sie die Option "Bibliothek", wählen Sie "Bücher" und "Online Bücher". Das Dialogfeld "Bibliothek" öffnet sich und präsentiert eine Liste der verfügbaren Bibliotheken. Beachten Sie, dass Sie sich bei einigen Bibliotheken zuerst registrieren müssen, bevor Sie ein Buch herunterladen können. Falls Sie den Service einer dieser Bibliotheken in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie zuerst Kontakt mit der Bibliothek aufnehmen, sich registrieren und evtl. ein Benutzerkonto einrichten lassen.
- Wählen Sie eine Bibliothek. Je nach Bibliothek, gibt es überlicherweise eine Kategorieliste, in der Sie beim Suchen eines Buches, Ihre Auswahl weiter eingrenzen können. Manchmal gibt es sogar bis zu drei oder vier Unterkategorien.
- 3. Suchen Sie in den verfügbaren Kategorien und Büchern. Falls Sie den Titel des gewünschten Buches kennen, gibt es die Möglichkeit der Titelsuche. Geben Sie geben Sie im Suchfeld ein Schlüsselwort ein und bestätigen mit ENTER. SuperNova wird die Datenbank der Bibliothek durchsuchen und Ihnen die Ergebnisse in einer Liste anzeigen.
- 4. Wählen Sie das Buch, dass Sie lesen möchten und aktivieren Sie die Schaltfläche "Download".
- 5. Wenn der Vorgang beendet ist, sind folgende Aktionen möglich:
- Wenn Sie das Buch lesen wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche "Jetzt lesen". Das Buch wird im SuperNova Leser geöffnet. Wenn Sie den Leser verlassen wollen, drücken Sie ALT + F4, um das Fenster zu schließen.

- Wenn Sie das Buch auf ein tragbares Gerät kopieren wollen, stellen Sie sicher, dass dieses Gerät an Ihrem Computer angeschlossen ist und aktivieren Sie die Schaltfläche "Senden an". In einem Dialogfeld wird Ihnen eine Liste von möglichen Laufwerken angezeigt, auf die Sie das Buch kopieren können. Wählen Sie das Laufwerk aus und bestätigen Sie mit ENTER. Es erscheint eine Nachricht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
- Wenn Sie das Buch vom Computer löschen wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche "Löschen". Es erscheint ein Nachrichtenfenster, in dem Sie aufgefordert werden, diese Aktion zu bestätigen. Wählen Sie "Ja", um das Buch zu löschen.

17.2.3 Das zuletzt gelesene Buch öffnen

Sie können mit dem Lesen des letzten Buches fortfahren, indem Sie die Option "Bibliothek" öffnen, "Bücher" wählen und die Auswahl "Lesen fortsetzen..." bestätigen. Das Buch wird im SuperNova Leser geöffnet. Sie können an der Stelle weiterlesen, an der Sie aufgehört haben.

17.2.4 Öffnen eines Buches von einer Online Bibliothek.

Sie können die Bibliothek dazu verwenden, Zeitungen und Magazine aus Online Bibliotheken, in denen sie eingeschrieben sind, herunterzuladen und zu öffnen. Die Dateien werden im SuperNova Leser geöffnet.

Um eine Zeitung oder ein Magazin mit der Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen:

1. Öffnen Sie die Option "Bibliothek", wählen Sie "Zeitung" und "Meine Zeitung". Der Dialog "Zeitungen" öffnet sich und zeigt Zeitungen und Magazine für die Sie eingeschrieben sind. Wenn die Liste leer ist, betätigen Sie den Schalter "Hinzufügen" und wählen Sie die Bibliothek, in die Sie sich einschreiben möchten. Wenn Sie nicht in einer Bibliothek eingeschrieben sind, kontaktieren Sie bitte die Bibliothek, um sich registrieren zu lassen und die Zugangsdaten zu erhalten.

- 2. Wählen Sie die Zeitung und anschließend die Ausgabe, die Sie lesen möchten. Die Zeitung wird im SuperNova Leser geöffnet.
- 3. Wenn Sie den Leser verlassen wollen, drücken Sie ALT + F4, um das Fenster zu schließen.

17.2.5 Öffnen, kopieren oder löschen eines Buches

Sie können die heruntergeladenen Bücher öffnen, kopieren und löschen.

- Öffnen Sie die Bibliothek, wählen Sie "Bücher" und "Meine Bücher".
 Eine Liste mit den verfügbaren Büchern wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie das Buch, dass Sie öffnen, kopieren oder löschen wollen. Es öffnet sich eine Dialogfeld.
- 3. Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wenn Sie das Buch lesen wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche "Jetzt lesen". Das Buch wird im SuperNova Leser geöffnet. Wenn Sie den Leser verlassen wollen, drücken Sie ALT + F4, um das Fenster zu schließen.
- Wenn Sie das Buch auf ein tragbares Gerät kopieren wollen, stellen Sie sicher, dass dieses Gerät an Ihrem Computer angeschlossen ist und aktivieren Sie die Schaltfläche "Senden an". In einem Dialogfeld wird Ihnen eine Liste von möglichen Laufwerken angezeigt, auf die Sie das Buch kopieren können. Wählen Sie das Laufwerk aus und bestätigen Sie mit ENTER. Es erscheint eine Nachricht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
- Wenn Sie das Buch vom Computer löschen wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche "Löschen". Es erscheint ein Nachrichtenfenster, in dem Sie aufgefordert werden, diese Aktion zu bestätigen. Wählen Sie "Ja", um das Buch zu löschen.

17.3 Bibliothek Nachrichten, Radiosender und Podcasts

Sie können die Bibliothek Menüs "Nachrichten", "Radiosender", und "Podcasts" nutzen, um immer mit den neuesten Nachrichten und Unterhaltung aus dem Internet auf dem Laufenden zu sein.

WICHTIG: Einige Inhalte erfordern einen installierten RealPlayer. Falls Sie keinen entsprechenden Player installiert haben, erscheint im SuperNova eine Warnmeldung. Diese Meldung zeigt Ihnen Links an, wo Sie sich die erforderlichen Dateien herunterladen können.

17.3.1 Lesen eines Nachrichtenartikels

Mit "Bibliothek" können Sie die gängigen Nachrichten, die im Internet verfügbar sind, öffnen, durchsuchen und lesen.

Diese Funktion aktivieren Sie aus der Systemsteuerung von SuperNova:

- 1. Öffnen Sie "Bibliothek" und wählen "Nachrichten". Eine Liste der gängigen Nachrichten wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie einen Eintrag. Wenn Sie keinen Eintrag finden, der Sie interessiert, wählen Sie "Hinzufügen", um andere verfügbare Einträge zu durchsuchen, die Sie in der Favoritenliste speichern können.
- 3. Wählen Sie eine Überschrift. Das Dialogfeld wird geschlossen und der Nachrichtenartikel erscheint in einem Web Browser.

17.3.2 Radio hören

Mit "Bibliothek" können Sie die gängigsten Radiosender im Internet hören.

- 1. Öffnen Sie "Bibliothek" und wählen "Radio". Eine Liste der gängigen Radiostationen öffnet sich.
- 2. Wenn Sie keinen Radiosender finden, der Sie interessiert, wählen Sie "Hinzufügen", um andere verfügbare Stationen zu durchsuchen, die Sie in der Favoritenliste speichern können.
- 3. Eine Radiostation auswählen Das Dialogfeld wird geschlossen, Sie können den Radiosender empfangen und in Verbindung mit einem MediaPlayer, wie z.B. Windows Media Player, abspielen.

17.3.3 Podcast hören

Mit "Bibliothek" können Sie die gängigsten Podcasts im Internet hören.

Diese Funktion aktivieren Sie aus der Systemsteuerung von SuperNova:

- 1. Öffnen Sie "Bibliothek" und wählen "Podcast". Eine Liste der gängigen Podcast Dienste öffnet sich.
- 2. Wenn Sie keinen Podcast Dienst finden, der Sie interessiert, wählen Sie "Hinzufügen" um andere verfügbare Dienste zu durchsuchen, die Sie in der Favoritenliste speichern können.
- Wählen Sie einen Podcast und selektieren Sie eine Folge. Das Dialogfeld wird geschlossen, Sie können den Podcast empfangen und in Verbindung mit einem MediaPlayer, wie z.B. Windows Media Player, abspielen.

17.3.4 Favoriten für Nachrichten, Radiosender und Podcast einstellen

In der Bibliothek können Sie Nachrichten, Radiosender und Podcast Dienste hinzufügen, entfernen und verwalten.

- Öffnen Sie die Option "Bibliothek" und wählen Sie einen Dienst, den Sie bearbeiten möchten. Eine Liste mit den verfügbaren Diensten wird geöffnet.
- 2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Zum Hinzufügen eines Dienstes aktivieren Sie die Schaltfläche "Hinzufügen". Ein neues Dialogfeld wird geöffnet. Dieses enthält eine Liste von Diensten, die Sie hinzufügen können und eine Liste der derzeit verfügbaren Dienste. Wählen Sie einen Dienst und aktivieren Sie die Schaltfläche "Hinzufügen". Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Dienst, den Sie hinzufügen wollen.
- Um einen Dienst zu entfernen, wählen Sie diesen und aktivieren die Schaltfläche "Entfernen". Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Dienst, den Sie entfernen wollen.
- Um die Liste der Dienste zu ordnen, wählen Sie einen Dienst und aktivieren Sie die eine der Schaltflächen "Aufwärts" oder "Abwärts". Damit wird der Eintrag entweder weiter nach oben oder weiter nach unten in der Liste angeordnet. Drücken Sie die Schaltfläche solange bis der Dienst an der Stelle der Liste steht, an der Sie ihn haben möchten.
- 3. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK".

17.4 SuperNova Leser Tastaturkommandos

Das Buch, das Sie im Bookshelf öffnen, erscheint als HTML Seite im Leser von SuperNova. Sie können das Buch lesen, sich darin bewegen und navigieren wie auf einer Web Seite.

Zusätzlich bietet SuperNova folgende Tastatur Kommandos:

Funktion	Tastenkommando	
Wechsel zwischen	F6	
Dokumentfenster und		
Symbolleiste		
Navigation zwischen den	TAB und UMSCHALT	
Schaltflächen der Symbolleiste	+ TAB	

Start / Stopp (nur verfügbar,	F5	
wenn das Buch einen Audio		
Inhalt hat)		
Inhalt öffnen	ALT + C	
Einstellungen öffnen	ALT + S	
Verkleinern	ALT + I	
Vergrößern	ALT + O	
Verlassen	ALT + E (oder ALT +	
	F4)	

KAPITEL 17

Connect and View



Mit SuperNova Connect and View können Sie jede High Definition (HD) Kamera an Ihrem Computer anschließen, um damit Magazine, Zeitungen, Rechnungen und andere Objekte auf ihrem Bildschirm vergrößert anzuzeigen.

Außerdem können Sie Connect and View dazu verwenden sich mit anderen Computern zu verbinden, um zu sehen was auf dem verbundenen Bildschirm angezeigt wird. So können Sie sich z.B. mit einem interaktiven Whiteboard des Lehrers oder Trainers verbinden und verfolgen was auf dem Computerbildschirm präsentiert wird.

18.1 Connect and View Kamera

Mit Connect and View Kamera können Sie jede High Definition (HD) Kamera an ihren Computer anschließen und gedrucktes Material oder Objekte vergrößert auf ihrem Bildschirm anzeigen.

Sie können jede High-Definition (HD) Kamera mit SuperNova verwenden. Für eine offizielle Liste unterstützter Kameras, die getestet wurden und von Dolphin empfohlen werden, besuchen Sie bitte die Dolphin Webseite oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Dolphin Händler.

Bevor Sie SuperNova Connect and View mit einer Kamera nutzen können, müssen Sie eine geeignete Kamera erwerben, installieren und diese unter SuperNova auswählen.

18.1.1 Eine geeignete Kamera erwerben

Für die besten Resultate benötigen Sie eine HD Kamera mit Autofokus, einer Auflösung von 1080p und einer automatischen Bildkorrektur bei wenig Licht. Dazu ist ein USB 2.0 Anschluss an ihrem Computer erforderlich.

Für die Kamera ist ein passender Ständer erforderlich. Die Nutzung eines Ständers stellt sicher, dass die Kamera stabil über dem anzuzeigenden Objekt steht.

18.1.2 Installation des PCs

Für beste Resultate stellen Sie sicher, dass die Kamera in der Nähe ihres Computer Bildschirms aufgestellt ist, damit sie die Bewegung des Objekts unter der Kamera sofort auf dem Bildschirm nachvollziehen können. Sie sollten ebenfalls sicherstellen, dass die Kamera in einem sicheren gut beleuchteten Umfeld auf ihrem Tisch steht, um eventuelle Schatten auf dem Objekt zu vermeiden.

18.1.3 Auswahl der Kamera in SuperNova

Wenn Sie die Kamera auf dem Tisch installiert und an ihren Computer angeschlossen haben müssen Sie diese in den Einstellungen von SuperNova auswählen.

- 1. In der Option "Visuell" öffnen Sie das Untermenü von "Connect and View" und darin den Eintrag "Einstellungen". Das Dialogfeld zu "Connect and View" wird geöffnet und zeigt die Registerkarte "Kameras".
- 2. Wählen Sie Ihre Kamera aus der Liste der Geräte und bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK" Wenn Ihre Kamera nicht in der Liste erscheint, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und eingeschaltet ist.

18.1.4 Die Kamera mit SuperNova nutzen

Sie können die folgenden Einstellungen nutzen, um die Kamera einzuschalten zu konfigurieren und das Bild unter SuperNova einzustellen.

Den Betrachter einschalten

Nachdem sie die Kamera in den Einstellungen aktiviert haben, können Sie den Betrachter mit der Schaltfläche "Connect and View" einschalten. Sie können "Connect and View" in den Optionen Systemsteuerung von SuperNova unter "Visuell" oder mit einem Tastenkommando ein- und ausschalten.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Connect and View ein aus	ALT + NUMPAD ENTER	LINKE UMSCHALT + CAPS LOCK + 0

Wenn Sie Connect and View aktivieren, wird das Bild der Kamera oder des Whiteboards in einem Teil des Bildschirms angezeigt. Dieser Bereich wird "Betrachter" genannt Sie können die Position des Betrachters auf dem Bildschirm ändern. Nutzen Sie die Symbolleiste des Betrachters, um das Bild in Größe, Farbe und Kontrast zu verändern.

Zwischen Betrachter und Desktop wechseln

Um Veränderungen am Bild vorzunehmen muss der Fokus in die Symbolleiste des Betrachters verschoben werden.

Sie können zwischen Betrachter und Desktop wechseln, indem Sie das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE nutzen. Wenn Sie sowohl ein Kamerabild als auch ein Bild für das Whiteboard anzeigen, nutzen Sie ebenfalls das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE, um zwischen den Betrachtern und dem Desktop zu wechseln.

Größe und Position des Betrachters verändern

Im Standard wird der Betrachter in der oberen Bildschirmhälfte angezeigt. Sie können die Position und die Größe des Betrachters in den Einstellungen zu "Connect and View" in der Systemsteuerung von SuperNova verändern. Sie können den Betrachter an den vier Bildschirmrändern links, oben, unten und rechts andocken. Der Betrachter kann so eingestellt werden, dass er 20%, 50% oder 80 % der Fläche des Bildschirms einnimmt.

Sie können LINKE STRG + NUM 7 innerhalb des Fensters des Betrachters drücken, um zwischen dem geteiltem Bildschirmmodus und Vollbildmodus zu wechseln.

Dies kann auch mit den folgenden Schaltflächen im Betrachter erreicht werden:







Auch im Vollbild kann das Tastenkommando aus CAPSLOCK + MITTLERER MAUSTASTE verwendet werden, um zwischen Betrachter und Desktop zu wechseln.

Ein-und ausblenden der Symbolleiste des Betrachters

Die Symbolleiste des Betrachters stellt einige Elemente zur Veränderung des Betrachterbildes bereit. Die bereitgestellten Optionen hängen davon ab ob sie eine Verbindung zu einer Kamera oder zu einem Whiteboard aufgebaut haben.

Verwenden Sie die Schaltflächen "Anzeigen" und "Verbergen", um die Symbolleiste einzustellen. Wenn Sie die Symbolleiste ausblenden, vergrößern Sie damit den Bildausschnitt.

Die Ansicht der Schaltflächen zur Anzeige hängen von der Position des Betrachters ab. Wenn der Betrachter z.B. am oberen Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile, die nach links und rechts zeigen, angezeigt.





Wenn der Betrachter am linken Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile angezeigt, die nach oben und unten zeigen.





In allen Fällen wird die Schaltfläche zum Verbergen immer als letzte Schaltfläche in der Symbolleiste angezeigt.

LINKE STRG+ KLEINER ALS versteckt die Symbolleiste des Betrachters

Das Bild im Betrachter vergrößern





Sie können die Vergrößerung im Betrachter mit den entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste verändern. Wenn Sie ein Touchscreen Gerät verwenden, können Sie die auch Vergrößerung mit 2-Finger zusammen ziehen oder 2-Finger auseinander ziehen verändern.

Sie können außerdem die folgenden Tastenkommandos verwenden:

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop Tastenkomman	Laptop - Laptop (universal)
	dos	
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG +	ALT +
	NUM PLUS	UMSCHALT +
	oder	0
	FESTSTELLTA	oder
	STE + MAUS	FESTSTELLTA
	RAD AUF	STE + MAUS
		RAD AUF
Vergrößerung reduzieren	LINKE STRG +	ALT + MINUS
	NUM MINUS	oder
	oder	FESTSTELLTA
	FESTSTELLTA	STE + MAUS
	STE + MAUS	RAD AB
	RAD AB	

Den Bildausschnitt verschieben

Wenn das Objekt unter der Kamera größer ist als im Betrachter erscheint, können Sie die Maus verwenden um das Bild zu rollen oder sie verwenden die entsprechende Funktion von SuperNova zum Verschieben des Bildes mit der Tastatur.

Um das Bild zu verschieben verwenden Sie das Tastenkommando Rechte STRG + eine Pfeiltaste Halten Sie die rechte STRG-Taste gedrückt, damit die Bewegung fortlaufend durchgeführt wird. Drücken Sie dieselbe Pfeiltaste mehrmals bei gedrückter rechter STRG-Taste um die Geschwindigkeit beim Rollen zu erhöhen. Drücken Sie die gegenüberliegende Pfeiltaste um die Bewegung zu verlangsamen.

Um mehr über das Rollen zu erfahren, sehen Sie "Andere Teile des Bildschirms ansehen".

Das Bild im Betrachter vergrößern



Sie können das Bild im Betrachter drehen. Damit vermeiden Sie das Drehen des Dokumentes unter der Kamera. Mit jedem Druck auf die Schaltfläche wird das Bild um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.

Das Drücken von LINKE STRG + NUM 1 auf Ihrer Tastatur dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn, jedes Mal wenn Sie diese Tastenkobination benutzen.

Die Farbe des Bildes verändern



Mit der Schaltfläche "Farbwechsler" können Sie die Farbe und den Kontrast des Bildes mit verschiedenen Farbschemata wechseln.

LINKE STRG + NUM 0 schaltet zwischen den verfügbaren Farbschemata um.

SuperNova Speichert das gewählte Farbschema in den Einstellungen zu Connect and View.

Einstellungen zum Autofokus

Die Autofokusfunktion einer Kamera soll die Kameralinse so einstellen, dass das Bild mit höchstmöglicher Schärfe angezeigt wird. In einigen Fällen muss die Kamera nachregulieren, z.B. wenn sich das Objekt bewegt, dies kann zu einer ungewollten Bewegung des Bildes führen. Wenn die Autofokus Funktion zu oft reguliert, können Sie diese Funktion abschalten.

LINKE STRG + NUM 3 schaltet den automatischen Fokus an und aus.

Beachten Sie, dass nicht alle Kameras die Autofokus Funktion unterstützen.

Wechseln zwischen digitaler und optischer Vergrößerung

Wenn Ihre Kamera über einen optischen Zoom verfügt, (auch bekannt als Hardware Zoom) wird der Betrachter für Connect and View eine extra Schaltfläche einblenden, die es erlaubt zwischen optischen und digitalen Zoom zu wechseln.

Das direkt darunter angezeigte Symbol zeigt an, dass sich Ihre Kamera derzeit im Modus Digitalzoom befindet.

Das Drücken dieses Symbols wechselt vom Modus Digitalzoom in dem optischen Zoom Modus:



Das direkt darunter angezeigte Symbol zeigt an, dass sich Ihre Kamera derzeit im optischen Zoom-Modus befindet.

Durch das Drücken dieses Symbols (oder LINKE STRG + NUM 4) wechselt die Kamera vom optischen Zoom in den digitalen Zoom.



Das Bild einfrieren





Mit der Schaltfläche Bild einfrieren kann das aktuelle Bild festgehalten werden. Diese Einstellung erlaubt das detaillierte Betrachten des Bildes eher, als wenn es sich bewegt.

Diese Schaltfläche ist ebenfalls in der Symbolleiste des Betrachters verfügbar, wenn Sie eine Kamera verwenden. Das Einfrieren kann außerdem sinnvoll sein, wenn Sie eine Präsentation betrachten und dabei eine bestimmte Folie festhalten wollen. Der Lehrer kann dabei seine Präsentation fortsetzen. Wenn Sie das einfrieren ausschalten, wird das Bild im Betrachter aktualisiert. Der Betrachter zeigt das aktuelle Kamerabild oder den aktuellen Computerbildschirm.

Betrachterbild abspeichern



Mit der Schaltfläche "Betrachterbild abspeichern" kann eine Kopie des Bildes im Betrachter in die Windows Zwischenablage kopiert werden. Das Bild wird im Vollbild gespeichert, unabhängig von der Vergrößerung wie im Viewer verwendet wird.

Durch FESTSTELLTASTE + P wird das Bild auch in den Viewer der Windows Zwischenablage kopiert.

Sie können das Bild kopieren und in ein Dokument einfügen, oder mithilfe der SuperNova "Scannen und Lesen" Funktion in Text konvertieren oder Sie drücken LINKE STRG + FESTSTELLTASTE + O

OCR Viewer Bild



Die Schaltfläche für optische Zeichenerkennung lässt Sie das Bild unter der Kamera ansehen. Das Bild wird im Vollbild gespeichert, unabhängig von der Vergrößerung wie im Viewer verwendet wird.

Sobald das Bild erkannt wurde, wird die Symbolleiste im Betrachter um weitere Schaltflächen zum Vorlesen oder Ändern der Ansicht zwischen "erkanntes Dokument", "Original Bild", "erkannter text und Original Bild im geteilten Bildschirm" erweitert.

zusätzliche Tasten



Das Drücken der oberen Taste startet den Lesevorgang des OCR-ed Bildes. Durch das Drücken von LEERTASTE oder NUM PLUS kann der Lesevorgang der Zeichenerkennung des Bildes auch gestartet werden. Während Sie lesen, hebt der Dokument Leser das aktuelle Wort hervor und

navigiert automatisch durch das Dokument. Sie können die Pfeiltasten benutzen, um nach Zeile oder nach Wort zu lesen.

Das Drücken der oberen Taste beendet den Lesevorgang der Zeichenerkennung des Bildes. Durch das Drücken von LEERTASTE oder ESCAPE kann der Lesevorgang der Zeichenerkennung Bildes auch beendet werden.

Die folgen Vier Schaltflächen wechseln zwischen den verschiedenen Ansichten



Ansicht "nur Text"



Ansicht "Text und Original Bild nebeneinander.



Ansicht "Text und Original Bild übereinander



Ansicht "Nur Originales Bild"

Das Original Bild kann in sowohl der Original Bild Ansicht als auch in der geteilten Ansicht angesehen werden. Dies kann mit dem Finger oder mit der gehaltenen linken Maustaste und einer Mausbewegung ausgeführt werden.



Diese Schaltfläche wechselt zwischen den verschiedenen Farbschemata.

Diese Schaltfläche öffnet ein Menü mit Optionen zum Dokument mit denen Sie weitere Seiten Ihrem Dokument hinzufügen, die aktuelle Seite löschen, zwischen den Seiten wechseln und die erkannten Seiten zu Microsoft Word oder Windows Notepad exportieren können.

Diese Schaltfläche fügt Ihrem Dokument eine weitere Seite hinzu. Wenn Sie die Schaltfläche "Seite hinzufügen" drücken können Sie eine neue Seite auf unterschiedliche Weise hinzufügen: Nutzen Sie Ihre Kamera, hierbei werden Sie zum Hauptbildschirm von Connect and View geführt, um eine neue Seite zu erkennen. Alternativ wählen Sie eine Bilddatei oder ein PDF Dokument. Hierbei wird das Dialogfeld "Datei öffnen" präsentiert, um die Grafik oder das PDF Dokument zu erkennen.

Das Drücken dieser Schaltfläche in den Dokumentoptionen löscht die akutelle Seite.

Mit dieser Schaltfläche in den Dokumentoptionen können Sie das aktuelle Dokument in das Microsoft Word Format übertragen. Es stehen drei Formate zur Verfügung: "Formatierung beibehalten", "Layout und Formatierung beibehalten" oder "nur Textformat". Wenn Sie die Schaltfläche "Dokument Export" drücken, erhalten Sie drei weitere Schaltflächen zur Auswahl.

Das exportierte Dokument wird automatisch in Microsoft Word oder Windows Notepad geöffnet und eine Kopie des Originals wird unter "Dokumente" abgelegt. Der Dateiname lautet snova_clipboardXXX.xml, wobei XXX der aktuelle Zähler ist.

Wenn das Dokument mehr als eine Seite enthält können Sie mit dieser Schaltfläche aus dem Menü der Dokumentoptionen zur nächsten Seite des aktuellen Dokuments wechseln.

Wenn das Dokument mehr als eine Seite enthält können Sie mit dieser Schaltfläche aus dem Menü der Dokumentoptionen zur vorherigen Seite des aktuellen Dokuments wechseln.

18.1.5 Kamera Einstellungen

Alle Einstellungen zu Connect and View für die Kamera finden Sie in der Systemsteuerung von SuperNova. Diese finden Sie in der Symbolleiste "Visuell" oder im Menü Connect and View. Weitere Informationen finden Sie im Dialogfeld zu den Connect and View Einstellungen.

18.2 Connect and View Whiteboard

Connect and View für Whiteboard nutzt ein virtuelles Netzwerk um sich mit dem entfernten Computer zu verbinden. Vergrößerung und Verfolgung des entfernten Computerbildschirms sind möglich.

Die Software VNC ermöglicht die Anzeige eines entfernten Computerbildschirms mit einer Netzwerkverbindung. Es sind zahlreiche günstige und freie VNC Programme verfügbar. Dazu gehören Tight VNC, Ultra VNC und Real VNC. Die VNC Software muss auf dem entfernten Computer installiert sein, damit eine Verbindung mit SuperNova hergestellt werden kann. Die VNC Software muss nicht auf Ihrem Computer installiert werden.

Für mehr Informationen über VNC Verbindungen, die getestet wurden und von Dolphin empfohlen werden, besuchen Sie bitte die Dolphin Webseite oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Dolphin Händler.

18.2.1 Eine Verbindung zum Computer mit der Präsentation herstellen

Erstellen Sie eine Whiteboard Profil, um eine Verbindung zu dem Computer mit der Präsentation über VNC herzustellen. Ein Whiteboard Profil erwartet spezifische Informationen, die unter Umständen nur von einem Netzwerkadministrator angegeben werden können. So muss z.B. der Name des Computers und ein Passwort in der VNC Software angegeben werden.

Um ein White Board Profil zu erstellen gehen Sie folgendermaßen in der SuperNova Systemsteuerung vor:

- 1. In der Option "Visuell" öffnen Sie das Untermenü von "Connect and View" und darin den Eintrag "Einstellungen". Das Dialogfeld "Connect and View Einstellungen" wird geöffnet.
- Wenn Sie ein neues Profil erstellen möchten, selektieren Sie das Register "Whiteboard" und wählen die Schaltfläche "Neu". Das Dialogfeld "Whiteboard Einstellungen" wird geöffnet.
- 3. Wenn Sie ein Profil bearbeiten möchten, wechseln Sie zum Register "Whiteboard", selektieren das Profil aus der Liste der Geräte und aktivieren die Schaltfläche "Einstellungen". Das Dialogfeld "Whiteboard Einstellungen" wird geöffnet.
- 4. Im Eingabefeld Profil geben Sie den Namen des Profils an. Geben Sie einen eindeutigen Namen an, z.B. den Namen des Klassenraums des Lehrers oder Trainers.
- Vervollständigen Sie alle Felder mithilfe ihres Netzwerkadministrators.
 Weitere Informationen finden Sie im Dialogfeld zu den Connect and View Einstellungen.
- 6. Wählen Sie die Schaltfläche "OK". SuperNova speichert ihre Einstellungen und zeigt das vorherige Dialogfeld an.
- 7. Wählen Sie die Schaltfläche "OK". SuperNova speichert das Profil, fügt es zu der Geräteliste hinzu und schließt das Dialogfeld.

18.2.2 Den entfernten Computerbildschirm anzeigen

Wenn Sie den entfernten Computerbildschirm anzeigen wollen, müssen Sie ein Profil in den Einstellungen zu Connect and View auswählen. Anschließend aktivieren Sie die Funktion Connect and View.

Wenn Sie mit dem entfernten Computer verbunden sind, können Sie die folgenden Optionen verwenden um den Betrachter einzustellen.

Den Betrachter einschalten

Nachdem sie die Kamera in den Einstellungen aktiviert haben, können Sie den Betrachter mit der Schaltfläche "Connect and View" einschalten. Sie können "Connect and View" in den Optionen Systemsteuerung von SuperNova unter "Visuell" oder mit einem Tastenkommando ein- und ausschalten.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Connect and View ein aus	ALT + NUMPAD ENTER	LINKE UMSCHALT + CAPS LOCK + 0

Wenn Sie Connect and View aktivieren, wird das Bild der Kamera oder des Whiteboards in einem Teil des Bildschirms angezeigt. Dieser Bereich wird "Betrachter" genannt Sie können die Position des Betrachters auf dem Bildschirm ändern. Nutzen Sie die Symbolleiste des Betrachters, um das Bild in Größe, Farbe und Kontrast zu verändern.

Zwischen Betrachter und Desktop wechseln

Um Veränderungen am Bild vorzunehmen muss der Fokus in die Symbolleiste des Betrachters verschoben werden.

Sie können zwischen Betrachter und Desktop wechseln, indem Sie das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE nutzen. Wenn Sie sowohl ein Kamerabild als auch ein Bild für das Whiteboard anzeigen, nutzen Sie ebenfalls das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE, um zwischen den Betrachtern und dem Desktop zu wechseln.

Ein-und ausblenden der Symbolleiste des Betrachters

Die Symbolleiste des Betrachters stellt einige Elemente zur Veränderung des Betrachterbildes bereit. Die bereitgestellten Optionen hängen davon ab ob sie eine Verbindung zu einer Kamera oder zu einem Whiteboard aufgebaut haben.

Verwenden Sie die Schaltflächen "Anzeigen" und "Verbergen", um die Symbolleiste einzustellen. Wenn Sie die Symbolleiste ausblenden, vergrößern Sie damit den Bildausschnitt.

Die Ansicht der Schaltflächen zur Anzeige hängen von der Position des Betrachters ab. Wenn der Betrachter z.B. am oberen Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile, die nach links und rechts zeigen, angezeigt.





Wenn der Betrachter am linken Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile angezeigt, die nach oben und unten zeigen.





In allen Fällen wird die Schaltfläche zum Verbergen immer als letzte Schaltfläche in der Symbolleiste angezeigt.

LINKE STRG+ KLEINER ALS versteckt die Symbolleiste des Betrachters

Das Bild im Betrachter vergrößern





Sie können die Vergrößerung im Betrachter mit den entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste verändern. Wenn Sie ein Touchscreen Gerät verwenden, können Sie die auch Vergrößerung mit 2-Finger zusammen ziehen oder 2-Finger auseinander ziehen verändern.

Sie können außerdem die folgenden Tastenkommandos verwenden:

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop Tastenkomman dos	Laptop - Laptop (universal)
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF	ALT + UMSCHALT + 0 oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF

Vergrößerung reduzieren	LINKE STRG +	ALT + MINUS
	NUM MINUS	oder
	oder	FESTSTELLTA
	FESTSTELLTA	STE + MAUS
	STE + MAUS	RAD AB
	RAD AB	

Den Bildausschnitt verschieben

Wenn das Objekt unter der Kamera größer ist als im Betrachter erscheint, können Sie die Maus verwenden um das Bild zu rollen oder sie verwenden die entsprechende Funktion von SuperNova zum Verschieben des Bildes mit der Tastatur.

Um das Bild zu verschieben verwenden Sie das Tastenkommando Rechte STRG + eine Pfeiltaste Halten Sie die rechte STRG-Taste gedrückt, damit die Bewegung fortlaufend durchgeführt wird. Drücken Sie dieselbe Pfeiltaste mehrmals bei gedrückter rechter STRG-Taste um die Geschwindigkeit beim Rollen zu erhöhen. Drücken Sie die gegenüberliegende Pfeiltaste um die Bewegung zu verlangsamen.

Um mehr über das Rollen zu erfahren, sehen Sie "Andere Teile des Bildschirms ansehen".

Die Farbe des Bildes verändern



Mit der Schaltfläche "Farbwechsler" können Sie die Farbe und den Kontrast des Bildes mit verschiedenen Farbschemata wechseln.

LINKE STRG + NUM 0 schaltet zwischen den verfügbaren Farbschemata um.

SuperNova Speichert das gewählte Farbschema in den Einstellungen zu Connect and View.

Die Bewegungen der Präsentation verfolgen



Sie können die Verfolgung der Bewegung in der Präsentation kontrollieren, wenn Sie die Schaltfläche dazu aktivieren. Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird das Bild automatisch rollen, um der Bewegung der Präsentation mit dem Mauscursor über den Bildschirm zu folgen. Die Verfolgung des entfernten Mauszeigers wird unterbrochen, wenn sie ihren eigenen Mauszeiger bewegen. Die Verfolgung wird fortgesetzt, wenn sie die Bewegung stoppen.

Sie können die Verfolgung des entfernten Mauszeigers unterbinden, wenn Sie diese Funktion abschalten.

Das Bild einfrieren





Mit der Schaltfläche Bild einfrieren kann das aktuelle Bild festgehalten werden. Diese Einstellung erlaubt das detaillierte Betrachten des Bildes eher, als wenn es sich bewegt.

Diese Schaltfläche ist ebenfalls in der Symbolleiste des Betrachters verfügbar, wenn Sie eine Kamera verwenden. Das Einfrieren kann außerdem sinnvoll sein, wenn Sie eine Präsentation betrachten und dabei eine bestimmte Folie festhalten wollen. Der Lehrer kann dabei seine Präsentation fortsetzen. Wenn Sie das einfrieren ausschalten, wird das Bild im Betrachter aktualisiert. Der Betrachter zeigt das aktuelle Kamerabild oder den aktuellen Computerbildschirm.

Betrachterbild abspeichern



Mit der Schaltfläche "Betrachterbild abspeichern" kann eine Kopie des Bildes im Betrachter in die Windows Zwischenablage kopiert werden. Das Bild wird im Vollbild gespeichert, unabhängig von der Vergrößerung wie im Viewer verwendet wird.

Durch FESTSTELLTASTE + P wird das Bild auch in den Viewer der Windows Zwischenablage kopiert.

Sie können das Bild kopieren und in ein Dokument einfügen, oder mithilfe der SuperNova "Scannen und Lesen" Funktion in Text konvertieren oder Sie drücken LINKE STRG + FESTSTELLTASTE + O

18.2.3 Whiteboard Einstellungen

Alle Einstellungen zu Connect and View für das Whiteboard finden Sie in der Systemsteuerung von SuperNova. Diese finden Sie in der Symbolleiste

"Visuell" oder oder im Menü Connect and View. Weitere Informationen finden Sie im Dialogfeld zu den Connect and View Einstellungen.

KAPITEL 18

Touchscreen

19.1 Touchscreen Terminologie

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Gesten auf einem Touchscreen und deren Auswirkung.

Gesten	Handhabung
Tippen	Tippen Sie auf den
	Bildschirm, um eine
	Aktion auszuführen.
	z.B. tippen Sie auf eine
	Schaltfläche, um sie zu
	aktivieren. Einige
	Gesten erfordern das
	mehrfache Tippen auf
	den Bildschirm.
Drücken und Halten	Drücken und halten
	Sie einen Finger auf
	den Bildschirm.
Wischen	Das Wischen mit
	einem Finger über den
	Bildschirm.
Gleiten	Eine langsame
	Bewegung des Fingers
	auf dem Bildschirm,
	normalerweise vertikal
	oder horizontal
	ausgehend von einer
	Ecke des Bildschirms.

Zusammenziehen	Drücken Sie zwei
	Finger auf den
	Bildschirm und ziehen
	Sie sie zusammen.
Auseinanderziehen	Tippen Sie zwei Finger
	auf den Bildschirm und
	ziehen Sie sie
	auseinander.

19.2 Touchscreen Gesten

Die folgende Tabelle beinhaltet eine Liste von Touchscreen Gesten zur Steuerung von SuperNova.

Funktion	Gesten
Umschalten der Vergrößerung	3-Finger Doppeldruck
Vergrößerung erhöhen	2-Finger auseinander ziehen
Vergrößerung reduzieren	2-Finger zusammen ziehen
Pan	Wischen mit einem Finger
Anzeigen/Verbergen der Symbolleiste für Touch Screen von SuperNova	3-Finger Einzeldruck
Den Text am Finger sprechen	1 Finger Tip und halten

Mehr Gesten.

Zusätzlich zu den Touchscreen Gesten von SuperNova, finden Sie hier einige, die hilfreich sind, um sich in Windows zu bewegen.

Funktion	Gesten
Öffnen der Charms (Suchen, Teilen, Starten, Geräte, Einstellungen).	Gleiten Sie mit einem Finger über die rechte Ecke ein
Zwischen Apps wechseln	Gleiten Sie mit einem Finger über die linke Ecke
Das App Menü öffnen Das App Menü beinhaltet Befehle wie Speichern, Bearbeiten und Löschen.	Gleiten Sie mit einem Finger über die linke Ecke ein
Schließen einer geöffneten App	Gleiten Sie mit einem Finger über die obere Ecke ein, halten Sie diese Bewegung und ziehen Sie die App bis zum unteren Rand des Bildschirms.
Öffnen Sie das Kontextmenü (das entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf einem markierten Eintrag)	1 Finger Doppeltip, halten und lösen.
Verschieben von Objekten auf dem Bildschirm. z.B. zum Neuanordnen des Start Bildschirms oder des Desktops.	1 Finger Doppeldruck, halten und gleiten, um das Objekt zu bewegen. Zum Lösen, entfernen Sie den Finger.

19.3 SuperNova Symbolleiste für Touch Befehle

Die Symbolleiste für Touch Befehle von SuperNova erscheint am unteren Rand des Bildschirms wenn Sie einen 3-Finger Einzeltip ausführen. Mit der Symbolleiste für Touch Befehle haben Sie Zugriff auf die gebräuchlichsten Funktionen von SuperNova, wie z.B. das Ein- und Ausschalten der Vergrößerung, Ändern der Vergrößerungswerte und das Ein- und Ausschalten des Farbschemas



19.4 Eingaben auf einem Touchscreen

Wenn Sie Eingaben machen möchten und keine Tastatur angeschlossen ist, zeigt Ihnen SuperNova automatisch eine Bildschirm Tastatur Die Bildschirm Tastatur erscheint am unteren Rand des Bildschirms und wird mit vergrößerten Buchstaben mit hohem Kontrast dargestellt.

Sie können die Tastatur jederzeit aufrufen, indem Sie die Tastatur Schaltfläche der Symbolleiste für Touch Screen von SuperNova antippen oder die Tastatur Schaltfläche des Windows Infobereichs. Um die Tastatur auszublenden, tippen Sie auf die große Schaltfläche "X" in der rechten Ecke der Bildschirm Tastatur.

Sie können das Erscheinungsbild der Bildschirm Tastatur in der Dialogfläche der Einstellungen für Touchscreen anpassen.

19.5 Einstellen der Berührungsempfindlichkeit

Sie können die Breührungsempfindlichkeit einstellen mit der SuperNova die Fingertips, Gesten und das Wischen auf dem Touchscreen einstellt.

So können Sie z.B. bestimmen, wie SuperNova zwei Einzelfingertips als eine Doppeltip Geste interpretiert. Im Fehlerfall können Sie die Doppeltip Geschwindigkeit erhöhen. In der gleichen Art und Weise können Sie die Doppeltipp Geschwindigkeit festlegen um die Verschieben-Funktionen für Desktop Symbole zu beeinflussen.

Die Einstellungen zum Toschscreen nehmen Sie im Dialogfeld Touchscreen von SuperNova vor.

KAPITEL 19

Schnelltastenkonflikte

Es kommt vor, dass es zu Konflikten zwischen den Tastenkommandos von SuperNova und denen Ihrer Anwendung kommt. Sie können dieses Problem auf verschiedene Weise lösen.

20.1 Nächstes Tastenkommando von SuperNova ignorieren

Tastenkonflikte können Sie vermeiden, indem Sie vor dem eigentlichen Tastenkommando den Befehl an SuperNova zum Ignorieren der nächsten Taste erteilen. Nach dem Durchreichen des Tastenkommandos an die Applikation wird SuperNova die Tastenkommandos wieder einschalten.

Aktionstasten

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte des Nummernblock s	Laptop Universal
Den nächsten Tastendruck an die Applikation weiterreichen	LINKE STRG + 7	FESTSTELLTA STE + 3

20.2 Tastenkommandos von SuperNova abschalten

Tastenkonflikte können Sie vermeiden, indem Sie die Tastenkommandos von SuperNova abschalten. Alle Tastenkommandos werden dabei deaktiviert, außer dem Kommando zum Einschalten der Tastenkommandos.

Aktionstasten

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte des Nummernblock s	Laptop Universal
Tastenkommandos deaktivieren	LINKE STRG + 8	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + 3

Neuzuordnung eines Tastenkommandos von SuperNova 20.3

Sie können jedes beliebige Tastenkommando von SuperNova hinzufügen, löschen oder neuzuordnen. Diese Funktion ist nützlich, um Tastenkommando Konflikte zwischen SuperNova und ihrer Anwendung zu lösen oder Tastenkommandos mit einer für Sie einfacheren Tastenkombination zu belegen.

Um dies zu tun:

Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Press ALT + G.

Das Menü "Allgemein" wird geöffnet.

3. Gehen Sie mit CURSOR AB bis "Tastatur und Tastenkommandos" und drücken Sie ENTER.

Ein Untermenü wird geöffnet.

4. Gehen Sie mit CURSOR AB bis "Tastenkommandos" und drücken Sie ENTER.

Das Dialogfeld "Tastenkommandos" öffnet sich.

- 5. Bewegen Sie sich mit TABULATOR und benutzen Sie die Liste "Tastenkommando Befehl Set" und die Liste "Befehl", um das Tastenkommando auszuwählen und zu ändern.
- 6. Um Änderungen vorzunehmen, nutzen Sie die Schaltflächen "Taste hinzufügen", "Taste ersetzen" oder "Taste entfernen".
- 7. Gehen Sie mit TABULATOR bis zur Schaltfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

SuperNova bestätigt die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

Tipp: Für ein einfaches Auffinden eines verfügbaren Tastenkommandos nutzen Sie die Tastatur Hilfe von SuperNova.

KAPITEL 20

Tastenkommando

21.1 Aktionen

Funktion	Desktop -	Laptop -
	Standard Nummernblock	Universell
Autotraining Crafiles		OTDO :
Autotraining Grafiken	STRG +	STRG +
	RECHTE	FESTSTELL +
	ECKIGE	G
	KLAMMER	
Pop Up Menü der	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
Systemsteuerung	STE +	STE +
	LEERTASTE	LEERTASTE
Dokument Leser	FESTSTELLTA	UMSCHALT +
	STE +	ALT + D
	NUMPAD	
	PLUS	
Autotraining Grafiken	ESCAPE	ESCAPE
verlassen		
Bildschirm einfrieren	PAUSE	Keine Belegung
SuperNova Hilfe.	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE + F1	STE + F1
	oder RECHTE	
	STRG +	
	RECHTE	
	UMSCHALT +	
	SCHRÄGSTRI	
	CH	
	VORWÄRTS	

Tastenkombinationen ein / aus	LINKE STRG + 8	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + 3
Systemsteuerung öffnen	LINKE STRG + LEERTASTE	LINKE STRG + LEERTASTE
Nächste Taste durchreichen	LINKE STRG + 7	FESTSTELLTA STE + 3
Verlassen	FESTSTELLTA STE + F4	FESTSTELLTA STE + F4
Umschaltung Spalten / Zeilenmodus	LINKE STRG + 9	Keine Belegung
Bildschirm Neuaufbau	STRG + SEMIKOLON	FESTSTELLTA STE + ESCAPE
Zeige Auswahl der Landessprache	Keine Belegung	STRG + FESTSTELLTA STE + L
Zeige Auswahl der Landessprache	Keine Belegung	STRG + FESTSTELLTA STE + S
Zeichenerkennung von Ihrem Scanner, Kamera oder PDF Datei	FESTSTELLTA STE + O	FESTSTELLTA STE + O
Zeichenerkennung aus der Windows Zwischenablage	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + O	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + O
Kopieren Sie das Bild im aktuellen Betrachter von Connect and View in die Windows Zwischenablage.	FESTSTELLTA STE + P	FESTSTELLTA STE + P
Standard Benutzerprofil wiederherstellen	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + O	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + O

Nicht zugewiesene Kommandos

Es folgt eine Liste der nicht zugewiesenen Kommandos in dieser Kategorie. Diesen Funktionen kann manuell ein Tastenkommando zugewiesen werden.

- Anwendungshilfe
- Bildschirmabzug
- Dialog für die Sprachausführlichkeit anzeigen
- Script Editor starten
- Fenster trainieren
- Fenster mit Verzögerung trainieren
- Windows Grundlagen Hilfe

21.2 Sprache

Funktion	Desktop - Standard	Laptop - Universell
	Nummernblock	
Anti - Stotter System an / aus	LINKE STRG +	Keine Belegung
	6	
Text Ansage unter	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
Mauszeiger an / aus	STE + M	STE + M
Großbuchstaben an / aus	FESTSTELLTA	Keine Belegung
	STE + Ä	
Zeichenecho umschalten	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE + Ö	STE + 2
Tastenbeschreibung	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE + Minus	STE + 1
nächste Landessprache	LINKE STRG +	Keine Belegung
	PUNKT	

vorherige Landessprache	LINKE STRG + KOMMA	Keine Belegung
Bildschirmmarken	LINKE STRG + 5	Keine Belegung
Stumm	LINKE STRG	LINKE STRG
Nächster Synthesizer	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + Plus	Keine Belegung
vorheriger Synthesizer	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + Ü	Keine Belegung
Geschwindigkeit verringern	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + ß	LINKE STRG + ALT + BILD AB
Geschwindigkeit erhöhen	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + 0	LINKE STRG + ALT + BILD AUF
Ausführlichkeitsschema wechseln	Keine Belegung	FESTSTELL + V
Sprache an / aus	LINKE STRG + 0	LINKE STRG + ALT 0
Lautstärke verringern	LINKE STRG + MINUS	LINKE STRG + ALT + MINUS
Lautstärke erhöhen	LINKE CONTROL + 0	LINKE STRG + ALT + 0

21.3 Sprechtasten

Funktion	Desktop -	Laptop - Laptop
i dimeion	Standardwerte	(universal)
	des	
	Zahlenblocks	
zusätzliche	LINKE	STRG +
Fokusinformationen	UMSCHALT +	FESTSTELLTA
	NUM 0	STE +
		CURSOR AUF
Zeichen	NUM 4	FESTSTELLTA
		STE +
		CURSOR
		LINKS
STRG	NUM KOMMA	Keine Belegung
Beschreibe Fokusposition	NUM 8	Keine Belegung
Beschreibung des	LINKE	STRG +
Tastenkommandos	UMSCHALT +	FESTSTELLTA
	NUM KOMMA	STE +
		CURSOR
		LINKS
Fokus	NUM 0	FESTSTELLTA
		STE +
		CURSOR AUF
Ab Cursor	LINKE	Drücken Sie
	UMSCHALT +	FESTSTELLTA
	NUM 2	STE + ENDE.
Überschriften	NUM 3	UMSCHALT +
		FESTSTELLTA
		STE +
		CURSOR
		LINKS
Titel oberhalb	FESTSTELLTA	Keine Belegung
	STE +	
	NUMPAD 8	

Titel links	FESTSTELLTA STE + NUMPAD 7	Keine Belegung
Zeile Absatz	NUM 6 NUM 5	Keine Belegung LINKE STRG +
riosaiz	TVOW 0	LINKE
		UMSCHALT +
		FESTSTELLTA STE + P
Absatz (zum nächsten)	FESTSTELLTA	Keine Belegung
	STE + 0	
Absatz (zum vorherigen)	FESTSTELLTA	Keine Belegung
	STE + 9	
Letzte Ansage wiederholen	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE + NUMPAD 9	STE + <
Auswahl	NUM 1	UMSCHALT +
Auswaiii	INCIVI I	FESTSTELLTA
		STE +
		CURSOR AB
Satz	FESTSTELLTA	LINKE STRG +
	STE +	LINKE
	NUMPAD 4	UMSCHALT +
		FESTSTELLTA
		STE + S
Satz (zum nächsten)	FESTSTELLTA	Keine Belegung
	STE + PUNKT	
Satz (zum vorherigen)	FESTSTELLTA	Keine Belegung
	STE + KOMMA	
Status	NUM 2	FESTSTELLTA
		STE + BILD AB

Tabellenspalte Tabellenspalte ab Zelle	FESTSTELLTA STE + NUMPAD 6 FESTSTELLTA	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + CURSOR RECHTS UMSCHALT +
	STE + NUMPAD KOMMA	FESTSTELLTA STE + BILD AB
Tabellenspalte bis Zelle	FESTSTELLTA STE + NUMPAD 3	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + BILD AB
Tabellenzeile	FESTSTELLTA STE + NUMPAD 0	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + CURSOR AUF
Tabellenzeile ab Zelle	FESTSTELLTA STE + NUMPAD 2	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + ENDE
Tabellenzeile bis Zelle	FESTSTELLTA STE + NUMPAD 1	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + POS1
Bis Cursor	LINKE UMSCHALT + NUM 1	FESTSTELLTA STE + POS1
Wo bin ich?	NUM 7	FESTSTELLTA STE + BILD AUF
Fenster	NUM 9	FESTSTELLTA STE + B
Wort	NUM 5	FESTSTELLTA STE + CURSOR RECHTS

Nicht zugewiesene Kommandos

Die folgende Liste zeigt Funktionen ohne Tastenbelegung in der Kategorie. Diesen Funktionen kann manuell ein Tastenkommando zugewiesen werden.

- Titel unterhalb
- Titel rechts
- Wort (zum nächsten)
- Wort (zum vorherigen)

21.4 Lesen ab hier

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universell
Vom Mausklick aus lesen.	MITTLERE MAUSTASTE	MITTLERE MAUSTASTE
Erweitertes Lesen ab hier	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + 1	Keine Belegung
Lesen ab hier	NUM PLUS	FESTSTELLTA STE + CURSOR AB
Pausieren/ Weiter Lesen	LEERTASTE	LEERTASTE
Lesen anhalten	NUM PLUS oder Escape oder LINKE STRG oder RECHTE STRG	ESCAPE oder LINKE STRG oder RECHTE STRG
Lesen stoppen und Focus wechseln.	NUM MINUS oder LEERTASTE	LEERTASTE

21.5 Dolphin Cursor (Allgemein)

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte	Laptoptasten Universal
	des Nummernblock s	
Nach unten aktivieren	KOMMA	keine Zuordnung
Aktivieren	LEERTASTE	LEERTASTE
Nach oben aktivieren	PUNKT	keine Zuordnung
Automatischer Dolphin Cursor ein / aus	LINKE STRG + 4	keine Zuordnung
Automatischer Dolphin Cursor auf Bereich beschränkt ein / aus	LINKE STRG + 2	keine Zuordnung
Mit dem Dolphin Cursor suchen	F3	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + F
Mit dem Dolphin Cursor vorwärts suchen	F4	FESTSTELLTA STE + F3
Mit dem Dolphin Cursor rückwärts suchen	F2	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + F3
Formularmodus umschalten	FESTSTELLTA STE + ENTER	FESTSTELLTA STE + ENTER
Steuerelement bearbeiten	ENTER	ENTER
Modus arretieren	LINKE STRG + 1	keine Zuordnung
Grafik trainieren	LINKE STRG + Ü	FESTSTELLTA STE + G

Dolphin Cursor ausschalten	NUM MINUS	FESTSTELLTA
		STE + Y
Dolphin Cursor einschalten	NUM MINUS	FESTSTELLTA
		STE + Y
Fenster arretieren	LINKE STRG +	keine
	3	Zuordnung

21.6 Dolphin Cursor (Bewegung)

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Zahlenblocks	
Unten am Fenster / Bereich	LINKE STRG + ENDE	STRG + ENDE
Wählen Sie "Dolphin Cursor beschränkt auf Bereiche"	NUM GETEILT	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + Z
Dolphin Cursor Seite abwärts	FESTSTELLTA STE + BILD AB	STRG + BILD AB
Dolphin Cursor Bild auf	FESTSTELLTA STE + BILD AUF	STRG + BILD AUF
Zeilenende	ENDE	ENDE
Nächste Überschrift	Drücken Sie FESTSTELLTA STE + ENTFERNEN.	Н
Vorherige Überschrift	Drücken Sie FESTSTELLTA STE + EINFÜGEN.	UMSCHALT + H
Links	CURSOR LINKS	CURSOR LINKS

Linker Rand	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + POS1	Keine Belegung
Wort links	LINKE STRG + CURSOR LINKS	LINKE STRG + CURSOR LINKS
Bewegt den Dolphin Cursor zur ersten Symbolleiste	LINKE UMSCHALT + NUM MINUS	FESTSTELLTA STE + F8.
Bewegt den Dolphin Cursor zur nächsten Anwendung	LINKE STRG + GRAD	Keine Belegung
Bewege Dolphin Cursor zum nächsten Fenster	LINKE STRG + TAB	Keine Belegung
Bewege Dolphin Cursor zur vorherigen Anwendung	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + GRAD	Keine Belegung
Bewege Dolphin Cursor zum vorherigen Fenster	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + TABULATOR	Keine Belegung
Bewege Dolphin Cursor zur Schnellstart Leiste	LINKE UMSCHALT + NUM STERN	Keine Belegung
Bewege Dolphin Cursor zu Infobereich	LINKE UMSCHALT + NUM SCHRÄGSTRI CH	Keine Belegung
Physikalisch abwärts	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + CURSOR ABWÄRTS	UMSCHALT + ALT + CURSOR ABWÄRTS

Physikalisch links Physikalisch rechts	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + CURSOR LINKS LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA	UMSCHALT + ALT + CURSOR LINKS UMSCHALT + ALT + CURSOR
	STE + CURSOR RECHTS	RECHTS
Physikalisch auf	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + CURSOR AUF	UMSCHALT + ALT + CURSOR RECHTS
Zum Anwendungscursor bewegen	NUM STERN	FESTSTELLTA STE + MINUS.
Nächstes Dialogfeld	F7	STRG + TABULATOR
Nächstes großes Objekt	BILD AB	BILD AB
Nächste Zeile	CURSOR AB	CURSOR AB
Nächstes Hauptfenster	F8	STRG + F6
Nächstes Objekt	TABULATOR	TABULATOR
Physikalisch unten	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + CURSOR ABWÄRTS	Keine Belegung
Physischer Modus ein/aus	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + 9	Keine Belegung

Physikalisch unten	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + BILD AUF	Keine Belegung
Vorheriges Dialogfeld	LINKE UMSCHALT + F7	STRG + UMSCHALT + TABULATOR
Vorheriges großes Objekt	BILD AUF	BILD AUF
Vorherige Zeile	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Vorheriges Hauptfenster	LINKE UMSCHALT + F8	Keine Belegung
Vorheriges Objekt	LINKE UMSCHALT + TAB	UMSCHALT + TABULATOR
Dolphin Cursor auf Auswahl beschränken	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + NUM MINUS	Keine Belegung
rechts	CURSOR RECHTS	CURSOR RECHTS
Rechter Rand	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + ENDE	Keine Belegung
Rechtes Wort	LINKE STRG + CURSOR RECHTS	LINKE STRG + CURSOR RECHTS
Dolphin Cursor zur Maus führen	MITTLERE MAUSTASTE	MITTLERE MAUSTASTE
Vorwärts springen	LINKE STRG + CURSOR AB	LINKE STRG + CURSOR AB
Vorwärts springen	LINKE STRG + CURSOR AUF	LINKE STRG + CURSOR AUF

Zeilenanfang	POS1	POS1
Tabelle abwärts	FESTSTELLTA	LINKE STRG +
	STE +	ALT +
	CURSOR AB	CURSOR AB
Tabelle Links	FESTSTELLTA	LINKE STRG +
	STE +	ALT +
	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Nächste Tabelle	Drücken Sie	Т
	FESTSTELLTA	
	STE + END.	
Vorherige Tabelle	FESTSTELLTA	UMSCHALT +
	STE + POS1	T
Tabelle Rechts	FESTSTELLTA	LINKE STRG +
	STE +	ALT + RIGHT
	CURSOR	ARROW
	RECHTS	
Tabelle aufwärts	FESTSTELLTA	LINKE STRG +
	STE +	ALT +
	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Oben am Fenster / Bereich	LINKE STRG +	STRG + POS1
	POS1	

21.7 Dolphin Cursor (Mouse Control)

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Mit der Linken Maustaste ziehen	RECHTE STRG + POS1	STRG + FESTSTELLTA STE + 8

Rechte Maustaste festhalten	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + POS1	STRG + FESTSTELL + 9
Ablegen	RECHTE STRG + ENDE	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + 7
Linksklick bei Dolphin Cursor	EINFÜGEN	FESTSTELL + 8
Linksklick auf Dolphin Cursor um Dolphin Cursor zu deaktivieren.	A	Keine Belegung
Doppelklick Links bei Dolphin Cursor	Q	Keine Belegung
Mittlerer Klick bei Dolphin Cursor	S	Keine Belegung
Mausrad abwärts bei Dolphin Cursor	X	Keine Belegung
Mausrad aufwärts bei Dolphin Cursor	W	Keine Belegung
Maus zum Fokus bewegen	RECHTE STRG + ENTFERNEN	Keine Belegung
Rechtsklick auf Dolphin Cursor	ENTFERNEN	FESTSTELLTA STE + 9
Rechtsklick bei Dolphin Cursor und Dolphin Cursor deaktivieren.	D	Keine Belegung
Doppelklick Rechts auf Dolphin Cursor	E	Keine Belegung

Bemerkung: In einigen Anwendungen, wie z.B. Internet Explorer oder Adobe Reader kann es bei der Benutzung der oben erwähnten Tastenkommandos mit einer Schnellnavigationstaste von SuperNova zu Konflikten führen.. Wenn es zu einem Konflikt kommt, hat die Schnellnavigationstaste Vorrang. Um in einer Anwendung die oben erwähnten Tastenkommandos mit einer kollidierenden Schnellnavigationstaste benutzen zu können, müssen Sie den dazu gehörigen Dolphin Cursor (Maussteuerung) neu zuweisen.

21.8 Dolphin Cursor Auswahl

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte	Laptop Universal
	des	Ulliversal
	Nummernblock	
	S	
Fensterende	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	ENDE	ENDE
Kopieren	STRG + C	STRG + C
Zeilenende	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	END	END
Links	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Wort links	STRG +	STRG +
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Nächstes großes Objekt	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	BILD AB	BILD AB
Nächste Zeile	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR AB	CURSOR AB
Vorheriges großes Objekt	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	BILD AUF	BILD AUF

Vorherige Zeile	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Rechts	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
Wort rechts	STRG +	STRG +
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
Alles markieren	STRG + A	STRG + A
Nächstes überspringen	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR AB	CURSOR AB
Vorheriges überspringen	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Zeilenanfang	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	HOME	HOME
Fensteranfang	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	POS1	POS1

21.9 Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universal
Farbschema ein/aus	LINKE STRG + NUM 0	UMSCHALT + ALT + C

Fixbereich erzeugen	LINKE STRG + NUM 5	LINKE UMSCHALT + LINKE STRG + ALT + H
Fokushervorhebung ein/aus	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + KLEINER ALS	LINKE UMSCHALT + LINKE ALT + O
Fixbereiche ein/aus	LINKE STRG + NUM 3	Keine Belegung
Nach unten springen	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + NUM 2	LINKE ALT + BILD AB
Nach links springen	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + NUM 4	LINKE ALT + POS1
Nach rechts springen	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + NUM 6	LINKE ALT + ENDE
Nach oben springen	LINKE STRG + FESTSTELLTA STE + NUM 8	LINKE ALT + BILD AUF
Vergrößerung verringern	LINKE STRG + NUM MINUS	LINKE ALT + MINUS
	oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD UNTEN	oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD UNTEN

Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD UNTEN	LINKE ALT + Gleichheitszeic hen oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD UNTEN
X Vergrößerung erhöhen	RECHTE STRG + NUM GETEILT	Keine Belegung
X Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM MINUS	Keine Belegung
Y Vergrößerung erhöhen	RECHTE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Y Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Vergrößerung ein/aus	LINKE STRG + NUM ENTER	ALT + 0
Fixbereiche bearbeiten	LINKE STRG + NUM 6	LINKE UMSCHALT + ALT + H
Vergrößerungsfenster bearbeiten	LINKE STRG + NUM 4	LINKE UMSCHALT + ALT + A
Nach unten bewegen	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AB	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AB

Orientierung wählen	LINKE STRG + NUM 1	Keine Belegung
Modus Überblick ein/aus	LINKE STRG + KLEINER ALS	Keine Belegung
nach unten srollen	RECHTE	RECHTE
	STRG +	STRG +
	CURSOR AB	CURSOR AB
nach links scrollen	RECHTE	RECHTE
	STRG +	STRG +
	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
nach rechts scrollen	RECHTE	RECHTE
	STRG +	STRG +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
nach oben scrollen	RECHTE	RECHTE
	STRG +	STRG +
	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Primäre Vergrößerung	LINKE STRG +	LINKE
umschalten	NUM 7	UMSCHALT +
		ALT + M
Position wiederherstellen	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM	
	KOMMA	
Position speichern	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM 0	
Bildschirm wechseln	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE +	STE +
	MITTLERE	MITTLERE
	MAUSTASTE	MAUSTASTE
Textglättung umschalten	LINKE STRG +	Keine Belegung
(True Font/Standard/Aus)	NUM 8	
Fett Druck an aus	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM 8	

Schärfe an aus	RECHTE	Keine Belegung
	STRG +	
	RECHTE	
	UMSCHALT +	
	NUM 8	

21.10 Einstellung des Vergrößerungsfensters

Funktion	Desktoptasten	Laptop
	- Standardwerte	Universal
	des	
	Nummernblock s	
Fixbereich mit Maus ändern	LINKE	LINKE
	MAUSTASTE	MAUSTASTE
Bereich nach unten	CURSOR AB	CURSOR AB
verschieben		
Bereich nach links	CURSOR	CURSOR
verschieben	LINKS	LINKS
Bereich nach rechts	CURSOR	CURSOR
verschieben	RECHTS	RECHTS
Bereich nach oben	CURSOR AUF	CURSOR AUF
verschieben		
Bearbeitung abbrechen	ESCAPE	ESCAPE
Inhalt nach unten	LINKE	LINKE
verschieben	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR AB	CURSOR AB
Inhalt nach links verschieben	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Inhalt nach rechts	LINKE	LINKE
verschieben	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS

Inhalt nach oben verschieben	LINKE	LINKE
minait riadii oberi versonieberi	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
Orientiarung umachaltan	LINKE STRG +	keine
Orientierung umschalten	NUM 1	Zuordnung
Vararë Caruna varrin sarr	_	<u> </u>
Vergrößerung verringern	LINKE STRG +	ALT + MINUS
	NUM MINUS	oder
	oder	FESTSTELLTA
	FESTSTELLTA	STE +
	STE +	MAUSRAD AB
)	MAUSRAD AB	
X Vergrößerung verringern	RECHTE	keine
	STRG + NUM	Zuordnung
	GETEILT	
Y Vergrößerung verringern	RECHTE	keine
	STRG + NUM	Zuordnung
	STERN	
Fixbereich löschen	ENTFERNEN	ENTFERNEN
Bearbeitungsmodus	ESCAPE	ESCAPE
verlassen		
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG +	LINKE
	NUM PLUS	UMSCHALT +
	oder	ALT + 0
	FESTSTELLTA	oder
	STE +	FESTSTELLTA
	MAUSRAD AB	STE +
		MAUSRAD
		AUF
X Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG +	keine
	NUM MINUS	Zuordnung
Y Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG +	keine
	NUM STERN	Zuordnung

Bereich schmaler	LINKE STRG + CURSOR	LINKE STRG + CURSOR
	LINKS	LINKS
Bereich vertikal kleiner	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Bereich vertikal vergrößern	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	CURSOR AB	CURSOR AB
Bereich breiter	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
Bereich mit der Maus	Υ	Υ
bewegen		
Den Inhalt des Bereichs mit	С	С
der Maus bewegen		
Definition des Fixbereich	ENTER	ENTER
beenden	oder RECHTE	oder RECHTE
	MAUSTASTE	MAUSTASTE
Größe des Bereichs mit der	X	Х
Maus festlegen		
Schriftglättung	LINKE STRG +	keine
	NUM 8	Zuordnung
Fokusverfolgung	LINKE	keine
	UMSCHALT +	Zuordnung
	NUM 8	

21.11 Laufschrift

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des	(universal)
	Zahlenblocks	
Vergrößerung verringern	LINKE STRG +	ALT + MINUS
	NUM MINUS	oder
	oder	FESTSTELLTA
	FESTSTELLTA	STE +
	STE +	MAUSRAD AB
	MAUSRAD AB	
X Vergrößerung verringern	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM	
	GETEILT	
Y Vergrößerung verringern	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM	
	STERN	
Laufschrift verlassen	ESCAPE	ESCAPE
Laufschrift verlassen und bei	NUM ENTER	ENTER
aktuellen Zeichen klicken		oder LINKE
oder den Dolphin Cursor zum		MAUSTASTE
aktiven Zeichen ziehen.		
Vorwärts springen	ENTER	ENTER
Zur ersten Zeile springen	POS1	POS1
Zum Fokus springen	NUM 0	F5
Zur letzten Zeile springen	ENDE	ENDE
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG +	ALT +
	NUM PLUS	UMSCHALT +
	oder	0
	FESTSTELLTA	oder
	STE +	FESTSTELLTA
	MAUSRAD	STE +
	AUF	MAUSRAD
		AUF

X Vergrößerung verringern	LINKE STRG + NUM MINUS	Keine Belegung
Y Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Laufschrift Dokument	LINKE STRG + NUM KOMMA	Keine Belegung
Laufschrift Dokument, beginnend am Fokus	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + NUM 2	Keine Belegung
Laufschrift Dokument ab Cursor	LINKE STRG + NUM 2	LINKE UMSCHALT + ALT + L
Laufschrift gesamtes Fenster	LINKE STRG + NUM 9	LINKE UMSCHALT + ALT + V
Rückwärts bewegen	CURSOR LINKS	CURSOR LINKS
Vorwärts bewegen	CURSOR RECHTS	CURSOR RECHTS
Nächste Zeile	SEITE ABWÄRTS	SEITE ABWÄRTS
Vorherige Zeile	SEITE AUFWÄRTS	SEITE AUFWÄRTS
Bewegung schneller	CURSOR AUFWÄRTS	CURSOR AUFWÄRTS
Bewegung langsamer	CURSOR AB	CURSOR AB
Start oder Stopp	LEERTASTE	LEERTASTE
Schriftglättung	LINKE STRG + NUM 8	Keine Belegung

21.12 Objektsuche

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Nummernblock s	
Objektsuche (Dialogfeld mit mehreren Registerkarten)	FESTSTELLTA STE + TAB	FESTSTELLTA STE + TAB
Links	FESTSTELLTA STE + 1	FESTSTELLTA STE + F7
Überschriften	FESTSTELLTA STE + 2	FESTSTELLTA STE + F6
Rahmen und Objekte	FESTSTELLTA STE + 3	FESTSTELLTA STE + F9
Tabellen	FESTSTELLTA STE + 5	Keine Belegung
Steuerelemente	FESTSTELLTA STE + 6	FESTSTELLTA STE + F5
Versionen und Kommentare	FESTSTELLTA STE + 7	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + R
Fehler	FESTSTELLTA STE + 8	Keine Belegung

Globale Elementliste

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Zahlenblocks	
Einträge im Infobereich	FESTSTELLTA STE + 0	FESTSTELLTA STE + F11

Für Informationen zu benutzerdefinierten Listen lesen bitte auf die Hilfe von SuperNova zur ausgewählten Anwendung. Hilfeinformationen können von SuperNova abgerufen werden, wenn Sie FESTSTELLTASTE + F1 drücken.

21.13 Texteingabe

Diese Kategorie listet Tastenkommandos, die aktiv werden, wenn der Formularmodus aktiv ist und andere Funktionen haben, wenn der Dolphin Cursor aktiv ist.

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte	Laptop Universal
	des Nummernblock	
Abbrechen	S ESCAPE	ESCAPE
Vorheriges Zeichen löschen	RÜCKTASTE	RÜCKTASTE
aktuelles Zeichen löschen	ENTFERNEN	ENTFERNEN
ENTER	ENTER	ENTER
Zeichen nach links	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Zum Zeilenende springen	ENDE	ENDE
Zum Zeilenende springen	POS1	POS1
Zeichen phonetisch ansagen	LINKE STRG +	keine
	LINKE	Zuordnung
	UMSCHALT +	
	NUM 4	

Zeile phonetisch ansagen	LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + NUM 6	keine Zuordnung
Zeichen lesen	NUM 4	FESTSTELLTA STE + CURSOR LINKS
Zeichenattribute lesen (Set 1)	LINKE UMSCHALT + NUM 4	keine Zuordnung
Zeichenattribute lesen (Set 2)	LINKE STRG + NUM 4	keine Zuordnung
Zeile lesen	NUM 6	FESTSTELLTA STE + CURSOR AUF
Zeichen nach rechts	CURSOR RECHTS	CURSOR RECHTS
Zeile buchstabieren	LINKE UMSCHALT + NUM 6	keine Zuordnung
Zeile ausführlicher	LINKE STRG + NUM 6	keine Zuordnung

21.14 Braille Befehle mit der Tastatur

Funktion	Desktop Tasten	Laptop Tasten
Zurück	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	KOMMA	KOMMA

Attribute durchlaufen	LINKE STRG +	LINKE STRG +
Attribute durchiadren	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	6	6
Attributbeschreibung ein/aus	LINKE STRG +	LINKE STRG +
/ ttributbesomeibung em/aus	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	7	7
Vorwärts	LINKE STRG +	LINKE STRG +
Vermane	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	PUNKT	PUNKT
Springe zum Fokus	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT
	MINUS	+MINUS
Braille Fixbereiche ein/aus	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	2	2
Kurzschrift ein/aus	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	8	8
Zeige Braille am Bildschirm	LINKE STRG +	LINKE STRG +
ein/aus	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	1	1
Brailleausgabe ein/aus	LINKE STRG +	LINKE STRG +
	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	0	0
physikalischer/logischer	LINKE STRG +	LINKE STRG +
Modus	LINKE	LINKE
	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	9	9

Umschaltung des	LINKE	LINKE
Ausführlichkeitsschemas	UMSCHALT +	UMSCHALT +
	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE + ß	STE + ß

Nicht zugewiesene Kommandos

Die folgende Liste zeigt einige Kommandos, die keiner Taste zugewiesen sind. Sie können manuell mit einem Kasten Kommando versehen werden oder sind bereits einer Taste an der Braillezeile zugeordnet. Prüfen Sie die Tastentabelle zu Ihrer Braille Zeile um mehr über diese Funktionen zu erfahren.

Unten	halbe Breite links
Braille Dokument lesen zurück	halbe Breite rechts
Braille Dokument lesen zurück (Dolphin Cursor)	Eingabe ein/aus
Braille Dokument lesen vorwärts	Layout ein/aus
Braille Dokument lesen vorwärts (Dolphin Cursor)	Zeile ab
Modul links	Zeile ab (Dolphin Cursor)
Modul rechts	Zeilenende
Cursor ein/aus	Zeilenanfang
Cursor Art	Zeile auf

Zeige Zeichen Zeile auf (Dolphin Cursor)

Zeige Schriftfarbe Aktion der Routingtaste

Zeige Schrift Vordergrundfarbe Aktion der Routingtaste mit

Dolphin Cursor

Zeige Schriftartname Aktion der zweiten

Routingtaste

Zeige Schriftgröße Aktion der zweiten

Routingtaste mit Dolphin

Cursor

Zeige Schriftschnitt Oben

Umschaltung 6/8 Punkte Cursorverfolgung ein/aus

Erweitert ein/aus blinkende Großbuchstaben

ein/aus

Leerzeichen erweitern ein/aus Breite links

Brailleeingabe Breite rechts

21.15 Tasten zur Schnellnavigation für den Web Browser

SuperNova beinhaltet die folgenden Tastenkommandos für die Navigation in Webseiten. Die Tastenkommandos sind mit dem Dolphin Cursor im Web Browser verfügbar. Die Tastenzuweisungen können nicht entfernt oder geändert werden.

21.15.1 Tasten zur Schnellnavigation

Um zum vorherigen Element zu springen, nutzen Sie zusätzlich die Umschalt-Taste

Springen zu	Taste			
Schaltfläche	В			
Listenfeld	С			
Unterschiedliches Element	D			
Eingabefeld	E			
Formularfeld	F			
Grafik	G			
Überschrift	Н			
Listeneintrag	I			
Link	K			
Liste	L			
Rahmen	M			
Textblock	N			
Absatz	Р			
Block Quote	Q			
Optionsschaltfläche	R			
Tabelle	Т			
Unbesuchter Link	U			
Besuchter Link	V			
Kontrollfeld	X			
Überschriften Ebene 1 - 6	1 - 6			
Landmark	; (SEMI COLON)			

21.16 Schnellnavigationstasten für Microsoft Word

SuperNova enthält die folgende Liste von Tasten für unterstützte Versionen von Microsoft Word. Sie können die Tastenkommandos nicht entfernen oder ändern.

21.16.1 Tasten zur Schnellnavigation

Um zum vorherigen Element zu springen, nutzen Sie UMSCHALT + FESTSTELLTASTE + Taste

Springen zu	Taste
Lesezeichen	FESTSTELLTASTE +
	A
Schaltfläche	FESTSTELLTASTE +
	В
Kommentar	FESTSTELLTASTE +
	С
Anderers Absatzformat	FESTSTELLTASTE +
	D
Eingabefeld	FESTSTELLTASTE +
	E
Fuß- oder Endnote	FESTSTELLTASTE +
	F
Grafik	FESTSTELLTASTE +
	G
Format der Überschrift	FESTSTELLTASTE +
	H
Listeneintrag	FESTSTELLTASTE + I
Link	FESTSTELLTASTE +
	K
Liste	FESTSTELLTASTE +
	L

Text	FESTSTELLTASTE + Y
Absatz im Format Standard	FESTSTELLTASTE + N
Objekt (einschließlich Grafiken)	FESTSTELLTASTE + O
Absatz	FESTSTELLTASTE + P
Revision	FESTSTELLTASTE + R
Tabelle	FESTSTELLTASTE + T
Kontrollfeld	FESTSTELLTASTE + X
Abschnittswechsel	FESTSTELLTASTE + Z

Beachten Sie, dass einige Schnellnavigationstasten nicht funktionieren, wenn Sie in einem geschützten Dokument arbeiten.

ZoomText zu SuperNova Begriffe vergleichen

Die folgende Tabelle enthält eine hilfreiche Gegenüberstellung der Begriffe, wie sie im ZoomText und in SuperNova verwendet werden.

ZoomText Bezeichnung	äquivalente Bezeichnung in SuperNova
AppReader	Lesen ab hier (Sehen "Fortlaufend lesen" Seite 46)
Kamera	Connect and View (Seite 111)

Farbe	Farbschemata (Sehen		
	"Erleichtert das Auffinden des		
	Focus" Seite 31)		
Befehlstasten	Tastenkombinationen		
Cursor	Hervorhebung ->Cursor		
DocReader	Dokument Leser (Seite 85)		
Mehrere Bildschirme	Mehrere Bildschirme (Sehen		
	"Dialogfeld "Visuell Mehrere		
	Bildschirme"" Seite 183)		
Farbe	Tönung (Seite 172)		
Finder	Objektsuche (Seite 158)		
Fokus Verstärkung	Optionen zur Hervorhebung		
	->Fokus (Sehen "Erleichtert		
	das Auffinden des Focus"		
	Seite 32)		
Font Verstärkungen	Schriftglättung (Seite 187)		
Fenster einfrieren	Überwachungsbereich (Sehei		
	"Feste Vergrößerungsfenster"		
	Seite 26)		
Maus Echo	Text unter der Maus		
	sprechen. (Sehen "Klicken		
	und lesen" Seite 49)		
Zeiger Verstärkung	Hervorbebung ->Maus		
Zeiger Schema	Mauszeiger (Sehen "Machen		
	Sie den Zeiger leichter zu		
	sehen" Seite 33)		
Text Finder	Finde mit Dolphin Cursor		
	(Sehen "Mit dem Dolphin		
	Cursor Suchbefehl suchen"		
	Seite 79)		
Textverarbeitung	Text Stil Ansage		
Text Lese Kommandos	Sprechtasten (Seite 140)		
Tastenecho	Zeichenecho (Sehen "Ändern		
	der Ansage während der		
	Eingabe" Seite 50)		

Ansicht	Modus Überblick (Sehen "Ansicht der Vergrößerung in der Übersicht" Seite 26)
Typ des Fensters	Vergrößerungsansicht (Sehen "Modus der Vergrößerung verändern" Seite 20)
Web Finder	Objektsuche (Seite 158)
Vergrößerungsstufe	Vergrößerungsstufe (Sehen "Ändern der Vergrößerung" Seite 19)

KAPITEL 21

Referenz

23.1 Dialogfeld "Neue Situationseinstellung"

Menü: Datei > Neu > Situationseinstellungen

Sie können eine Situationseinstellung erstellen oder aus den bestehenden eine auswählen, indem Sie die Option im Dialogfeld "Neue Situationseinstellungen" auswählen.

Optionen:

- Auswahlschalter "neue Situation erstellen".
 Sie können eine neue Situationseinstellung erstellen, indem Sie diesen Auswahlschalter auswählen und dann die Schaltfläche "OK" bestätigen. Das bringt Sie zum nächsten Schritt in der Erstellung. Um einen Überblick über alle Schritte der Erstellung zu erhalten, beachten Sie das Thema "Create Situation Settings".
- Auswahlschalter "eine bestehende Situationseinstellung verwenden".
 Sie können eine andere Situation auswählen, indem Sie diese Option anwählen und eine verfügbare aus der Liste auswählen. Beachten Sie, dass diese Liste nur die Situationseinstellungen anzeigt, die in der aktuellen Anwendungsdatei vorhanden sind.

23.2 Dialogfeld "Neue Situationseinstellung"

Menü: Datei > Neu > Situationseinstellungen

Sie können eine neue oder eine bestehende Anwendungseinstellungsdatei auswählen oder erstellen, indem Sie die entsprechende Option im Dialogfeld Anwendungseinstellungen auswählen.

Optionen:

- Auswahlschalter "Erstellen einer neuen Einstellungsdatei"
 Sie können eine neue Einstellungsdatei erstellen, indem Sie den Auswahlschalter aktivieren und dann die Schaltfläche "OK" bestätigen. Nach dem Anwählen der Schaltfläche "OK" gehen Sie zum nächsten Erstellungsschritt. Um einen Überblick über alle Schritte der Erstellung zu erhalten, beachten Sie auch das Thema "Create Application Settings".
- Auswahlschalter "Eine bestehende Einstellungsdatei verwenden".
 Sie können verschiedene Einstellungsdateien ändern, indem Sie diese Option anwählen und dann eine entsprechende Datei aus der Liste auswählen. Sie bestätigen Ihre Auswahl durch das Anklicken der Schaltfläche "OK". Diese Einstellung tritt sofort in Kraft, es sei denn, Sie aktivieren die Option "Use Default Settings in the control panel".
 Wenn Sie diese Option auswählen, dann werden die neuen Einstellungen aktiv, sobald Sie zu Ihrer Anwendung zurückkehren.

23.3 Neue Darstellung Dialogfeld

Menü: Datei > Neu > Darstellung

Sie können eine neue oder eine bestehende MAP-Datei auswählen oder erstellen, indem Sie die entsprechende Option im Dialogfeld "Neue MAP-Datei" auswählen.

Optionen:

Auswahlschalter "Erstellen einer neuen MAP-Datei"
 Sie können eine neue MAP-Datei erstellen, indem Sie diesen
 Auswahlschalter auswählen und dann die Schaltfläche "OK"
 bestätigen. Das bringt Sie zum nächsten Schritt in der Erstellung. Um
 einen Überblick über alle Schritte der Erstellung zu erhalten, lesen Sie
 bitte das "Maps Handbuch". Dieses ist im Menü "Hilfe" von
 SuperNova verfügbar.

 Auswahlschalter "Eine bestehende MAP-Datei verwenden".
 Sie können eine andere MAP-Datei auswählen, indem Sie die entsprechende Option auswählen und eine Datei aus der verfügbaren Liste auswählen. Um mehr über die Gründe zu erfahren, warum man eine MAP-Datei kann, lesen Sie bitte das Thema "MAP-Datei ändern".

23.4 Neues Script Menü Item

Menü: Datei > Neu > Script

Sie können eine neue Scriptdatei für Ihre aktive Anwendung erstellen, indem Sie die entsprechende Option aus dem Menü auswählen. Die neue Scriptdatei öffnet sich im Dolphin Script Editor. Der Dolphin Script Editor enthält ein Menü "Hilfe", in welchem auf das Script Handbuch verwiesen wird.

Anmerkung: Sollte eine Scriptdatei für diese Anwendung existieren, so wird diese Funktion nicht verfügbar sein. Um eine bestehende Scriptdatei anzusehen oder zu verändern, aktivieren Sie das Menü "Datei", das Untermenü "Bearbeiten" und wählen Sie "Script" aus.

23.5 Dialogfeld "Situationsverwaltung"

Menü: Datei > Bearbeiten > Situationseinstellungen

Sie können die Eigenschaften Ihrer Situationseinstellung ändern oder löschen, indem Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld "Situationsverwaltung" anwählen. Beachten Sie, dass Sie die Anwendungseinstellungsdatei, welche die Situationseinstellungen beinhaltet, verwenden müssen, um die Situation in dieser Datei verändern zu können.

 Liste der Situationseinstellungen.
 Sie k\u00f6nnen die Situation, welche Sie editieren oder l\u00f6schen wollen, aus der Liste ausw\u00e4hlen.

- Schaltfläche "Regel bearbeiten".
 Sie können die Regeln einer Situation bearbeiten, indem Sie diese Schaltfläche aktivieren. Das wird das Dialogfeld "Regel für die Situation definieren" öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie den Namen der Situation ändern, den Titel und die Details der Situationsregeln und Situationsregeln hinzufügen oder entfernen
- Entfernen Schaltfläche.
 Mit dem Anwählen dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle
 Situation aus Ihrer Anwendungseinstellungsdatei entfernen. Nachdem
 Sie diese Schaltfläche angewählt haben, erhalten Sie eine Warnung,
 in welcher Sie gefragt werden, ob Sie diese Änderung bestätigen und
 fortfahren wollen. Um fortzufahren, drücken Sie die Schaltfläche "Ja"
 oder um abzubrechen drücken Sie die Schaltfläche "Nein".

23.6 Dialogfeld Anwendungseinstellungen

Menü: Datei > Bearbeiten> Anwendungseinstellungen

Sie können die Eigenschaften Ihrer Anwendungseinstellungsdatei ändern oder löschen, indem Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld "Einstellungsdatei Verwaltung" anwählen.

- Liste der Anwendungseinstellungedateien.
 Sie können die Anwendungseinstellungsdatei aus dieser Liste bearbeiten entfernen. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungsdatei "Default Application" nicht löschen können, weil diese ein SuperNova Systemdatei ist.
- Schaltfläche Eigenschaften.
 Sie können die Eigenschaften Ihrer Anwendungseinstellungsdatei bearbeiten, indem Sie diese Schaltfläche anwählen. Dies öffnet das Dialogfeld "Eigenschaften der Einstellungsdatei". In diesem Dialogfeld können Sie den Namen, die Versionsnummer und die Einstellungsdateien verändern und jede dazugehörige Anwendung hinzufügen oder entfernen.

 Schaltfläche "Einstellungsdatei löschen".
 Mit dem Anwählen dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle Anwendungseinstellungsdatei entfernen. Nachdem Sie diese Schaltfläche angewählt haben, erhalten Sie eine Warnung, in welcher Sie gefragt werden, ob Sie diese Änderung bestätigen und fortfahren wollen. Um fortzufahren, drücken Sie die Schaltfläche "Ja" oder um abzubrechen drücken Sie die Schaltfläche "Nein".

23.7 Dialogfeld MAP-Datei bearbeiten

Menü: Datei > Bearbeiten> MAP

Sie können die Eigenschaften und Regeln einer MAP-Datei bearbeiten, indem Sie den entsprechenden Menüeintrag auswählen. Um mehr über die MAP-Dateien zu erfahren, lesen Sie bitte das Map-Handbuch, das Sie im Menü "Hilfe" der SuperNova Systemsteuerung finden.

Dieses Dialogfeld enthält ebenfalls Optionen zum Script. Sie können Scriptdateien und erweiterte Scriptdateien erstellen, laden, editieren oder entfernen. Um mehr über Scriptdateien zu erfahren, lesen Sie bitte das Script Handbuch. Sie finden das Script Handbuch im Hilfemenü der Systemsteuerung von SuperNova.

23.8 Menüeintrag "Script bearbeiten"

Menü: Datei > Bearbeiten > Script

Sie können die Scriptdatei für Ihre aktive Anwendung bearbeiten, indem Sie die entsprechende Option aus Ihrer Menüleiste anwählen. Die neue Scriptdatei öffnet sich im Dolphin Script Editor. Der Dolphin Script Editor enthält ein Menü "Hilfe", in welchem auf das Script Handbuch verwiesen wird.

Anmerkung: Sollte eine Scriptdatei für diese Anwendung existieren, so wird diese Funktion nicht verfügbar sein. Um eine neue

Scriptdatei zu erstellen, aktivieren Sie das Menü "Datei", "Neu", und wählen Sie im Untermenü "Script" aus.

23.9 Visuelle Konfiguration - Dialogfeld "Farbeinstellungen"

Menu: Visuell > Farbschemata > Einstellungen.

Sie können ein eigenes Farbschema verwenden, indem Sie die Optionen des Dialogfeldes "Farbeinstellungen" verwenden.

Anmerkung: Um dieses Dialogfeld zu öffnen, müssen Sie "Benutzerdefiniert" als Ihr aktives Farbschema auswählen und dann "Bearbeiten" aus der Liste der Farbschemata auswählen.

Sie können ein eigenes Schema erstellen, wenn Sie eine der folgenden Optionen verwenden:

- Klassisch
- Tönung
- Doppel Tönung
- Dreifach Tönung
- Vierfach Tönung
- Farbersetzung

Die angezeigten Steuerelemente in diesem Dialogfeld hängen von ihrer Auswahl ab.

23.9.1 Optionen für Farbschema "Klassisch".

Kontrollfeld "Helligkeit invertieren".
 Diese Option invertiert die Helligkeit des Bildschirms, indem der

typische dunkel-nach-hell Bildschirm in einen hell-nach-dunkel Bildschirm gewechselt wird. Diese Einstellung hat keinen Effekt auf die verwendeten Bildschirmfarben

Kontrast Schieberegler.

Der "Kontrast" Schieberegler bestimmt die Farbdarstellung. Helle Farben werden heller und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Kontrasteinstellung an ihrem Fernseher.

Helligkeit Schieberegler

Der Helligkeit Schieberegler kontrolliert wie hell die Farben auf dem Bildschirm erscheinen. Helle Farben werden leuchtender und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Helligkeitseinstellung an ihrem Fernseher.

Schieberegler Luminanz

Die Luminanzgrenze ist die Position in der im Farbspektrum, an der zwischen hellen und dunklen Farben unterschieden wird. Wenn Sie den Regler nach links bewegen werden mehr Farben in das hellere Spektrum verschoben. Diese Einstellung beeinträchtigt die Werte für Kontrast und Helligkeit.

• Schieberegler Farbanpassung.

Der Schieberegler Farbe erlaubt grundsätzliche Änderungen an den Bildschirmfarben mit Ausnahme von schwarz und weiß Nutzen Sie die Farbpalette um Änderungen zu verfolgen, die sie mit dem Schieberegler vornehmen. Die Position 0 % am Schieberegler bedeutet, dass keine Farbänderung stattfindet.

• Schieberegler Farben.

Der Schieberegler "Farbe" erlaubt die Einstellung wie viele Farben auf dem Bildschirm verwendet werden. Mit der Änderung dieses Wertes werden die Farben blasser oder intensiver angezeigt. Nutzen Sie die Farbpalette um Änderungen zu verfolgen, die sie mit dem Schieberegler vornehmen. Die Position 50 % am Schieberegler bedeutet, dass keine Farbänderung stattfindet.

 Kontrollfeld "Vorschau auf die Farbeinstellungen"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Veränderungen durch Ihre Einstellungen sehen wollen.

23.9.2 Optionen zu Tönung, Doppel Tönung, Dreifach Tönung, und Vierfach Tönung:

- Kontrollfeld "Helligkeit invertieren".
 Diese Option invertiert die Helligkeit des Bildschirms, indem der typische dunkel-nach-hell Bildschirm in einen hell-nach-dunkel Bildschirm gewechselt wird. Diese Einstellung hat keinen Effekt auf die verwendeten Bildschirmfarben
- Kontrast Schieberegler.
 Der "Kontrast" Schieberegler bestimmt die Farbdarstellung. Helle Farben werden heller und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Kontrasteinstellung an ihrem Fernseher.
- Helligkeit Schieberegler
 Der Helligkeit Schieberegler kontrolliert wie hell die Farben auf dem
 Bildschirm erscheinen. Helle Farben werden leuchtender und dunkle
 Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der
 Helligkeitseinstellung an ihrem Fernseher.
- Schieberegler Ebene.
 Der Schieberegler "Ebene" erlaubt die Regulierung der Intensität der Tönung. In der Einstellung 100%, mit dem Schieberegler ganz rechts

ersetzt die Tönungsfarbe komplett die Bildschirmfarbe. Bei einer Einstellung von 25% wird die Tönungsfarbe mit der Bildschirmfarbe in einem Verhältnis von 25:75 gemischt, wobei mehr Schatten entsteht.

- Listenfeld Tönungsfarbe
 Sie können von einer bis zu vier Tönungsfarben wählen, je nach Einstellung für Tönung, Doppel Tönung, Dreifach Tönung oder Vierfach Tönung. Die gewählte Farbe wird zur primären Farbe des Farbspektrums in Abhängigkeit der Luminanzschwelle.
- Kontrollfeld "Vorschau auf die Farbeinstellungen"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Veränderungen durch Ihre Einstellungen sehen wollen.

23.9.3 Optionen für die Farbersetzung

- Kontrollfeld "Helligkeit invertieren".
 Diese Option invertiert die Helligkeit des Bildschirms, indem der typische dunkel-nach-hell Bildschirm in einen hell-nach-dunkel Bildschirm gewechselt wird. Diese Einstellung hat keinen Effekt auf die verwendeten Bildschirmfarben
- Kontrast Schieberegler.
 Der "Kontrast" Schieberegler bestimmt die Farbdarstellung. Helle Farben werden heller und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Kontrasteinstellung an ihrem Fernseher.
- Helligkeit Schieberegler
 Der Helligkeit Schieberegler kontrolliert wie hell die Farben auf dem
 Bildschirm erscheinen. Helle Farben werden leuchtender und dunkle
 Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der
 Helligkeitseinstellung an ihrem Fernseher.
- Schieberegler Luminanz
 Die Luminanzgrenze ist die Position in der im Farbspektrum, an der zwischen hellen und dunklen Farben unterschieden wird. Wenn Sie den Regler nach links bewegen werden mehr Farben in das hellere

Spektrum verschoben. Diese Einstellung beeinträchtigt die Werte für Kontrast und Helligkeit.

- Listenfeld "von bis"
 Die Listenfelder von und bis erlauben die Ersetzung einer Farbe mit einer anderen Farbe. Nutzen Sie diese Listenfelder um eine oder mehrere Farbsetzungen einzustellen.
- Kontrollfeld "Vorschau auf die Farbeinstellungen"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Veränderungen durch Ihre Einstellungen sehen wollen.

23.10 Dialogfeld "Hervorhebung Einstellungen"

Menu: Visuell > Hervorhebung > Einstellungen

Sie können die verschiedenen Fokustypen besser erkennen, wenn Sie eine Hervorhebung dafür festlegen. Sie können den Stil, die Farbe und das Verhalten der Hervorhebungen im Dialogfeld "Hervorhebungsoptionen" auswählen.

Maus Registerkarte.

- Kontrollfeld Hervorhebung der Maus Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten
- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische

Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.

Effekte Gruppe.

Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Cursor Registerkarte.

- Kontrollfeld "Hervorhebung des Cursors".
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten
- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.
 - Effekte Gruppe.
 Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Registerkarte Zeile.

 Kontrollfeld "Zeile hervorheben"
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten

- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.
 - Effekte Gruppe.
 Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Registerkarte Fokus.

Die Begriff "Fokus" bezieht sich auf den Fokus, welcher in Dialogfeldern und Menüs verwendet wird.

- Kontrollfeld "Fokushervorhebung".
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten
- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische

Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.

Effekte Gruppe.

Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Registerkarte Lesen ab hier

"Lesen ab hier" ist ein Lesemodus von SuperNova. Sie können die Hervorhebung für das aktuelle Wort und die aktuelle Zeile ändern.

- Gruppe "Wort"
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Wort hervorheben". Nutzen sie die zur Verfügung stehenden Einstellungen, um festzulegen, wie das gesprochene Wort hervorgehoben wird.
- Gruppe "Zeile"
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Zeile hervorheben". Nutzen sie die zur Verfügung stehenden Einstellungen, um festzulegen, wie die aktuelle hervorgehoben wird.

Registerkarte Dolphin Cursor

Der Dolphin Cursor ist ein spezieller Cursor der von SuperNova zur Verfügung gestellt wird. Der Dolphin Cursor erlaubt das Lesen des Bildschirms Zeilenweise, Wortweise oder Zeichenweise mit Tastenkommandos auf der Tastatur. Sie können die deutschen Cursor dazu verwenden, um jeden Teil des Computerbildschirms auszulesen.

Gruppe "aktuelles Zeichen"
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Zeichen hervorheben". Nutzen sie die zur Verfügung stehenden Einstellungen, um festzulegen, wie das aktuelle Zeichen hervorgehoben werden soll.

Gruppe "aktuelle Zeile/Objekt"
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Zeile hervorheben". Nutzen sie die zur Verfügung stehenden Einstellungen, um festzulegen, wie die gesprochene Zeile beziehungsweise das aktuelle Objekt hervorgehoben wird.

23.11 Dialogfeld "Mauszeiger"

Menü: Visuell > Mauszeiger

Mit SuperNova sind Mauszeiger verfügbar, die größer und leichter zu sehen sind, als der übliche Windows Mauszeiger. Die Zeiger sind in einer Vielzahl von verschiedenen Farben und größen Verfügbar.

Optionen:

- Liste der Schemata.
 Sie können ein bestehendes Schema für den Mauszeiger aus der Liste wählen. Sollte kein existierendes Schema passend erscheinen, verwenden Sie andere Optionen, um ein neues Schema zu erstellen oder ein Bestehendes zu modifizieren.
- Liste der Typen und Zeigerbilder
 Die Liste "Type" zeigt die verschiedenen Windows Mauszeiger und
 die Liste "Zeigerbild" zeigt die verschiedenen Bilder, die Sie dem
 ausgwählten Zeiger zuordnen können. Um einen Mauszeiger zu
 wechseln, wählen Sie die Art des Zeigers und wählen Sie dann einen
 Mauszeiger aus den angebotenen Bildern aus.
- Schaltfläche "Neu".
 Drücken Sie die Schaltfläche "Neu", um das Dialogfeld "Neues Schema erstellen" zu öffnen. In diesem Dialogfeld geben Sie einen neuen Namen für das Schema ein. Der Name des neuen Schemas taucht in der Liste "Schema" auf.

Entfernen Schaltfläche.

Falls Sie ein neues Schema erstellt haben, wählen Sie diese Schaltfläche an, um dieses wieder zu löschen. Ein Nachrichtenfeld wird geöffnet und fragt, ob Sie mit dem Löschen fortfahren wollen. Wählen Sie "Ja", um das Schema zu löschen oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen.

- Gruppe "Benutzerdefinierte Zeigergröße."
 Die Einstellungen in dieser Gruppe erlauben Ihnen, die Größe des Mauszeiges im aktuellen Schema einzustellen, basierend auf der ursprünglichen Größe.
- Verwenden das Kontrollfeld "Nutze benutzerdefinierte Zeigergröße". Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, wird der Wert aus der Liste "Größe" auf alle in der Liste erscheinenden Mauszeiger im aktuellen Schema angewendet.
- Liste Größe.
 - Die Liste "Größe" enthält eine Vielzahl von Werten, die Sie im aktuellen Schema verwenden können. Sie können eine festgesetzte Größe einstellen, zum Beispiel 8, welche die Größe des Zeigers 8 mal um seine ursprüngliche Größe vergrößern wird. Wenn eine festgesetzte Größe ausgewählt wird, bleibt der Mauszeiger in dieser bestehen, unabhängig von der von Ihnen eingestellen Vergrößerung. Alternativ können Sie einen relativen Vergrößerungswert einstellen, zum Beispiel 150%. Mit einem relativen Wert verändert sich die Größe des Mauszeigers entsprechend Ihren Vergrößerungseinstellungen. In höheren Vergrößerungsstufen kommt es vor,dass der Zeiger zu große Teile des Bildschirms belegt, so dass es besser ist, wenn Sie einen kleineren Wert als den Ursprünglichen einstellen.
- Verwenden Sie das Kontrllfeld "Nutze benutzerdefinierte Zeigergröße nur in vergrößeren Bereichen".
 Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, ist der angepasste Mauszeiger

nur in vergrößerten Bereichen sichtbar. Die Vergrößerung des Mauszeigers ist nicht aktiv, wenn Sie die Vergrößerung abschalten oder unvergrößerte Bereiche bearbeiten, wie den geteilten Bildschirm.

23.12 Dialogfeld "Dokument Leser Einstellungen"

Menu: Visuell > Dokument Leser Einstellungen

Die Optionen, die im Dialogfeld "Dokument Leser Einstellungen" erscheinen, kontrollieren Ihr Leseumfeld des Dokument Lesers. Sie können dieses Dialogfeld öffnen, indem Sie das Menü "Visuell" wählen oder indem Sie die Schaltfläche "Einstellungen" in der Dokument Leser Werkzeugleiste aktivieren.

Optionen:

- Schriftart Einstellungen.
 Im Dokument Leser k\u00f6nnen Sie die Schriftart ausw\u00e4hlen, in welcher der Text im Dokumentenfenster erscheint. Sie k\u00f6nnen ebenso die Schriftgr\u00f6\u00dfe bestimmen.
- Farbeinstellungen.
 Sie können die Farben, welche Sie in den Dokumenten verwenden wollen, einstellen. Es gibt drei Kategorien, in denen Sie sowohl Vordergrund- als auch Hintergrundfarben einstellen können.
- Dokumentenfarben legen die Vorder- und Hintergrundfarben fest, die in Dokumentenfenstern verwendet werden. Wenn "Benutze Dokument Farben" ausgewählt ist, dann steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.
- Wort Hervorhebungsfarben setzen die Vorder- und Hintergrundfarben, welche vom Dokument Leser im aktuellen Fokus verwendet werden. Dies zeigt das aktuell angewählte Wort, während der Dokument Leser das Dokument liest. Wenn "Benutze Dokument Farben" ausgewählt ist, dann steht diese Einstellung nicht zur Verfügung. Anstatt der Hervorhebung wird die aktuelle Farbeinstellung invertiert.

- Hervorhebungen für Einheiten setzen die Hinter- und Vordergrundfarben für eine definierte Bewegungseinheit. Damit ist die Größe der Hervorhebung gemeint, die angezeigt wird, während der Cursor durch das Dokument navigiert.
 - Kontrollfeld "Ganzes Dokument laden". Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um das ganze Dokument in den Dokument Leser zu laden. Abhängig von der Größe des Dokumentes kann dies einige Augenblicke in Anspruch nehmen. Diese Option wird nur von Anwendungen unterstützt, welche auch DOM fähig sind, wie zum Beispiel Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, NotePad, WordPad, etc. Es ist ebenso möglich, eine Anzahl Zeilen, die im Dokument Leser geladen werden sollen auszuwählen, indem Sie die das Kontrollfeld "Ganzes Dokument laden" abwählen und die Anzahl der Zeilen, die Sie übertragen wollen, vorgeben. Dies erlaubt es Ihnen, einen Abschnitt des Dokumentes schneller zu laden. Wenn Sie mit Anwendungen arbeiten, die nicht DOM unterstützt sind, wird der Dokument Leser den Inhalt aus dem aktuellen Bildschirm laden.
 - Kontrollfeld "Wort invertieren".
 Mit der Auswahl des Kontrollfelds"Wort invertieren" wird die Hervorhebung des Fokus als invertierte Hervorhebung auf den festgelegten Dokumentfarben basierend dargestellt. Abhängig von der Einstellung können dies auch die aktuellen Dokumentenfarben sein.
 - Kontrollfeld "Dokument Leser Sprache".
 Mit dieser gewählten Option wird das Dokument mit Ihrer gewählten "Lesen ab hier Stimme" gelesen, welche Sie im Dialogfeld "Stimme und Sprache" eingestellt haben. Sie können die Sprachausgabe in dem Dokumentenfenster abschalten, indem Sie das entsprechende Kontrollfeld abwählen.
 - Kontrollfeld "Benutze Dokument Farben".
 Die Auswahl dieses Kontrollfelds bedeutet, dass der Dokument Leser die spezifischen Farben des Dokumentes verwendet, anstatt der benutzerdefinierten Farben des Dokuments.

- Kontrollfeld "Benutze Dokument Stile".
 Diese Option bewirkt, dass die Formate des Dokumentes im Dokument Leser angezeigt werden.
- Zeilenumbruch bei. Liste.

Die Option "Zeilenumbruch bei" kann verwendet werden, um einen Zeilenumbruch auszuführen, falls die Zeile eine bestimmte Länge überschreitet. Das kann nützlich werden, wenn Zeilen aus dem aktuellen Fenster hinauslaufen.

Um diese Option zu deaktivieren, setzen Sie den Wert für "Zeilenumbruch bei" auf 0.

23.13 Dialogfeld Connect and View Einstellungen

Menü: Visuell > Connect and View > Einstellungen

Das Dialogfeld "Connect and View" enthält Optionen, mit denen sie einstellen können wie SuperNova mit einer Kamera oder einem Whiteboard agieren soll.

Registerkarte Kameras

- Geräte Liste und Steuerelemente Verwenden Sie diese Liste, um eine Kamera auszuwählen, die sie mit SuperNova verwenden wollen. Schalten Sie diese Einstellung ab, um zu verhindern dass die Kamera ausgewählt, wird wenn sie zwischen den Geräten wechseln. Verwenden Sie die Schaltfläche Einstellungen um die Performance der Kamera zu optimieren. Diese Einstellung ist bei verschiedenen Kameramodellen unterschiedlich. Die Folgenden Optionen sind verfügbar:
- Liste der Auflösungen
 Hier werden verfügbare Auflösungen für ihre verbundene Kamera aufgelistet Erhöhen der Auflösung sollte die Qualität des Bildes im Betrachter erhöhen
- Liste der Frame Rate.
 Die Angabe erfolgt in Frames per Second (FPS). Je h\u00f6her die Angabe

ist, desto häufiger wird das Bild gewechselt und desto sauberer erscheint es. Bei geringer Rate wird auch die Bewegungserkennung minimiert, was beim Lesen Dokumentes bessere Ergebnisse erzielen kann.

- Liste von Frequenzen (Flicker) Die Frequenz von 50 Hz wird in Europa und England verwendet, 60 Hz muss für Amerika und Japan ausgewählt werden. Die Auswahl der korrekten Frequenz wird ein Flackern, dass durch unterschiedliche Einstellungen zwischen Kamerabild und Beleuchtung entsteht, verhindern.
- Kontrollfeld Autofokus.
 Wenn die Autofokus Funktion zu oft reguliert, können Sie diese Funktion abschalten. Beachten Sie, dass nicht alle Kameras die Autofokus Funktion unterstützen. Das Kontrollfeld Autofokus ist in SuperNova nur verfügbar, wenn die Kamera diese Funktion unterstützt.
 - Liste der Farbschemata.
 Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie dem Kamera Betrachter ein Standard Farb-Schema zuweisen. Zus\u00e4tzliche Einstellungen des Farb-Schemas sind im Kamera Betrachter verf\u00fcgbar.
 - Benutzen Sie das Kamera Zoom Kontrollfeld Nutzen Sie diese Einstellung, um den optischen Hardware Zoom für unterstützte Kameras zu aktivieren, eher als den digitalen Zoom. Dies resultiert in einem verbesserten, vergrößerten Bild.
 - Benutzen Sie das Farbwechsler Kontrollfeld.
 Nutzen Sie diese Einstellung, um die Hardware Farbänderungsoption für unterstützte Kameras zu aktivieren, eher als die Software Farbänderung.

Register Whiteboards

 Liste der Geräte und Steuerung Nutzen Sie diese Liste, um ein Profil zu erstellen, zu ändern oder zu löschen Setzen sie den Wert auf "Aus" wenn sie den Wechsel zu einem Whiteboard Gerät verhindern möchten. Aktivieren Sie den Schalter "Neu" um ein Profil zu erstellen. Betätigen Sie den Schalter "Einstellungen", um ein Profil zu verändern. Die folgenden, zusätzlichen Optionen sind verfügbar, wenn Sie ein Profil erstellen oder ändern.

Eingabefeld Profil

Geben sie hier einen aussagekräftigen Namen für das Gerät ein. Sie können das Gerät nach einem Klassenraum, Lehrer oder Trainer benennen um eine spätere Auswahl zu vereinfachen. Beachten Sie, dass einige Optionen in diesem Dialog Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator erfordern könnten.

Computername Eingabefeld

Geben Sie hier den Namen des Host Computers so ein, wie er im Netzwerk erscheint. Alternativ können Sie die IP-Adresse des Computers angeben. In den meisten Netzwerken wird der Name des Computers allerdings automatisch ermittelt.

Port Eingabefeld

Der Standard Port für Virtual Network Computing (VNC) ist 5900. Ändern Sie diese Einstellung nur auf Anweisung ihres Netzwerkadministrators.

Passwort Eingabefeld.

Geben sie hier das Passwort zur Verbindung mit dem Host Computer ein. Die Vergabe eines Passwortes ist optional und wird in der VNC Software eingestellt. Diese Informationen erhalten sie von ihrem Netzwerk Administrator

Auswahlschalter "Verbindungstypen" Wählen sie die Einstellung, die ihrer Network Verbindungsart entspricht. Sie können zwischen einem kabelgebundenen und einer kabellosen Verbindung wählen.

Liste der Protokolle.

VNC unterstützt einige verschiedene Remote Frame Buffer (RFB) Protokolle. Ändern Sie diese Einstellung nur auf Anweisung ihres Netzwerkadministrators.

Kontrollfeld "Zeige Maus" Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob der Mauszeiger des Host Computers im Betrachter angezeigt wird. Diese Funktion zeigt

ihnen die Position des Mauszeigers am Bildschirm Wenn sie den Mauszeiger als störend empfinden, können Sie diese Funktion deaktivieren.

Zusätzliche Funktionen der "Connect and View" Einstellungen wirken sich auf die gesamte Interaktion mit dem Whiteboard, unabhängig vom gewählten Gerät, aus.

- Liste der Farbschemata.
 Benutzen sie diese Funktion, um ein Standard Farbschema für den Whiteboard-Betrachter zu wählen Im Betrachter sind zusätzliche Optionen des Farbschemas verfügbar.
- Kontrollfeld Position in der Präsentation verfolgen.
 Verwenden Sie diese Option, um die Verfolgung des Fokus auf dem verbundenen Computer zu aktivieren. Mit der Deaktivierung diese Option können Sie die Bewegung über das Fenster selbst kontrollieren. Sie können sich im Fenster bewegen, indem Sie den Mauszeiger verwenden oder den Ausschnitt mit der Tastatur bewegen.

23.14 Dialogfeld "Visuell Mehrere Bildschirme"

Menu: Visuell > Mehrere Bildschirme

Die Einstellungen zu mehreren Bildschirmen wählen Sie im Dialogfeld "Mehrere Bildschirme" aus.

Um mehrere Bildschirme gleichzeitig zu verwenden, benötigt SuperNova eine Graphikkarte, die AGP/PCI oder PCIe unterstützt. USB Grafikkartenadapter werden nicht unterstützt.

Optionen:

Gruppenfeld "Displaymodus für erweiterten Desktop".
 Sie können die Optionen dieser Gruppe verwenden, um die

geeignetsten Einstellungen zu wählen, die einen erweiterten Desktop mit zusätzlichen Monitoren verwenden.

- Auswahlschalter "Erweitern".
 Sie können diese Option auswählen, wenn Sie zwei Monitore als einen Großen verwenden wollen. In diesem Szenario gibt es einen einzigen Desktop über zwei Monitore.
- Auswahlschalter "Nebeneinander"
 Sie können diesen Modus verwenden, um verschiedene Anwendungen auf verschiedenen Monitoren anzuzeigen. Wenn Sie mit mehreren Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen nebeneinander arbeiten, dann können folgende Tastenkommandos nützlich sein:

Funktion	Taste	
Ziehen Sie den Mauszeiger zur	FESTSTELLTASTE +	
Mitte des nächsten Bildschirms	MITTLERE	
	MAUSTASTE	
Anwendung zum rechten	WINDOWS +	
Bildschirm bewegen	UMSCHALT + PFEIL	
	RECHTS	
Anwendung zum linken	WINDOWS +	
Bildschirm bewegen	UMSCHALT + PFEIL	
	LINKS	

Kontrollfeld Präsentationsmodus.

Sie verwenden diese Option, um einen Bildschirm dazu zu verwenden, ein vergrößertes Bild anzuzeigen, während alle anderen Bildschirme das Bild unvergrößert zeigen. Zum Beispiel können Sie auf einem vergrößerten Bildschirm arbeiten, während die Zuhörer die Präsentation unvergrößert auf einem zweiten Bildschirm verfolgen können.

 Kontrollfeld "Mauspuffer".
 Mit dieser Option k\u00f6nnen Sie verhindern, dass sich der Mauszeiger versehentlich auf einen anderen Bildschirm bewegt, wenn Sie einen erweiterten Desktop verwenden. Diesen Effekt erreichen Sie, indem Sie einen Widerstand am Rand des Bildschirms definieren, über den die Maus nur mit einer zusätzlichen Bewegung hinaus bewegt werden kann. Sie können die Stärke des Widerstandes mit dem Schieberegler "Übergang" anpassen.

- Schieberegler "Übergang".
 Sie können die Mausempfindlichkeit mit diesem Schieberegler steuern. Je höher das Level, desto größer ist der Widerstand der Maus, was bedeutet, dass Sie die Maus länger gegen den Rand des Bildschirms bewegen müssen, um den Bildschirm zu wechseln.
- Liste der Tastenkommandos "Bildschirm wechseln".
 Wenn Sie mit der Einstellung "Applikationen nebeneinander" auf einem erweiterten Desktop arbeiten, dann kann es vorkommen, dass Sie den Mauszeiger schnell von einem Bildschirm zum anderen bewegen wollen, ohne die Vergrößerung von dem Bereich des Desktops zu nehmen, den Sie gerade betrachtet haben. Um dies zu tun, können Sie das Tastenkommando "Bildschirm wechseln" verwenden. Das voreingestellte Tastenkommando, um zwischen Bildschirmen hin- und herzuwechseln ist FESTSTELLTASTE + MITTLERE MAUSTASTE.
- Schaltflächen Taste hinzufügen, Taste ersetzen and Taste löschen.
 Sie können diese Schaltflächen verwenden, um die Tastenkommandos zum Wechseln des Bildschirms zu verändern.
- Kontrollfeld "Verschiedene Vergrößerungsstufen auf jedem Bildschirm erlauben".
 - Die Einstellung erlaubt die Nutzung unterschiedlicher Vergrößerungsstufen auf angeschlossenen Bildschirmen. Die ist z.B. hilfreich, wenn zwei Bildschirme unterschiedlicher Größe angeschlossen sind und auf dem kleineren eine zusätzliche Vergrößerung erforderlich wird. Ebenso kann es nützlich sein, wenn Applikationen mit unterschiedlichen Schriftgrößen angezeigt werden.
- Kontrollfeld "Unabhängige Farben".
 Die Einstellung erlaubt die Nutzung unterschiedlicher Farbschemata auf angeschlossenen Bildschirmen. Die ist z.B. hilfreich, wenn

Applikationen verwendet werden, die unterschiedlichen Farbeinstellungen für eine angenehmere Sicht erfordern.

Wenn Sie die Vergrößerung und die Farben in SuperNova unabhängig nutzen, wird in der Systemsteuerung von SuperNova die korrespondierende Nummer des Bildschirms zusätzlich im Register "Visuell" unterhalb der Einstellung zur Vergrößerung angezeigt.

(Vergessen Sie nicht, dass alle Einstellungen für SuperNova auch Applikationsabhängig vorgenommen werden können.)

23.15 Vergrößerung - Erweiterte Optionen - Dialogfeld

Menü: Visuell > Erweiterte Optionen

In den erweiterten Optionen für die Vergrößerung sind diverse Einstellungen für SuperNova möglich.

Registerkarte Allgemeine Einstellungen

Gruppe "Fokus Hervorhebung"
Die visuellen Fokushervorhebungen können in unterschiedlicher Art
und Weise genutzt werden. Die Hervorhebung kann z.B. nur dann
angezeigt werden, wenn das entsprechende Tastenkommando
verwendet wird. Die Auswirkung auf die Anzeige der Hervorhebung
können Sie in der Ausklappliste "Zeige Hervorhebung" genauer
bestimmen. Wählen Sie "Bis zur erneuten Eingabe des
Tastenkommandos" oder "bis Taste losgelassen wird".

- Gruppe "Teilvergrößerung"
 Das Kontrollfeld "Teilvergrößerung erlauben" erlaubt die Einstellung des Vergrößerungsfaktors mit Zwischengrößen. Wenn Sie das Kontrollfeld deaktivieren, wird zunächst keine Änderung eintreten. Erst beim Verändern der Größe wird die Vergrößerung auf den entsprechend nächsten linearen Wert umschalten.

 Für die aktive Teilvergrößerung stehen zusätzliche Optionen, z.B. zum Verbessern der Geschwindigkeit, zur Verfügung.
- Gruppe "Modus Überblick"
 Hier finden Sie Vorgaben zur Darstellung des Vergrößerungsfensters
 im Modus Überblick. Das Fenster oder der Hintergrund kann invertiert
 angezeigt werden. Außerdem können Sie für das Tastenkommando
 bestimmen, ob der Überblickmodus bis zum erneuten Drücken des
 Kommandos aktiv bleiben soll oder nur so lange, wie die
 Tastenkombination gedrückt wird.
- Schaltfläche "Video Kompatibilität"
 Mit Aktivierung dieser Schaltfläche öffnet sich ein Dialogfeld. Hier können mit einer Reihe von Kontrollfeldern die Geschwindigkeit der Vergrößerung und evtl. Darstellungsstörungen für inkompatible Bildschirmtreiber behoben werden.

Registerkarte Vergrößerung.

Kontrollfeld "Seitenverhältnis sperren".
 Falls das Kontrollfeld "Seitenverhältnis sperren" nicht angewählt ist, verwenden Sie zwei Regler, mit denen Sie die horizontale und die vertikale Vergrößerung getrennt voneinander verändern. Wenn Sie das Seitenverhältnis sperren, wird die Vergrößerung die Faktoren für die horizontale und vertikale Vergrößerung gleichmäßig einstellen.
 Beachten Sie, dass True Fonts nicht unterstützt werden, wenn Sie mit unterschiedlichen horizontalen und vertikalen Vergrößerungen arbeiten.

- Gruppe Schriftglättung.
 Die Schriftglättung verbessert die Lesbarkeit des Textes auf dem Bildschirm, wenn Sie die Vergrößerung verwenden. Enthaltene Optionen:
- Auswahlschalter "Keine".
 Wählen Sie "Keine", um die Schriftglättung zu deaktivieren.
- Auswahlschalter "Standard".
 Wählen Sie "Standard" für die Basisschriftglättung. Verwenden Sie diese Option, falls Sie Erfahrungen im Umgang mit True Fonts sammeln.
- Auswahlschalter "True Fonts".
 Wählen Sie "True Fonts" für perfekte Klarheit in allen
 Vergrößerungsstufen. Sie möchten vielleicht mit den True Fonts
 Einstellungen experimentieren, wenn Sie eine Vergrößerungsstufe von 3x oder kleiner verwenden, oder wenn Sie einen LCD Monitor verwenden.
 - Gruppe "True Fonts Einstellungen".
- Auswahlschalter "Standard".
 Die Verwendung von "Standard" zeigt den Text im Modus "nonantialiased". Das ist die übliche und schnellste Methode, gerade wenn Sie eine Vergrößerungsstufe von 4x oder größer verwenden.
- Auswahlschalter "Antialiased".
 Diese Einstellungen überträgt den Text und glättet die Kanten der Schrift. Sollten Sie zackige Effekte entdecken, während Sie True Fonts verwenden, aktivieren Sie diese Option.

Sie können zwischen "Keine", "Standard" und "True Fonts" wechseln, indem Sie ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universell
Schriftglättung	LINKE STRG + NUM 8	Keine Belegung

Beachten Sie, dass True Fonts nicht verfügbar ist, wenn Sie unterschiedliche Horizontal- und Vertikalvergrößerungen verwenden. Sie können die vertikalen und horizontalen Vergrößerungen unabhängig voneinander verändern, indem Sie das Kontrollfeld "Seitenverhältnis sperren" in dem Dialogfeld "Erweiterte Einstellungen" verändern.

Registerkarte Verfolgung

Gruppe Mausverfolgung.

In dieser Gruppe wird mit dem Kontrollfeld "Verfolge Cursor" festgelegt, ob SuperNova den Cursor verfolgen soll oder nicht. Bei der Verfolgung des Cursors wird der vergrößerte Ausschnitt innerhalb der Mausränder bewegt. Die Distanz bei der Bewegung ist im Standard ausreichend, so dass die die Mausbewegung an der Kante oder Ecke des Bildschirms endet. Um den Rand zu verändern, aktivieren Sie die Schaltfläche "Maus Rahmen". Das Dialogfeld "Mausrahmen einstellen" wird geöffnet.

Mit dem Kontrollfeld "Bewege Cursor zur Ansicht" können Sie festlegen, was passiert, wenn die Maus nicht im sichtbaren Ausschnitt erscheint Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren und den Cursor minimal bewegen, wird er in der Mitte des gerade sichtbaren Ausschnitt erscheinen. Wenn das Kontrollfeld nicht aktiviert ist, wird der vergrößerte Ausschnitt bei einer Bewegung zur Position der Maus gezogen.

Wenn das Kontrollfeld "Cursor" aktiviert ist, wird die Bewegung des Cursors durch eine unsichtbare Grenze innerhalb des aktuellen Fensters eingeschränkt. Damit wird dem Cursor eine Beschränkung auferlegt, sodass der Ausschnitt nicht die Grenzen des aktuellen Fenster verlässt. Diese Mausbeschränkung wird aufgehoben, wenn der Cursor manuell über die Grenzen des Fenster hinaus navgiert wird.

Gruppe Cursorverfolgung.

Das Kontrollfeld "Verfolge Cursor" regelt die Verfolgung der Schreibmarke in einem Eingabefeld. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, wird der vergrößerte Ausschnitt der sich bewegenden Schreibmarke folgen. Der Cursor Rahmen gibt den minimalen Abstand zwischen der Schreibmarke und dem Bildschrimrand an. Der Rand kann im Dialogfeld "Cursor Rahmen einstellen" mit der Schaltfläche "Cursor Rahmen" verändert werden.

• Gruppe Fokusverfolgung.

In dieser Gruppe können Sie festlegen, ob die Vergrößerung auch anderen Objekten folgen soll. Sie können Menüs, Steuerelemente und Fenster auswählen.

Das Kontrollfeld "Fokus zentrieren" legt fest, dass alle zu verfolgenden Elemente wie z.B. Menüs, und kleine Dialogfelder in der Mitte des vergörßerten Ausschnitts präsentiert werden. Wenn das Kontrollfeld "Fokus zentrieren" nicht aktiviert ist, wird der Ausschnitt nur minimale Bewegungen vornehmen, um das Element möglichst komplett sichbar zu halten.

Das Kontrollfeld "Sprachausgabecursor folgen" aktiviert die Verfolgung der Hervorhebung der Windows Sprachausgabe, wenn diese aktiv ist. (Benötigt Windows 10 build 17763 oder höher)

Registerkarte Laufschrift

Die Laufschrift ist ein Lesemodus von SuperNova. Die Laufschrift zeigt den sichtbaren Inhalt des Bildschirms in einer einzelnen Zeile an. Für die Laufschrift kann der Hintergrund, die Textfarbe, die Schriftgröße und die Schriftart verändert werden.

Registerkarte Fixbereiche

Die Nutzung von Fixbereichen erlaubt die permanente Anzeige bestimmter Bildschirmbereiche. Wichtige Informationen bleiben so immer im Blickfeld.

23.15.1 Registerkarte Erweiterung

Registerkarte Erweiterung

Gruppe Schriftart Erweiterung
 Das Kontrollfeld "True Fonts Fett" aktiviert True Fonts vergrößerten
 Text mit dem Attribut Fett.

Das Kontrollfeld "Standard Fett" aktiviert das Attribut Fett für vergrößerten "Nicht- True Font" Text wie z.B. Text im Windows 10 Startmenü und im Hauptbereich von Google Chrome und Mozilla Firefox.

Die Optionsschaltflächen "Wenig", "Mittel" und "Hoch" steuern die Stärke des Attributs Fett im vergrößerten Text

Gruppe Bildverbesserung

Das Kontrollfeld "Schärfen" steuert wie SuperNova vergrößerte Bilder (einschließlich Fotografien) ebenso wie Nicht- True Font Texte verbessert.

Wenn das Kontrollfeld "Schärfen" aktiviert ist, wird SuperNova vergrößerte Bilder und Nicht- True Font Texte schärfen, indem es die Helligkeitsunterschiede an den Kanten verstärkt, damit diese besser zur Geltung kommen. Der Prozess des Schärfens arbeitet mit einer Maske, wobei eine reduzierte Version des Bildschirminhalts genutzt wird, um Kanten zu identifizeren. Mit dieser Maske wird der Kontrast an den erkannten Kanten erhöht, um ein schärferes Bild zu erhalten. Der Schieberegler "Kontrast" steuert die minimale Helligkeit der Schärfe.. Dies kann genutzt werden, um stumpfe Kanten zu schärfen, während feinere Kanten unbehandelt bleiben. Dies ist hilfreich Rauschminderung in der Schärfe zu vermeiden Der Schieberegler "Größe" steuert die Größe der Kanten, die Sie verbessern möchten, wohingegen eine kleinere Größe kleinere Details verbessern. In der Regel werden Sie eine Größe wählen, die mit dem kleinsten Detail in Ihrem Bild übereinstimmt. Der Schlüssel zu

effektivem Schärfen liegt in den korrekten Einstellungen, um Kanten

ausreichend zu betonen. während übertriebene Schärfe minimiert wird.

Anmerkung: Die Standardeinstellungen für Fettdruck und Schärfe sind in Windows 7 nicht verfügbar.

23.16 Sprache - Stimmeneinstellungen - Dialogfeld

Menü: Sprache > Stimmeneinstellungen

Im Dialogfeld "Stimmeneinstellungen" können verschiedene Vorgaben zur Sprachausgabe geändert werden.

Registerkarte "Allgemeine Einstellungen".

- Drehfeld "Lautstärke".
 Verwenden Sie den Drehfeld "Lautstärke", um die Lautstärke der Stimmen zu regeln. Dieser Wert ist unabhängig von der computereigenen Lautstärkeregelung.
- Drehregler "Geschwindigkeit".
 Verwenden Sie das Drehfeld "Geschwindigkeit", um die Geschwindigkeit, mit der die Stimme liest, zu regeln.
- Drehfeld "Geschwindigkeit"
 Verwenden Sie das Drehfeld "Buchstabiergeschwindigkeit", um die
 Geschwindigkeit zu regeln, mit der der buchstabiert werden soll. Sie
 möchten vielleicht die Geschwindigkeit geringer als die normale
 Lesegeschwindigkeit einstellen, um die eingegebenen Wörter leichter
 zu verstehen.

Kontrollfeld "Tonhöhe für gesprochene Großbuchstaben erhöhen"
Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um einen Großbuchstaben beim
Lesen mit anderer Tonhöhe zu hören. Diese Einstellung wird aktiv,
wenn z.B. das Tastenecho aktiv ist, um jeden Buchstaben, den Sie
eingeben zu sprechen oder wenn Sie durch einen Text scrollen oder
wenn Sie einen Buchstaben löschen. Beachten Sie, dass diese
Option nicht verfügbar sein wird, wenn Ihr aktueller Synthesizer diese
Einstellung nicht unterstützt.

Registerkarte Konfiguration des Synthesizers

- Schaltfläche "Synthesizer wählen"
 Aktivieren Sie die Schaltfläche, um das Dialogfeld "Synthesizer wählen" zu öffnen. Die von SuperNova gefundenen Synthesizer werden einer Liste zur Auswahl angezeigt. Wenn der einzige Eintrag in der Liste "keine Sprachausgabe" lautet, sind keine weiteren Sprachausgaben konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass der Synthesizer korrekt konfiguriert und von Dolphin SAM korrekt erkannt wurde. Die SAM Konfiguration finden Sie im Menü "Allgemein", "Erweiterte Optionen".
- Schaltfläche "Einstellungen"
 Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld für die Treiberkonfiguration des aktuellen Synthesizers geöffnet.
- Listenfeld "Konfiguration der Landessprache" und Schaltfläche
 "Sprache"
 Nicht alle Synthesizer sind in der Lage Informationen über verfügbare
 Sprachen auszugeben. Wenn SuperNova diese Informationen erhält,
 können Sie die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten nutzen.
 Wenn SuperNova die entsprechende Sprache erkennt, sind diese
 Optionen nicht verfügbar.

Registerkarte "Konfiguration der Stimme und Landessprache"

Die Registerkarte "Stimme" und "Landessprache" stellt verschiedene Stimmen für unterschiedliche Sprachumgebungen zur Verfügung. Eine Sprachumgebung ist ein spezielles Attribut des gesprochenen Textes, in dem festgelegt ist, woher es stammt oder in welchem SuperNova Modus gearbeitet wird.

Es ist sinnvoll, mehrere Stimmen für die verschiedenen Sprachumgebungen zu nutzen. Hier wird angezeigt, welche Funktion oder Steuerelement Sie gerade benutzen.

Die Stimmeinstellung, die Sie hier wählen und die aktuell benutzt wird, wird automatisch in Abhängigkeit des verwendeten Synthesizers gespeichert. Wenn der Synthesizer gewechselt wird, haben Sie eine neue Stimmenauswahl zur Verfügung. Die Angaben für Ihren ersten Synthesizer werden jedoch wiederhergestellt, wenn sie zum Original Synthesizer zurückwechseln.

Die Optionen dieser Registerkarte sind:

Gruppe Bildschirm.

- Gruppe Screenreader
 In dieser Gruppe nehmen Sie Einstellungen in der Screenreader
 Option "Landessprache" und "Stimme" vor. Dies beinhaltet die
 Landessprache und Stimme, die SuperNova nutzt, um Bezeichner
 anzusagen. Ein Bezeichner gibt die Eigenschaft "Name" des aktiven
 Steuerelements an. Normalerweise entspricht die Landessprache des
 Screenreaders der Sprache des Betriebssystems.
- In dieser Gruppe legen Sie die Landessprache für den Synthesizer und die Stimme fest, mit der Text vom Bildschirm gelesen wird. Sie können die Stimme wählen, die für das Lesen in Eingabefeldern, Dialogfeldern, Menüs verwendet werden soll. Dies gilt auch für Text,

der unter der Maus gelesen werden soll.

Außerdem können Sie eine unterschiedliche Stimme für Funktionen innerhalb von SuperNova festlegen. Die Einstellung wird vorrangig vor Einstellungen für andere Bereiche verwendet.

In jeder Liste zu den individuellen Spracheinstellungen finden Sie den Eintrag "Keine Sprache". Nutzen Sie diesen, wenn die Sprache in besonderen Bereichen stumm bleiben soll.

- Gruppe "Automatischer Landessprachenwechsel". Mit den Optionen in dieser Gruppe können Sie den automatischen Landessprachenwechsel steuern. Der automatische Wechsel der Landessprache ändert automatisch die Synthesizer Landessprache, um ein flüssiges Ergebnis beim Lesen zu erzielen. Wenn Sie einen geeigneten Synthesizer installiert haben, können Sie automatisch zwischen vielen Landessprachen wechseln einschließlich Latein, arabisch, chinesisch (Mandarin), griechisch, hebräisch, Hindi (Devanagari) und russisch (kyrillisch). Beachten Sie, dass nicht alle Synthesizer diese Funktion unterstützen. Für weitere Informationen zu den Synthesizern bzw. den verfügbaren Synthesizer Landessprachen, wenden Sie sich bitte an Dolphin oder Ihren örtlichen Dolphin Händler.
- Schaltfläche "Alle Standard Stimmen laden".
 Wenn Sie die Schaltfläche "Alle Standard Stimmen laden" wählen, werden alle Stimmen auf ihre Standardwerte des Synthesizers zurückgesetzt.
- Ausnahmen für die Sprachausgabe Die Ausnahmen für die Sprachausgabe sind Aussprachekorrekturen. Fehlerhaft ausgesprochene Wörter können mit einer bestimmten Stimme korrekt wiedergegeben werden. Diese Aussprache Korrekturen beinhalten evtl. technische Begriffe oder Eigennamen in anderen Landessprachen. Wenn die Sie Schaltfläche "Bearbeiten" aktivieren, wird das Dialogfeld "Sprachausgabe Ausnahmen" angezeigt. Es werden alle Aussprachekorrekturen für die aktuelle Synthesizerstimme gelistet. Hier können Sie Aussprachekorrekturen für den gewählten Synthesizer hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Jede individuelle Regel zur Aussprachekorrektur enthält ein "Original Wort", z.B. "Dr.", und ein "Ersatzwort", z.B. "Doktor". Eine Aussprachekorrektur kann die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen, wenn Sie das Kontrollfeld dazu aktivieren. Beispiele für die Groß-Kleinschreibung in Englisch können folgende sein:

IT; US; VAT; WHO; Polish

In den Beispielen werden großgeschriebene Wörter unterschiedlich zu den gleichen Wörtern n Kleinbuchstaben ausgesprochen.

Registerkarte "Benutzerdefinierte Stimmen"

In diesem Register können die Synthesizer-Stimmen verändert werden und neue Stimmen erzeugt werden. Sie bestimmen einen Namen und eine Reihe von Parametern für den Synthesizer. Die zur Verfügung stehenden Einstellungen für die Stimme hängen von dem aktuell verwendeten Synthesizer ab.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Ausklappliste "Landessprache"
 Verwenden Sie dieses Listenfeld, um die Landessprache für die Stimme auszuwählen.
- Ausklappliste "Stimme"
 In dieser Liste finden Sie eine Auswahl der für den aktuell verwendeten Synthesizer verfügbaren Stimmen. Wählen Sie die Stimme die Sie verändern oder löschen wollen.
- Schaltflächen "Hinzufügen", "Entfernen", "Umbenennen"
 Mit diesen Schaltflächen wird eine neue Stimme erzeugt, die ausgewählte Stimme gelöscht oder die aktuelle Stimme umbenannt.
- Gruppe "Parameter"
 In dieser Gruppe werden einzelne Charakteristika der Stimme festgelegt. Dies sind die Tonhöhe und die Betonung.
- Gruppe "Weitere Spracheinstellungen"
 In dieser Gruppe finden Sie weitere, vom Synthesizer abhängige
 Einstellungen. Die zur Verfügung stehenden Parameter wählen Sie

aus der Ausklappliste "Einstellungen". Zu jedem Parameter finden Sie die entsprechende Einstellung im Listenfeld "Wert".

- Eingabefeld "Test-Text"
 Geben Sie in dieses Eingabefeld einen kurzen Text ein. Jedes Mal, wenn Sie eine Veränderung in der aktuellen Stimme vornehmen, wird der Text in diesem Eingabefeld in der neuen Einstellung gesprochen. Damit vermeiden Sie eine Stimmeinstellung, die unter Umständen nicht verständlich ist.
- Schaltfläche "Lade Standardstimmen für aktuelle Sprache"
 Mit dieser Schaltfläche werden die Standardeinstellungen für die Stimmen des aktuellen Synthesizers aktiviert. Die zur Verfügung stehenden Stimmen hängen von dem verwendeten Synthesizer ab.

Die hier definierten Stimmen sind nur unter SuperNova verfügbar. Sie sind in anderen Programmen, die den selben Synthesizer verwenden, nicht einsetzbar.

23.17 Sprache - Zeichenecho - Dialogfeld

Menü: Sprache > Zeichenecho

Im Dialogfeld "Zeichenecho" wird festgelegt, wie die Sprachausgabe auf Tastatureingaben reagiert. Sie können Zeichen, Wörter, beides oder gar nichts sprechen lassen.

23.18 Sprache - Tastenecho - Dialogfeld

Menü: Sprache > Tastenecho

Hier legen Sie die Ansagen der Sprachausgabe für bestimmte Tasten der Tastatur fest.

23.19 Sprache Dialogfeld Ansage von Textformaten

Menü: Sprache > Textformate.

Sie können spezifische Einstellungen für Interpunktion und Betonung, die Zahlenformate und Textattribute vornehmen, indem Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld "Ansage von Textformaten" anwählen. Das Dialogfeld hat verschiedene Registerkarten, welche die Einstellungen in verschiedene Kategorien aufteilen.

Umgebungen:

- Die Registerkarte "Textfelder" beinhaltet Einstellungen, die Sie auf Texte und Texteingaben verwenden können. Die Einstellungen werden auf Felder sngewendet, in denen Sie Text lesen, eingeben oder schreiben, Ziffern oder Buchstaben. Textfelder sind zum Beispiel Dokumentenfenster in einem Textverarbeitungsprogramm, ein Textfeld auf einer Webseite oder einem Eingabefeld in Ihrem Adressbuch.
- Die Registerkarte "Dialogfelder" beinhaltet Einstellungen, die Sie auf alle Bereiche anwenden können, mit der Ausnahme von Eingabefeldern und Menüs. Als Beispiel sind Feldbezeichner in Dialogfeldern, Meldungsfenster und Arbeitsblätter zu nennen.
- Die Registerkarte Menüs beinhaltet Einstellungen, welche Sie auf die Menüs anwenden können.
- Die Registerkarte "Lesen ab hier" beinhaltet Einstellungen, die den SuperNova Lesemodus betreffen.
- Die Registerkarte "Dolphin Cursor" beinhaltet Einstellungen für SuperNova screen reviewing mode.

Einstellungen:

Liste Satzzeichen.

SuperNova gruppiert Satzzeichen in spezifische Kategorien. Sie können bestimmen, wieviele Satzzeichen von SuperNova gesprochen werden sollen, indem Sie die Satzzeichenansage verändern.

• Gruppe "Ansage von Zahlen".

Sie können Zahlen als einzelne Ziffern, als Paare oder als Wörte lesen lassen. Wenn Sie "Ziffern" wählen, wird SuperNova jede Ziffer einzeln, zum Beispiel, eins, zwei, drei, vier, vorlesen. Wenn Sie "Paare" auswählen, dann wird SuperNova die Zahlen als zweiwertige Ziffern lesen, zum Beispiel zwölf, dreiundzwanzig. Wenn Sie "Wörter" auswählen, dann wird SuperNova die Zahlen als Ganzes lesen, zum Beispiel, Eintausendzweihundertunddreiundzwanzig.

- Gruppe "Ansage"
- Kontrollfeld Leerzeilen.

Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen gesagt wird, wenn sich der Fokus in einer leeren Zeile befindet. Aktivieren Sie das Kontrollfeld. Diese Option gilt speziell für Eingabefelder.

Kontrollfeld Großbuchstaben.

Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen gesagt wird, wenn ein Großbuchstabe verwendet wurde, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld aktivieren. Sie können auswählen, wie SuperNova Großbuchstaben ansagt, indem Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Voice Preferences" und im Dialogfeld "General Announcements" anwählen.

Kontrollfeld "Wiederholungen".

Sie können einstellen, wie SuperNova sich wiederholende Buchstaben liest, indem Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Das betrifft die Satzzeichen und Symbole, schließt jedoch Buchstaben und Zahlen aus. Sie kontrollieren die Methode, die SuperNova verwendet um sich wiederholende Buchstaben anzuzeigen, indem Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Wiederholungen" anwählen.

- Kontrollfeld "Änderung der Farbe"
 Sie können sich von SuperNova ansagen lassen, wenn sich die Schriftfarbe ändert.
- Kontrollfeld "Änderung der Hintergrundfarbe"
 Sie können sich von SuperNova ansagen lassen, wenn sich die Hintergrundfarbe ändert.
- Kontrollfeld "Änderung der Schriftgröße".
 Sie können sich von SuperNova ansagen lassen, wenn sich die Schriftgröße ändert.
- Kontrollfeld "Änderung der Schriftart".
 Sie können sich von SuperNova ansagen lassen, wenn sich die Schriftart ändert.
- "Ausgewählt / Markiert" Kontrollfeld. Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen Änderungen bei Markierungen und Hervorhebungen angesagt wird. Wenn Sie zum Beispiel ein Wort in einer Zeile markieren und dann das Tastenkommando "Zeile lesen" verwenden, dann wird SuperNova Ihnen die entsprechende Einstellung ansagen.
- Kontrollfeld "Links". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, ob sich Links in dem von Ihnen gelesenen Text befinden, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Beachten Sie, dass diese Option Sie nicht auf die entsprechenden Webseiten führt. Um die Ansage von Links auf Webseiten zu ändern, müssen Sie das Ausführlichkeitsschema ändern.
- Kontrollfeld "Bedeutungsänderung". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn Textausschnitte als Akronyme oder Abkürzungen, als Zitate, als Schwerpunkt, etc. markiert sind, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Diese Option greift auf HTML Inhalte zu.
- Kontrollfeld "Unterstreichungen". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn Text unterstichen ist, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen.

- Kontrollfeld "Änderungen beim Schriftschnitt". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn Text fett formatiert ist, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Kursiv".
 Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn Text kursiv formatiert ist, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Durchgestrichen".
 Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn Text durchgestrichen formatiert ist, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Rechtschreibfehler". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen als Rechtschreibfehler markierter Text als solcher angesagt wird, wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren. Diese Option greift auf Microsoft Office zu und zeigt Ihnen Fehler im Office-typischen unterstrichenen Modus an.
- Kontrollfeld "Grammatikfehler". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen als Grammatikfehler markierter Text als solcher angesagt wird, wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren. Diese Option greift auf Microsoft Office zu und zeigt Ihnen Fehler im Office-typischen unterstrichenen Modus an.
- Kontrollfeld "Hoch-/Tiefgestellt". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn Text hoch- oder tiefgestellt formatiert ist, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Überschriften".
 Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn ein Überschriftenwechsel auftritt, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Texteffekte" ändern. Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, welche Texteffekte auftauchen, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Ein Texteffekt ist beispielsweise eine Vertiefung, eine Schattierung oder eine Gravur.

Kontrollfeld "Textanimationen". Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, welche Textanimationen auftauchen, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Textanimationen sind beispielsweise "Blinkender Hintergrund", "Las Vegas Lichter" und "Marschierende rote Ameisen". Diese Einstellung greift auf Microsoft Office zu.

23.20 Sprache Dialogfeld Allgemeine Meldungen

Menu: Sprache > Allgemeine Meldungen

Sie können eine Reihe von spezifischen Einstellungen von SuperNova vornehmen, wenn Sie im Dialogfeld "Allgemeine Meldungen" die entsprechenden Optionen anwählen. Die Verfügbarkeit einiger der Optionen hängt vom Synthesizer ab, den Sie verwenden.

- Kontrollfeld "Änderung der Braille Einstellungen ansagen"
 Sie können sich Ihre Änderungen der Braille Einstellungen ansagen
 lassen, wenn Sie Tastenkommandos verwenden. Aktivieren Sie dazu
 dieses Kontrollfeld. Dies beinhaltet das Aktivieren von Braille
 Ausgaben, das Einschalten der Kurzschrift, das Aktivieren von
 physischem Braille, das Aktivieren von erweitertem Braille und den
 Routing Schaltflächen.
- Kontrollfeld "Änderung der Vergrößerungseinstellungen ansagen"
 Sie können sich Ihre Änderungen der Vergrößerungseinstellungen
 ansagen lassen, wenn Sie Tastenkommandos verwenden. Aktivieren
 Sie dazu dieses Kontrollfeld. Das beinhaltet das Aktivieren der
 Vergrößerung, das Ändern der Ansicht der Vergrößerung, die
 Änderung des geteilten Bildschirms, die Vergrößerungsstufe und
 das Aktivieren Ihres Farbschemas.
- Kontrollfeld 'Ansage kein Fokus erkannt"
 Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen angesagt wird, wenn eine Anwendung den Fokus verloren hat, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Eine Anwendung kann z.B. den Fokus verlieren, wenn Sie ein Fenster im Vordergrund schließen, und

der Fokus nicht auf einem anderen Fenster platziert wird. Sie können den Verlust des Fokuses normalerweise schnell lösen, indem Sie ALT + TABULATOR in einer geöffneten Anwendung drücken oder indem Sie WINDOWS + D drücken, um den Fokus auf dem Desktop zu platzieren.

- Kontrollfeld "Text unter Mauszeiger ansagen"
 Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen der Text unter Ihrem Mauszeiger vorgelesen wird, wenn Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Um den Text zu lesen müssen Sie den Mauszeiger zu dem Ort bewegen, an dem sich der Text auf dem Bildschirm befindet.
- Kontrollfeld "Ansage von Aktionen der Zwischenablage"
 Sie können SuperNova so einstellen, dass Ihnen die Aktionen
 Ausschneiden, Kopieren und Einfügen angesagt werden, wenn Sie
 die Tastenkommandos verwenden. Aktivieren Sie das entsprechende
 Kontrollfeld. SuperNova kann die Aktionen der Zwischenablage mit
 den Tastenkommandos STRG + C zum Kopieren, STRG + X zum
 Ausschneiden und STRG + V zum Einfügen erkennen. Falls Sie
 andere Tastenbefehle verwenden, geben Sie diese auch im
 Dialogfeld "Tasten der Zwischenablage" in die entsprechenden Felder
 ein.
- Kontrollfeld "Zeilenansage beim Markieren von Text"
 Sie können die Anzahl der Zeilen zählen lassen, die Sie markiert
 haben, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Beachten Sie, dass
 diese Option nur verfügbar ist, wenn Sie Anwendungen nutzen, die
 Document Object Model (DOM) unterstützen, wie NotePad, WordPad
 und Microsoft Word.
- Kontrollfeld "Großbuchstaben beim Zeile lesen"
 Beim Lesen einer Textzeile können Sie die Ansage von
 Großbuchstaben aktivieren, indem Sie dieses Kontrollfeld anwählen.
 Sie lesen eine Zeile Text, wenn Sie den Fokus in eine neue Zeile
 bewegen, z.B. indem Sie die Tasten CURSOR AUF, CURSOR AB,
 BILD AUF und BILD AB verwenden.

Anmerkung: Um die Betonung von Großbuchstaben zu aktivieren, müssen Sie das Kontrollfeld "Großbuchstaben" in der Registerkarte "Textfelld" des Dialogfeldes "Ansage von Textformaten" anwählen.

- Kontrollfeld "Nutze Signalton zur Großbuchstabenkennzeichnung"
 Mit den Standardeinstellungen wird SuperNova die Großbuchstaben
 mit Worten ansagen. Die Verwendung der Ansage wird von allen
 Synthesizern unterstützt. Mit einigen Synthesizer ist es ebenso
 möglich, Großbuchstaben mit einem Sound anzukündigen. Wenn
 diese Option verfügbar ist, können Sie Großbuchstaben durch
 akustische Signale ankündigen lassen.
- Liste "Klänge"
 Wenn Sie das Kontrollfeld "Nutze Signalton für Großbuchstabenkennzeichnung" aktivieren, können Sie auswählen, welchen Sound Sie zur Ankündigung von Großbuchstaben verwenden wollen.
- Schaltfläche "Wiederholungen"
 Sie können das Dialogfeld "Wiederholungen" öffnen, indem Sie diese Schaltfläche anwählen. Das Dialogfeld "Wiederholungen" gibt Ihnen die Möglichkeit einzustellen, wie SuperNova sich wiederholende Buchstaben liest.
- Schaltfläche "Tasten der Zwischenablage"
 Sie können das Dialogfeld "Tasten der Zwischenablage" öffnen, indem Sie dieses Schaltfläche anwählen. Das Dialogfeld "Tasten der Zwischenablage" gibt Ihnen die Möglichkeit, die Tasten zu definieren, welche Windows für Ausschneiden, Kopieren und Einfügen verwendet.

23.21 Sprache - Erweiterte Optionen - Dialogfeld

Menü: Sprache > Erweiterte Optionen

Spezielle, zusätzliche Einstellungen sind im Dialogfeld "Erweiterte Optionen der Sprache" verfügbar.

Registerkarte Cursor

- Kontrollfeld "Benutzer Dolphin Cursor automatisch".
 Mit dieser Einstellung können Sie den Dolphin Cursor automatisch ein- und ausschalten lassen.
 Der automatische Dolphin Cursor ist eine spezielle Funktion, die z.B. in einer MAP Datei verwendet werden kann. In der MAP Datei können einzelne Regionen des Fensters für die automatische Benutzung des Dolphin Cursor festgelegt werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn in der Applikation kein Cursor existiert. Dieser automatische Dolphin Cursor kann mit einem Tastenkommando ein- und ausgeschaltet werden. Drücken Sie dazu LINKE STRG + 4.
- Kontrollfeld "Beschränke Dolphin Cursor auf aktuellen Bereich".
 Der Dolphin Cursor kann in seiner Bewegung auf einen Bereich beschränkt werden. Dieses Verhalten wird in der MAP Datei festgelegt. Diese Einstellung legt fest, ob der definierte Dolphin Cursor auf den angegebenen Bereich beschränkt ist oder nicht. sie können außerdem ein Tastenkommando verwenden, um die Einschränkung umzuschalten. Drücken Sie dazu LINKE STRG + 2. Beachten Sie, dass diese Einstellung erst dann aktiv wird, wenn der Dolphin Cursor das nächste Mal aktiviert wird.
- Kontrollfeld "Automatischer Formularmodus".
 Ist dieses Kontrollfeld aktiviert, wird der Formularmodus automatisch aktiviert, wenn der Cursor in ein Eingabefeld springt. Damit können Sie auf einfache Art und Weise mit dem Dolphin Cursor Formulare in HTML Umgebungen ausfüllen. Für diese Funktion steht ebenfalls ein Tastenkommando zur Verfügung: Drücken Sie FESTSTELLTASTE + ENTER, um den automatischen Formularmodus ein- oder auszuschalten.

Registerkarte Ausführlichkeit

SuperNova verfügt über eine Reihe von Ausführlichkeitsschemata. In einem Ausführlichkeitsschema ist festgelegt, wie die Informationen über das aktuelle Steuerelement, z.B. eine Schaltfläche oder ein Kontrollfeld angesagt werden. In dieser Registerkarte können Sie vorhandene Ausführlichkeitsschemata ändern oder eigene Schemata erstellen.

Mehr Informationen über die Bearbeitung und das Erstellen von Ausführlichkeitsschemata erhalten Sie auf der Dolphin Webseite.

Registerkarte Sprungmarken

Mit einer Sprungmarke kann ein bestimmter Bereich des Bildschirms auf Änderungen überwacht werden. Im Falle einer Änderung in diesem Bereich wird eine zuvor definierte Aktion ausgeführt. Die Sprungmarke und die Aktion wird in der MAP Datei gespeichert. Wenn eine Sprungmarke in einer MAP Datei definiert wurde, sollte dies in den Hinweisen zur MAP Datei dokumentiert sein.

Die Registerkarte "Sprungmarken" wird verwendet, um die definierten Sprungmarken ein- beziehungsweise auszuschalten.

- Ausklappliste "Umgebung"
 Wählen Sie in dieser Ausklappliste die Kategorie, für die Sprungmarken gelistet werden sollen. Sie können alle Sprungmarken auflisten, die aktuell auf dem Bildschirm verfügbar sind oder eine Liste der Sprungmarken für die gewählte Applikation erzeugen.
- Listenfeld "Sprungmarken Aktion"
 Diese Liste zeigt alle Sprungmarken in der unter "Umgebung" gewählten Kategorie. Verwenden Sie die Kontrollfelder vor jedem Listeneintrag, um die Sprungmarke ein- oder auszuschalten. Für das Einbettung das Ausschalten aller Sprungmarken können Sie das Tastenkommando LINKE STRG + 5 verwenden.

23.22 Braille - Allgemeine Einstellungen - Dialogfeld

Menü: Braille > Allgemeine Einstellungen

Einige grundsätzliche Einstellungen zu Braille sind unter den allgemeinen Einstellungen vorzunehmen.

Register der Zeichensätze.

- Listenfeld der Übersetzungstabelle von Unicode zu Braille.
 Wählen Sie aus dieser Liste die Computer Braille Tabelle, die SuperNova verwendet, um Text in Braille umzuwandeln. Die Landessprache, die Sie auswählen wird sowohl für die Computer Braille Ausgabe als auch Computer Braille Eingabe benutzt.
 Computer Braille verwendet konsequent ein Braille Modul pro Zeichen.
 Computerbraille wird in den meisten Appliaktionen erforderlich, wo jedes einzelne Zeichen von Bedeutung ist.
- Listenfeld der Übersetzungstabelle von Unicode zu Braille (Kurzschrift).
 Wählen Sie aus dieser Liste die Braille (Kurzschrift) Tabelle, die SuperNova verwendet, um Text in Braille umzuwandeln. Die Landessprache, die Sie auswählen, gilt nur für die Braille (Kurzschrift) Ausgabe. Braille (Kurzschrift) umfasst sowohl Stufe 1 als auch Stufe 2 Braille Tabellen. Braille (Kurzschrift) ist vorteilhaft zum Lesen von einfachen Texten.
- Braille (Kurzschrift) Eingabe Listenfeld.
 Wählen Sie aus dieser Liste die Braille (Kurzschrift) Tabelle, die SuperNova benutzt, um die Braille Eingabe in Text zu konvertieren.
 Die Sprache, die Sie auswählen, gilt nur für die Braille (Kurzschrift) Eingabe. Wenn Sie den Eingabemodus Braille (Kurzschrift) benutzen, werden 6 Punkte und verkürztes oder nicht verkürztes Braille verwendet (abhängig von der eingestellten Eingabesprache). Bitte beachten Sie, dass das Braillezeichen, das Sie schreiben nur in Ihrem Dokument erscheint, wenn Sie die Braille Leertaste drücken oder eine andere Taste, die keine Kombination von Braillepunkten ist.

Registerkarte Braillezeile

- Schaltfläche "Braillezeile wählen"
 Aktivieren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Braillezeile
 auswählen möchten. Das Dialogfeld "Braillezeile wählen" wird
 geöffnet. Es zeigt alle von SuperNova erkannten Braillezeilen.
 Sind keine Einträge in der Liste vorhanden, bedeutet dies, dass
 bisher keine Braillezeile konfiguriert wurde. Prüfen Sie, dass Ihre
 Braillezeile korrekt konfiguriert ist und stellen Sie sicher, dass die von
 Dolphin SAM erkannt wurde. Die SAM Konfiguration erreichen Sie
 aus dem Menü "Allgemein", über den Eintrag "Erweiterte
 Einstellungen".
- Schaltfläche "Einstellungen"
 Hiermit wird die Treiberkonfiguration für die aktuelle Braillezeile geöffnet.
- Drehfeld "Bildlaufrand"
 Der Eintrag im Feld "Bildlaufrand" legt die Anzahl der Module fest, um die das Braillefenster verschoben wird, wenn Sie vorwärts oder rückwärts lesen. Um die gleiche Anzahl der Module wird das Braillefenster verschoben, wenn sich der Cursor an den linken oder rechten Rand des Braillefensters bewegt.

23.23 Braille - Allgemeine Meldungen - Dialogfeld

Menü: Braille > allgemeine Meldungen

- Gruppe "Änderungen Braille"
 Legen Sie mit den Kontrollfeldern fest, welche Ausgaben auf der Braillezeile erscheinen sollen.
- Gruppe "Symbole"
 Mithilfe der Auswahl in der Ausklappliste und dem darauf folgenden
 Listenfeld können Sie verschiedene Objekte auf der Braillezeile durch

entsprechende Symbole kenntlich machen. Wählen Sie dazu in der Ausklappliste ein Objekt und weisen Sie ihm dann ein Symbol aus dem Listenfeld zu. Die zusätzliche Anzeige von Symbolen für die Objekte wird nur im physischem Modus verwendet.

23.24 Menü und Dialogfeld Braille Eingabe

Menü Braille > Eingabe

Das Menü Eingabe erlaubt die Änderung der Optionen für die Brailleeingabe.

Die Brailleeingabe kontrolliert die Aktionen, die mit den Routingtasten ausgeführt werden. Zusätzlich stellen einige Braillezeilen auch eine Brailleeingabe bereit. Mit diesen Tasten kann dann Text in Braille eingegeben werden.

- Der Eintrag "Braille Tasten".
 Diese Einstellung aktiviert die Texteingabe mit sechs oder acht Tasten an der Braillezeile. Die Tasten für die Brailleeingabe hängen von der Braillezeile ab. Nicht alle Braillezeilen unterstützen eine Brailleeingabe. Die Brailleeingabe ist sinnvoll, wenn Sie Text schreiben wollen, ohne die Hände von der Braillezeile entfernen zu müssen. Die Eingabe erfolgt in der Regel mit Computer Braille.
- Eintrag "Kurzschrift Eingabe".
 Diese Einstellung aktiviert die Texteingabe mit sechs oder acht Tasten an der Braillezeile. Die Tasten für die Brailleeingabe hängen von der Braillezeile ab. Nicht alle Braillezeilen unterstützen eine Brailleeingabe. Außerdem werden nur bestimmte Brailletabellen unterstützt.

23.24.1 Routingtasten

Im Dialogfeld "Brailleeingabe" können Sie die Aktionen der Routingtasten festlegen und die Texteingabe mit Braille aktivieren.

- Gruppe "Aktionen der Routingtasten".
 Mit diesen Auswahlschaltern legen Sie die Aktion der Routingtasten fest. Sie können einen linken Mausklick, einen Doppelklick, einen rechten Mausklick ausführen lassen. Alternativ ist die Ausgabe einer Zeichenbeschreibung möglich.
- Gruppe "Aktion der zweiten Routingtaste".
 Mit diesen Auswahlschalter legen Sie die Aktion der zweiten Routingtaste fest. Sie können einen linken Mausklick, einen Doppelklick, einen rechten Mausklick ausführen lassen. Alternativ ist die Ausgabe einer Zeichenbeschreibung möglich. Nicht alle Braillezeilen bieten eine zweite Routingtaste an.

23.24.2 Optionen des Dolphin Cursors

Im Dialogfeld "Brailleeingabe mit Dolphin Cursor" legen Sie fest, welche Aktionen die Routingtasten ausführen sollen, wenn der Dolphin Cursor aktiv ist.

23.25 Zeichen

Menü Braille > Zeichen

Das Menü "Zeichen" enthält einige Brailleeinstellungen bezüglich der Darstellung von Zeichen auf der Braillezeile. Dies beinhaltet auch die Kurzschrift und den erweiterten Modus.

 Eintrag Kurzschrift.
 Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Kurzschrift. Wenn die Einstellung aktiv ist, wird die Anzeige in Kurzschrift ausgegeben, andernfalls in Computerbraille. Wir verwenden den Ausdruck Kurzschrift, auch wenn sowohl Vollschrift als auch Kurzschrift gemeint ist.

 Eintrag "Erweitert"
 Nutzen Sie diese Einstellung, um die erweiterten Brailleeinstellungen ein- oder auszuschalten. Wenn aktiv, werden alle Zeichen, die ein Attribut aufweisen, mit dem Punkt 8 gekennzeichnet.

23.25.1 **Optionen**

Dialogfeld "Zeichen".

Das Menü "Zeichen" enthält einige Brailleeinstellungen bezüglich der Darstellung von Zeichen auf der Braillezeile. Dies beinhaltet auch die Kurzschrift und den erweiterten Modus.

Optionen:

- Kontrollfeld "Wort am Cursor übersetzen".
 Für die aktive Brailleübersetzung können Sie entscheiden, ob das aktive Wort am Cursor ebenfalls übersetzt werden soll oder nicht. Diese Kontrollfeld schaltet die Einstellung um. Bei deaktiviertem Kontrollfeld wird das aktive Wort am Cursor in Computerbraille ausgeschrieben. Das nicht übersetzte Wort am Cursor erleichtert eventuelle Korrekturen.
- Kontrollfeld Großbuchstaben anzeigen.
 Einige Übersetzungsarten erlauben die Kennzeichnung von Großbuchstaben mit einem separaten Zeichen für den Großbuchstaben. Andere Versionen der Brailleübersetzung erlauben das Auslassen jeglicher Kennzeichnungen, das spart Platz.
- Kontrollfeld 8-Punkte Braille.
 Mit dem Kontrollfeld 8-Punkte Braille schalten Sie zwischen 6- und 8-Punkte Braille Darstellung um. Diese Einstellung ist hauptsächlich sinnvoll, wenn Sie Computerbraille nutzen. Die Punkte 7 + 8 werden dann für die Großbuchstabenkennzeichnung und für Sonderzeichen

verwendet. In vielen Braille Zeichensätzen wird z.B. Großbuchstaben mit dem zusätzlichen Punkt 7 gekennzeichnet. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, 8-Punkte Braille zu lesen, können Sie zum 6-Punkte Braille umschalten.

- Kontrollfeld blinkende Großbuchstaben.
 Mit dieser Einstellung können Sie die Großbuchstaben blinken lassen.
 Dies ist vor allem bei 6-Punkte Braille sinnvoll. Die Blinkrate solcher
 Zeichen kann im Dialogfeld "Cursor" eingestellt werden.
- Gruppe "Erweitert"
 In der Gruppe "Erweiterte Zeichen" wird genau festgelegt, was ein "erweitertes Zeichen kennzeichnet. Wählen Sie die Attribute, die angezeigt werden sollen.
- Liste der Anzeigestile
 Stile erlauben die Auswahl der Art, wie erweiterte Zeichen angezeigt
 werden sollen. Im Standard wird der Punkt 8 zur Kennzeichnung
 gesetzt. Andere Optionen nutzen den Punkt 7 und 8.

23.26 Menü und Dialogfeld Braille Layout

Menü Braille > Layout

Mit dieser Einstellung kann das Layout der Brailleanzeige festgelegt werden.

Eintrag "Physischer Modus"
 Diese Einstellung wechselt zwischen physischem und logischem Modus. Im physischen Modus zeigt die Braillezeile den tatsächlichen Inhalt des Bildschirms. Der logische Modus zeigt den logischen Zusammenhang der Umgebung am Fokus mit Text an. Dies entspricht der Sprachausgabe. Dieser Modus ist zeitweise für die Arbeit in Dialogfeldern sinnvoll, da der Screenreader die Bezeichnungen mit den entsprechenden Elementen anzeigt.

 Eintrag "Verfolgung"
 Die Einstellung dieses Kontrollfeldes legt fest, ob die Braillezeile dem Fokus im physischen Modus folgen soll. Im Standard wird die Verfolgung aktiv sein. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Verfolgung anzuschalten, z.B. um eine bestimmte Region des Bildschirms zu überwachen.

23.26.1 Optionen

Dialogfeld Layout.

Mit dieser Einstellung kann der physische Modus der Brailleanzeige festgelegt werden. Hier finden Sie Einstellungen zum Zeilenumbruch während der Navigation, zur Anzeige der Markierung von Zeilenanfang und Zeilenende und zum Layout im physischen Modus.

- Kontrollfeld "vorwärts und rückwärts lesen".
 Mit diesem Kontrollfeld legen Sie fest, wie sich die Tasten zum vorwärts und rückwärts lesen im physischen Modus verhalten sollen.
 Wenn die Einstellung nicht aktiviert ist, wird das Lesen auf die aktuelle Zeile begrenzt. Wenn der Zeilenumbruch aktiviert wurde, können Sie durch das gesamte Fenster lesen, wenn Sie die Tasten "Vorwärts lesen" und "Rückwärts lesen" verwenden.
- Kontrollfeld "Nur vollständige Wörter anzeigen" Normalerweise sind Textzeilen auf dem Bildschirm länger als die Länge der Braillezeile, so dass nur ein Teil des Textes in einem Ausschnitt angezeigt werden kann. Um den nächsten Ausschnitt anzuzeigen, drücken Sie die Taste "Vorwärts lesen". Das kann dazu führen, dass Wörter am Zeilenende getrennt werden müssen. Wenn Sie die Einstellung "vollständige Wörter anzeigen" verwenden, vermeiden Sie damit die willkürliche Trennung der Wörter am Zeilenende. Wenn das letzte Wort nicht auf die Zeile passt, wird es in den nächsten Ausschnitt verschoben. Dies ist vor allem hilfreich, wenn Sie die Brailleübersetzung verwenden, z.B. die deutsche Kurzschrift. Mit der aktivierten Einstellung wird der Scrollrand am

letzten Wort innerhalb des aktiven Ausschnitts ausgerichtet. Wenn Sie vorwärts lesen, das letzte Wort jedoch nicht in den verbleibenden Platz passt, wird stattdessen ein Leerzeichen angezeigt. Dies vereinfachet einen Klick am Ende des angezeigten Wortes. Der Eindruck für das letzte Wort wird damit ebenfalls verstärkt. Wenn es mehrere Zwischenräume gibt, kann es sein, dass der Text nicht am linken Rand beginnt.

Wenn die Zeichenanzahl großer Wörter die Gesamtanzahl der Braillemodul übersteigt, wird das Wort direkt am Ende abgeschnitten. Dies entspricht der deaktivierten Einstellung "nur ganze Wörter anzeigen". Außerdem kann es möglich sein, dass große Bereiche der Braillezeile leer bleiben.

- Kontrollfelder Zeilenbeginn und Zeilenende
 Mit diesen zwei Kontrollfeldern legen Sie fest, ob im physischen
 Modus am Zeilenanfang bzw. am Zeilenende eine Markierung
 erscheinen soll. Das kann sinnvoll sein, wenn der Umbruch aktiviert
 ist, Sie aber wissen möchten, wo eine neue Zeile beginnt.
- Kontrollfeld "Zeige Layout"
 Dieses Kontrollfeld schaltet die Layout Einstellung für den physischen Modus ein oder aus. Mit eingeschaltetem Layout werden die Zeichen zur Anzeige auf der Braillezeile am Bildschirmlayout angelehnt. Dies kann zur Komprimierung oder Erweiterung führen. Wenn das Layout ausgeschaltet ist, werden alle erforderlichen Zeichen und Zwischenräume angezeigt, z.B. in Spalten. Das Bildschirmlayout wird dabei nicht berücksichtigt.
- Kontrollfeld "Zwischenräume erweitern".
 Wenn die Layoutanzeige abgeschaltet ist, werden die Wortzwischenräume innerhalb einer Zeile auf der Braillezeile angezeigt.
- Liste "Pixels pro Zelle in Zwischenräumen"
 Mit der abgeschalteten Layout Option legen Sie hier fest, wie viele Braillemodule für ein en Zwischenraum genutzt werden sollen.

- Kontrollfeld Layout Methode
 Mit den Kontrollfeldern für Absätze, Wörter und Zeichen legen Sie fest,
 wie Zeichen auf der Braillezeile im physischen Modus positioniert
 werden. Jeder Eintrag (ein Absatz, Wort oder Zeichen) wird in dem
 dafür benötigten Platz angezeigt.
- Kontrollfeld "In Zwischenräume erweitern".
 Mit diesem Kontrollfeld legen Sie für den aktiven Layoutmodus fest, dass Zeichen in den folgenden Zwischenraum angezeigt werden dürfen, wenn der Platz benötigt wird. Das kann dazu führen, dass die benötigten Zeichenweniger komprimiert werden. Jedoch werden die Zwischenräume nicht die korrekte Breite haben.
- Kontrollfeld "Bindestriche anzeigen"
 Der benötigte Platz für zu erweiterten Text im physischen Modus bei aktivem Layout Modus wird mit Bindestrichen aufgefüllt. Mit dem Kontrollfeld legen Sie fest, ob die Bindestriche angezeigt werden sollen oder nicht.
- Liste "Länge im Layout".
 Die Länge im Layout ist die Anzahl der Braillemodule, die für die Anzeige der gesamten Bildschirmbreite benötigt wird. Die Breite, die ein Braillemodul repräsentiert wird aus der Gesamtbreite des Bildschirms geteilt durch die Länge des Layouts berechnet.
 Wenn ein 800 Pixel breiter Bildschirm verwendet wird und eine Layout Länge von 80 angegeben ist, steht ein Braillemodul für 10 Pixel der Bildschirmbreite.

23.27 Braille - Statusmodule - Dialogfeld

Menü: Braille > Statusmodule

Mit der Auswahl im Dialogfeld "Statusmodule" legen Sie fest, welchen Inhalt die Statusmodule präsentieren sollen. Jeder aktivierte Eintrag wird ein Modul auf der Braillezeile in Anspruch nehmen.

Kontrollfeld "aktive Braillemodi"

Dieses Statusmodul zeigt die aktuelle Einstellung des Braillemodus, inklusive des Attribut-Modus, Kurzschrift, physischer Modus und Verfolgung.

Die oberenvier Punkte zeigen den aktiven Attributmodus an: Wenn hier kein Punkt steht, ist der Attributmodus ausgeschaltet Die Buchstaben A bis E zeigen die fünf Attribute an, die beim Umschalten der Attributbeschreibung möglich sind. Buchstabe F steht für den Modus der Zeichenbeschreibung.

Die unteren vier Punkte zeigen weitere Einstellungen:

- Punkt 3: gesetzt, wenn Kurzschrift aktiv, andernfalls ist Computerbraille aktiv.
- Punkt 6: gesetzt, wenn der physische Modus aktiv ist, andernfalls ist der logische Modus aktiv.
- Punkt 7: gesetzt, wenn die Braillezeile den Fokus zeigt.
- Punkt 8: gesetzt, wenn die Verfolgung aktiv ist.

Kontrollfeld "Cursor-Position".

Dieses Statusmodul zeigt die Position des Cursors innerhalb einer Textzeile, wenn er sich in einem Eingabefeld befindet. Die oberen vier Punkte zeigen die Zehner, die unteren vier Punkte die Einer des Wertes an. So zeigen z.B. die Punktre 245678 an, das der Cursor am Position 0 der Zeile steht. Beachten Sie, dass die Anzahl der Zeichen pro Zeile von der Schriftgröße und von der Fenstergröße abhängig ist

Kontrollfeld Fokustyp.

Dieses Sattusmodul zeigt den Typ und Status des aktiven Steuerelements. Dies ist speziell im physischen Modus nützlich.

Kontrollfelder f ür Attribute

Die verschiedenen Kontrollfelder für die Attribute aktivieren die Anzeige des entsprechenden Attributs für das Zeichen am Cursor. Diese Information entspricht der Anzeige des Attributmodus.

23.28 Menü und Dialogfeld Braille Cursor

Braille Menü > Cursor

Im Menü "Cursor" können Sie die Art der Darstellung des Cursors auf der Braillezeile verändern. Die meisten dieser Einstellungen können nur angewendet werden, wenn Sie in einen Textbereich Text eingeben.

Optionen:

Sichtbarer Eintrag.

Diese Einstellung bestimmt, ob der Cursor auf der Braillezeile dargestellt wird. In einem Textbereich wird der Braille Cursor als einzelne Zelle angezeigt, die den Buchstaben des Einfügepunktes überlagert.

Wenn Sie sich nicht in einem Textbereich befinden und die Braillezeile im physischen Modus ist, wird der "Cursor" zum fortlaufenden Fokus. Alle Buchstaben, die den Fokus haben werden mit den Punkten 7 und 8 unterstrichen.

23.28.1 Stil

Der Dialog "Cursor Darstellung" steuert das Erscheinungsbild der Cursorform. Die Einstellungen betreffen die Cursorform, die Blinkrate, um den Cursor zu finden sowie das Format im physischen Modus.

Liste der Cursor Darstellungen.

In dieser Aufklappliste werden die Darstellungen für den Cursor in einem Textbereich festgelegt. Die verfügbaren Optionen umfassen: Punkt 8; Punkte 7 und 8; Alle Punkte; Blinkender Punkt 8; Blinkende Punkte 7 und 8; Blinkend Alle Punkte.

Der Cursor liegt über dem aktuellen Zeichen. Je größer der Cursor, umso leichter ist er zu finden. Aber es ist auch schwieriger, den darunterliegenden Zeichen zu lesen.

Liste zur Einstellung der Blinkrate.

Im Listenfeld zur Einstellung der Blinkrate wird die Geschwindigkeit der Blinkrate für den blinkenden Cursor und für blinkenden Text eingestellt. Je höher der Wert eingestellt wird, desto schneller blinkt der Cursor.

List zur Einstellung des physischen Cursors.

In der Aufklappliste zur Einstellung der "Darstellung des physischen Cursors" können Sie auswählen, auf welche Art und Weise im SuperNova die Position des Fokus im physischen Braille Modus angezeigt werden soll. Die verfügbaren Optionen umfassen: Punkt 8; Punkte 7 und 8; Blinkender Punkt 8, Blinkende Punkte 7 und 8; Blinkender Punkt 7.

23.29 Braille - Erweiterte Optionen - Dialogfeld

Menü: Braille > Erweiterte Optionen

Zusätzliche Braille Einstellungen von SuperNova finden Sie im Dialogfeld "Erweiterte Optionen Braille".

Registerkarte Braillemonitor

Hier legen Sie fest, an welcher Stelle der Braille Monitor (Braille am Bildschirm) angezeigt werden soll. Der Monitor zeigt zu jeder Zeit den Inhalt der Braillezeile an.

23.29.1 Registerkarte Ausführlichkeit (Braille)

Registerkarte Ausführlichkeit

SuperNova verfügt über eine Reihe von Ausführlichkeitsschemata. In einem Ausführlichkeitsschema ist festgelegt, wie die Informationen über das aktuelle Steuerelement, z.B. eine Schaltfläche oder ein Kontrollfeld auf der Braillezeile angezeigt werden. In dieser Registerkarte können Sie vorhandene Ausführlichkeitsschemata ändern oder eigene Schemata erstellen.

Mehr Informationen über die Bearbeitung und das Erstellen von Ausführlichkeitsschemata erhalten Sie auf der Dolphin Webseite.

23.29.2 Registerkarte Fixbereiche (Braille)

Registerkarte Fixbereiche

Mit einem Fixbereich kann ein bestimmter Bereich des Bildschirms auf Änderungen überwacht und auf der Braillezeile präsentiert werden. Im Falle einer Änderung in diesem Bereich wird eine zuvor definierte Aktion ausgeführt. Der Fixbereich und die Aktion wird in der MAP Datei gespeichert. Wenn ein Fixbereich in einer MAP Datei definiert wurde, sollte dies in den Hinweisen zur MAP Datei dokumentiert sein. Die Registerkarte "Fixbereiche" wird verwendet, um die definierten Fixbereiche ein- beziehungsweise auszuschalten.

- Ausklappliste "Umgebung"
 Wählen Sie in dieser Ausklappliste die Kategorie, für die Fixbereiche gelistet werden sollen. Sie können alle Fixbereiche auflisten, die aktuell auf dem Bildschirm verfügbar sind oder eine Liste der Fixbereiche für die gewählte Applikation erzeugen.
- Listenfeld "Aktion für Braille-Fixbereich"
 Diese Liste zeigt alle Fixbereiche in der unter "Umgebung"

gewählten Kategorie. Verwenden Sie die Kontrollfelder vor jedem Listeneintrag, um die Sprungmarke ein- oder auszuschalten. Für die Einbettung des Ausschaltens aller Sprungmarken können sie das Tastenkommando LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + 2 verwenden.

23.30 Dialogfeld Einstellungen für Bibliothek Scannen und Lesen

Menü: Bibliothek > Scannen und Lesen > Scannen und Lesen Einstellungen

Das Dialogfeld Einstellungen für "Scannen und Lesen" enthält Optionen, in denen Sie einstellen können, wie SuperNova gescannte Dokumente speichert und konvertiert.

Optionen:

- Liste "Scanner".
 Die Liste "Scanner" zeigt Ihnen die an Ihrem Computer verfügbaren Scanner an. Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Gerät mit dem Scanner, den Sie mit SuperNova verwenden, übereinstimmt.
- Liste zur Einstellung der "Sprache".
 Die Liste "Sprache" bezieht sich auf die Landessprache des Textes, den Sie scannen. Wenn Sie einen Text in einer Fremdsprache scannen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung mit der Sprache des zu scannenden Textes übereinstimmt
- Liste zur Einstellung der "Farbe".
 Mit der Liste "Farbe" können Sie die Farbeinstellungen des Scanners ändern. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass der Wert so genau wie möglich der Farbe der zu scannenden Druckvorlage entspricht. z.B., wenn Sie einen Brief scannen, führt die Einstellung "Schwarz und Weiß" zu einer präzisen Erkennung.

- Liste zur Einstellung des Papierformates.
 Mit der Liste "Papier" können Sie die Papiergröße zuordnen. Um auch hier beste Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass das eingestellte Papierformat mit der zu scannenden Vorlage übereinstimmt.
- Schaltfläche "Scannen und Lesen" für den Ausgabeordner. Dieses Textfeld gibt den Speicherort des von SuperNova konvertierten Textes an. Benutzen Sie die Schaltfläche "Durchsuchen", um den Ordner zu wechseln.

23.31 Dialogfeld "Einstellungen beim Start"

Menu: Allgemein > Startoptionen.

Sie können eine Reihe von spezifischen Einstellungen für SuperNova vornehmen, wenn Sie im Dialogfeld "Einstellungen beim Start" die entsprechenden Optionen anwählen. Die Verfügbarkeit einiger dieser Optionen hängt vom verwendeten Synthesizer, vom verwendeten Netzwerk oder von der Nutzung einer lokalen bzw. Netzwerk oder USB-Version von SuperNova ab.

Optionen:

- Kontrollfeld "Starte SuperNova nach der Anmeldung".
 Sie können Ihren Computer so einstellen, dass er SuperNova automatisch nach der Anmeldung startet, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Begrüßungsbildschirm abschalten"
 Sie können den SuperNova Begrüßungsbildschirm deaktivieren, indem Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Ein Begrüßungsbildschirm ist das Bild, das erscheint, während das Programm gestartet wird.
- Kontrollfeld "Vergrößerung bei der Anmeldung".
 Sie können den Windows Anmeldebildschirm vergrößern, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Mit der Aktivierung dieses Kontrollfelds

wird beim nächsten Start des Computers eine Symbolleiste von SuperNova im Anmeldbildschirm von Windows angezeigt. Sie können die Maus verwenden, um die Schaltflächen der Symbolleiste zu aktivieren, oder Sie drücken F7, um die Vergrößerung zu verringern bzw. F8, um diese zu erhöhen.

Anmerkung: Eine Vergrößerung des Windows Anmeldebildschirms ist lediglich dann möglich, wenn SuperNova als Windows Dienst eingerichtet ist. Sie können kein komplettes Programm im Windows Anmeldebildschirm verwenden, da dies durch die Windows Sicherheitsbestimmungen eingschränkt ist.

- Kontrollfeld "Zeige Schaltflächen zur Vergrößerung bei der Anmeldung"
 Sie können die Symbolleiste von SuperNova im Anmeldebildschirm von Windows verbergen, indem Sie dieses Kontrollfeld abwählen.
- Kontrollfeld "Fertigmeldung nach dem Start"
 Sie können die Meldung "SuperNova geladen" beim Start ausgeben lassen, wenn SuperNova fertig geladen ist, indem Sie dieses Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Alle SAM Treiber beim Start laden".
 Sie können für alle unterstützten Geräte nach jedem Start eine Überprüfung von SAM durchführen lassen, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Beachten Sie, dass diese Einstellung den Start von SuperNova verlangsamen kann, da es bis zum Abschluss der SAM Überprüfung wartet. Sie sollten diese Option lediglich dann auswählen, wenn Sie regelmäßig Ihre Ausgabegeräte wechseln.
- Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern"
 Im Standard wird SuperNova die Änderungen an den Einstellungen zu SuperNova automatisch speichern. Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" deaktivieren. Wenn dieses Kontrollfeld deaktiviert ist, müssen Sie die Änderungen in den Benutzereinstellungen manuell

speichern. Aktivieren Sie dazu den Eintrag "Einstellungen speichern" aus dem Menü "Datei".

•

 Kontrollfeld "Benutzer fragen"
 Das Kontrollfeld "Benutzer fragen" wird aktiv, wenn das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" deaktiviert wird. Wenn Sie das Kontrollfeld "Benutzer fragen" aktivieren, wird SuperNova beim Beenden fragen, ob Sie die Änderungen speichern wollen.

Kontrollfeld "Brailleunterstützung bei der Benutzeranmeldung"
Sie können die Anzeige in Braille bei der Benutzeranmeldung unter
Windows aktivieren, wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren. Um die
Brailleunterstützung bei der Benutzeranmeldung verwenden zu können,
muss die Braillezeile mit SuperNova korrekt konfiguriert werden.

- Kontrollfeld "Sprache bei der Anmeldung".
 Sie können die Sprachausgabe für den Windows Anmeldebildschirm aktivieren, indem Sie dieses Kontrollfeld aktivieren. Nachdem Sie dieses Kontrollfeld ausgewählt haben, können Sie im Windows Anmeldebildschirm folgende Tastenkommandos verwenden:
- Drücken Sie F1 um die verfügbaren Tastenkommandos ansagen zu lassen.
- Drücken Sie F2 um die Sprachausgabe zu deaktivieren.
- Drücken Sie F3 um die letzte Ansage zu wiederholen.

Anmerkung: Eine Sprachausgabe im Windows Anmeldebildschirm ist lediglich dann möglich, wenn SuperNova als Windows Dienst eingerichtet ist. Sie können kein komplettes Programm im Windows Anmeldebildschirm verwenden, da dies durch die Windows Sicherheitsbestimmungen eingschränkt ist.

23.32 Allgemein - Update Einstellungen - Dialogfeld

Menü: Allgemein > Update Einstellungen

Die Einstellungen in diesem Dialogfeld legen fest, ob und wann SuperNova automatisch auf Updates prüfen soll. Wählen Sie zwischen täglich, wöchentlich, monatlich oder niemals.

Sie können die Suche nach Updates auch manuell ausführen, wenn Sie den Eintrag "Über Internet updaten" aus dem Menü "Hilfe" aktivieren.

23.33 Allgemein - Systemsteuerung - Dialogfeld

Menü: Allgemein> Systemsteuerung

Im Dialogfeld "Systemsteuerung" finden Sie die Grundeinstellungen zur Benutzeroberfläche von SuperNova.

- Liste "Landessprache"
 Dieses Listenfeld ermöglicht es Ihnen, die Systemsprache für SuperNova zu ändern. Dies beinhaltet alle Texte in der Systemsteuerung von SuperNova, die Sprachausgabe und die Hilfedateien.
- Kontrollfeld "Nützliche Warnungen aktivieren".
 Dieses Kontrollfeld schaltet die nützlichen Warnungen ein oder aus.
 Ein Beispiel für eine nützliche Warnung ist das Trainieren von Grafiken: Wenn Sie das Tastenkommando für das Trainieren von Grafiken eingeben, dieses jedoch deaktiviert ist, erhalten Sie eine entsprechenden Hinweis.
- Kontrollfeld "Hilfemeldungen aktivieren".
 Hilfenachrichten können erscheinen, um Sie durch spezifische

Anwendungen zu leiten. Ist diese Option nicht aktiviert erscheinen diese Meldungen nicht. Es ist ebenso möglich, bestimmte Hilfemeldungen abzuschalten, indem Sie bei deren Erscheinen das Kontrollfeld "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" in der Nachricht aktivieren.

 Kontrollfeld "Standardeinstellungen für die Systemsteuerung verwenden"

Üblicherweise verwenden Sie die aktuellen Einstellungen von SuperNova, wenn Sie durch die SuperNova Systemsteuerung navigieren. Das ermöglicht es Ihnen, die Auswirkungen Ihrer Änderungen sofort zu erfahren.

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Einstellungen, die Sie in Ihren Anwendungen verwenden wollen, nicht für die SuperNova Systemsteuerung geeignet sind. Das Aktivieren dieses Kontrollfelds bedeutet, dass SuperNova die Standard Anwendungseinstellungen für die Sytemsteuerung verwendet, anstatt Sie in die benutzerdefinierten Einstellungen zu übernehmen.

- Kontrollfeld "Ausblenden, wenn minimiert".
 - Sie können verhindern, dass die Systemsteuerung von SuperNova in der Taskleiste erscheint und im Dialogfeld "Wechseln zu" erscheint, indem Sie dieses Kontrollfeld aktivieren.
 - Sie können die Systemsteuerung von SuperNova weiterhin mit dem Tastenkommando "Systemsteuerung öffnen", oder sie aus dem Infobereich aufrufen.
- Auswahlschalter "Menüleiste und Symbolleiste"
 Sie können die Systemsteuerung von SuperNova als Menüleiste oder als Symbolleiste einblenden lassen. Die Symbolleiste enthält große, grafische Schaltflächen, welche für einen leichteren Zugriff auf die Haupteinstellungen der Systemsteuerung von SuperNova bietet.
- Kontrollfeld "Statusleiste".
 Sie können die Statusleiste, die Teil der Systemsteuerung von SuperNova ist, verbergen, indem Sie dieses Kontrollfeld anwählen.
 Die Statusleiste enthält Informationen über die Anwendung und die

aktuellen Einstellungsdateien, die verwendet werden. Alle Änderungen, die Sie in der Systemsteuerung machen, werden in dieser Datei abgespeichert.

- Kontrollfeld "Immer im Vordergrund"
 Wenn diese Einstellung aktiv ist, wird das Fenster der
 Systemsteuerung von SuperNova immer über allen anderen Fenstern im Vordergrund liegen.
- Auswahlschalter "Beim Starten Systemsteuerung anzeigen"
 Sie können die Ansicht der Systemsteuerung von SuperNova beim Start einstellen. Sie können festlegen, dass die Systemsteuerung geöffnet, minimiert oder an der selben Position wie beim letzen Verlassen erscheint.

23.33.1 Systemsteuerung Schema

 Liste der Schemata für die Systemsteuerung.
 In dieser Liste können Sie die Farben für die Systemsteuerung von SuperNova festlegen, indem Sie eines der vordefinierten Farbschemata wählen. Die Standard Einstellung ist "Systemfarben", wobei SuperNova die aktuellen Farben des Windows Farbschemas verwendet.

23.34 Dialogfeld "Tastatur"

Menu: Allgemein > Tastatur und Tastenkommandos > Tastatur

Sie können Ihre Tastatur- und Spracheinstellungen zu den Tastenkommandos im Dialogfeld "Tastatur" einstellen.

Optionen:

 Liste "Tastatur".
 Im Listenfeld "Tastatur" wird der Tastaturtyp festgelegt. Diese muss nicht der physikalischen Tastatur entsprechen, die Sie verwenden.

- Liste "Sprache".
 Das Listenfeld "Sprache" sollte mit dem Layout Ihrer Tastatur übereinstimmen. Von dem hier festgelegten Wert hängen die Ansagen für die Tastenkommandos ab.
- Liste "Tastenbelegung".
 Im Listenfeld "Tastenbelegung" legen Sie die Benutzung der Tastenkommandos fest. Die verfügbare Auswahl wird durch die Auswahl in den Listen "Tastatur" und "Sprache" beschränkt.
- Die ursprünglichen Tastenkommandos wiederherstellen.
 Sie können alle Änderungen, die Sie für die Tastenkommandos vorgenommen haben, rückgängig machen, indem Sie diese Schaltfläche anwählen.
- Das Kontrollfeld "NumLock an" schaltet den Nummernblock für die Tastenkombination an.
 Sie können Zahlen über den Nummernblock Ihrer Tastatur eingeben, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Sollten Sie diese Option aktivieren, schalten Sie den NumLock der Tastatur aus, um die Tastenkommandos von SuperNova zu verwenden, die den Nummernblock benötigen.

23.35 Dialogfeld "Tastatur"

Menu: Allgemein > Tastatur und Tastenkommandos > Tastatur

Sie können alle Tastenkommandos ersetzen oder entfernen, ebenso können Sie neue Tastenkommandos für SuperNova erstellen, indem Sie die Optionen im Dialogfeld "Tastenkommandos" anwählen. Beachten Sie, dass die Liste der Befehle eine Liste allgemeiner Befehle ist. Über Scripts und Darstellungen definierte Tastenkommandos können in diesem Dialogfeld nicht verändert werden.

Um mehr über das Verändern von Tastenkommandos zu erfahren, lesen Sie das Thema "Konflikte mit Tastenkommandos lösen" in dieser Hilfe.

23.36 Dialogfeld Allgemeine Touch Screen Einstellungen

Menü: Allgemeinl > Touch Screen Einstellungen

Das Dialogfeld "Touch Screen Einstellungen" beinhaltet Optionen, mit denen Sie die Touch Screen Erfahrung von SuperNova verändern können.

Registerkarte "Allgemeine Einstellungen".

- Schieberegler zur Einstellung des Doppeldruck Diese Einstellung steuert die Dauer zwischen dem ersten und zweiten Tippen bei einem Doppeldruck. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, erhöhen Sie den Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Tippen.
- Schieberegler Jitter.
 Der Jitter Rand ist die Zeit die vergeht, bevor SuperNova ein e angefangene Fingerbewegung als Wisch-Geste interpretiert. Sie können die erlaubte Entfernung erhöhen, indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen.

VergrößerungstabelleMagnification tab.

- Kontrollfeld Symbolleiste für den Touch Bildschirm
 Die Symbolleiste für Touch Befehle von SuperNova erscheint am
 unteren Rand des Bildschirms wenn Sie einen 3-Finger Einzeldruck
 ausführen. Ebenso wie die Gesten selbst können Sie das
 Erscheinungsbild Tocuh Symbolleiste beeinflussen, indem Sie dieses
 Kontrollfeld aktivieren.
- Einstellung zur Trägheit.
 Ein einzelner Fingerwisch wir den vergrößerten Ausschnit mit einer gewissen Verzögerung verschieben. Je schneller Sie die die Bewegung durchführen, desto schneller wird SuperNova den vergrößerten Ausschnitt bewegen. Der Schieberegler kontrolliert den Grad der Trägheit der Bewegung mit der SuperNova die Bewegung

- durchführt. Sie können den Widerstand verringernm, indem Sle den Regler nach rechts bewegen.
- Schieberegler für die Breite des Automatischen Scrollrands.
 Der automatische Scroll Rand ist der Abstand des Fingers vom Bildschrimrand, bei dem SuperNova das automatische Scrollen beginnt.. Sie können den Rand vergrößern, wenn Sie den Scheiberegler nach rechts bewegen.
- Schieberegler für die Geschwindigkeit zum Automatischen Scrollen. Die Geschwinigkeit der automatischen Scrollzone bestimmt, wie schnell SuperNova den automatische Scrollvorgang startet, wenn der Finger in die Zone bewegt wird. Sie können die erlaubte Entfernung erhöhen, indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen.
- Schieberegler für die +Pass-Through Zeit.
 Die "Pass-Through Zeit" ist die Zeitdauer bevor ein Tip in eine Pass-through Geste übergeht.
- Kontrollfeld "Automatisches Scrollen der Applikationen".
 Dieses Kontrollfeld steuert, ob eine eine Wischgeste den Inhalt innnerhalb einer Applikation automatisch scrollt, wenn das Fenster der Vergrößerung den Rand des Bildschrims errericht. Wenn Sie eine Webseite lesen und das vergrößerte Fenster am unteren Rand des Bildschirms steht, wird eine Wischgeste die Webseite automatisch scrollen und smit merh Inhalt in den vergräßerten Ausschnitt bringen. Applikationen, die diese Funktion unterstützen sind neben dem Startbildschirm z.B der Internet Explorer, Adobe Reader und Microsoft Word.

Register Bildschirmtastatur.

 Kontrollfeld "automatisch in Desktop App öffnen".
 Wenn Sie Eingaben machen möchten und keine Tastatur angeschlossen ist, zeigt Ihnen SuperNova automatisch eine Bildschirm Tastatur Sie können das automatische Erscheinen der Bildschirmtastatur abschalten, wenn Sie Desktop Applikationen verwenden. Deaktivieren Sie diese Einstellung. Sie können die Tastatur jederzeit aufrufen, indem Sie die Tastatur Schaltfläche der Symbolleiste für Touch Screen von SuperNova antippen oder die Tastatur Schaltfläche des Windows Infobereichs.

 Liste der Farbschemata.
 Sie können die Erscheinung der Bildschirmtastatur von SuperNova verändern, indem Sie ein anderes Farbnschema aktivieren. Die verfügbaren Farbschemata stellen große Buchstaben und hohen Kontrast sowie verschiedene Farbkombinationen zur Verfügung.

23.37 Dialogfeld allgemeine Interneteinstellungen

Menü: Allgemein > Webseiten Einstellungen

Sie können die Art und Weise, in der SuperNova mit der Webseite umgeht in den Einstellungen ändern. Die Einstellungen können auf eine einzelne Webseite, eine Site oder auf alle Webseiten angewendet werden.

 Allgemeine Einstellungen.
 Sie können einstellen, wie SuperNova die Elemente einer Webseite erkennt, indem Sie die allgemeine Einstellungen verändern. So kann z.B. die Erkennung von Tabellen mit dem Kontrollfeld "Sprich Tabelle..." abgeschaltet werden.

23.38 General - Erweiterte Optionen - Dialogfeld

Menü: Allgemein > Erweiterte Optionen

Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen.

Registerkarte Systemkonfiguration

- Schaltfläche "Windows Einstellungen"
 Für die sichere Zugänglichkeit zu Windows nimmt SuperNova einige Einstellungen unter Windows vor. Die Änderungen können jedoch auch wieder deaktiviert werden. Öffnen Sie dazu das Dialogfeld und schalten Sie die nicht gewünschten Funktionen ab.
- Schaltfläche "SAM Konfiguration"
 Die SAM Konfiguration steuert die Erkennung von Braillezeilen und Sprachausgaben. In dem Dialogfeld können Sie die Erkennung steuern und die SAM Treiber für die Geräte konfigurieren.
- Kontrollfeld "SAM beim Beenden schließen"
 Dolphin SAM ist eine eigenständige Komponente von SuperNova.
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn SAM ebenfalls geschlossen werden soll, wenn SuperNova beendet wird.

Registerkarte Erkennungseinstellungen

- Schaltfläche "Aktionen"
 Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld "Aktionsliste". Hier können Sie Aktionen von SuperNova bearbeiten, löschen oder erzeugen. Für weitere Informationen lesen Sie das Handbuch zur Erstellung von MAP Dateien.
- Schaltfläche "Grafische Objekte"
 Aktivieren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie Grafiken trainieren wollen.
 Es werden alle Grafiken aufgelistet, die bereits trainiert wurden. Sie können die Grafiken bearbeiten oder löschen.

- Kontrollfeld "Fernzugriff erlauben"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Fernwartung von Dolphin zulassen m\u00f6chten. Damit wird eine Verbindung von anderen Computern zu Ihrem m\u00f6glich. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden wird diese Einstellung beim Verlassen von SuperNova deaktiviert.
- Kontrollfeld "In Spalten lesen, wenn verfügbar"
 Der Bildschirminhalt kann von SuperNova zur besseren Lesbarkeit in Spalten geordnet werden. Diese Einstellung beeinflusst die Leserichtung in Umgebungen, in denen kein DOM (Document Object Model) verwendet wird, um die korrekte Leserichtung zu ermitteln.

23.39 Dialogfeld Elementliste

Menü: Allgemein > Elementliste

Nutzen Sie die Elementliste, um einzelne Objekte des Programmfensters aufzulisten. Die Objekte sind einzeln auswählbar. Für die Objekte sind verschiedene Aktionen verfügbar. Sie können z.B. in einer Webseite einen Link aktivieren oder in einem Dokument zu einer Überschrift springen.

Sie können die Elementliste in Programmen wie Microsoft Office und Windows Internet Explorer nutzen.

In Applikationen, die die Elementliste nicht unterstützen, ist die Elementliste deaktiviert.

Wenn Sie mehr über die Elementliste erfahren möchten, lesen Sie die SuperNova Hilfe im jeweiligen Programm.

Index

Α

Aktion der Cursorroutingtasten ändern, 88

Aktionen, 169

Aktionen der Routingtasten für die Statusmodule, 89

Allgemein - Systemsteuerung - Dialogfeld, 268

Allgemein - Update Einstellungen - Dialogfeld, 268

Ä

Ändern der, 126

Ändern der Ansage während der Eingabe, 62

Ändern der Braille Tabelle, 81

Ändern der Darstellung der Systemsteuerung von SuperNova, 21

Ändern der MAP-Datei, 120

Ändern der Vergrößerung, 24

Ändern Sie die Ansage von SuperNova für jedes Steuerelement., 69

Α

Ansage wiederholter Zeichen ändern, 71

Ansicht der Vergrößerung in der Übersicht, 32

Anzeige von Großbuchstaben, 73

Anzeigen der Cursorposition, 74

Applikationseinstellungen erzeugen, 117

Art der Einstellungen, 117

Attributbeschreibung, 92

Attribute anzeigen (fett, kursiv, etc.), 75

Attribute durchlaufen, 90

Aus- und Einschalten der Sprachausgabe, 43

Auswahl Computer Braille oder Braille (Kurzschrift), 78

Auswahl der Kamera in SuperNova, 136

Automatischen Dolphin Cursor abschalten, 98

В

Betrachterbild abspeichern, 144, 156

Bewegung auf dem Bildschirm, 28

Bewegung in der Laufschrift, 102

Bibliothek Bücher, 126

Bibliothek Nachrichten, Radiosender und Podcasts, 131

Bibliothek Scannen und Lesen, 123

Bibliothek., 123

Bildschirmerweiterungen, 39

Braille - Statusmodule - Dialogfeld, 259

Braille - Allgemeine Einstellungen - Dialogfeld, 251

Braille - Allgemeine Meldungen - Dialogfeld, 252

Braille - Erweiterte Optionen - Dialogfeld, 262

Braille Befehle mit der Tastatur, 197

Braille Eingabe mit Ihrer Braillezeile, 79

Braille Einstellungen, 73

Braille lesen, 83

Brailleausgabe ein- oder ausschalten, 73

Brailletasten kennenlernen, 83

Braillezeile ändern, 81

Dialogfeld Elementliste, 276

Dialogfeld MAP-Datei bearbeiten, 211 C Die Aktion der Routingtasten für den Dolphin Change what SuperNova tells you about each type Cursor festlegen., 88 of control, 86 Die Ansage von Großbuchstaben aktivieren, 64 Connect and View, 135 Die Ansage von Großbuchstaben während des Connect and View Kamera, 135 Lesens aktivieren, 65 Connect and View Whiteboard, 149 Die Bewegungen der Präsentation verfolgen, 155 D Die Brailleausgabe auf dem Bildschirm anzeigen, 95 Das Bild einfrieren, 144, 155 Die Farbe des Bildes verändern, 142, 154 Das Bild im Betrachter vergrößern, 140, 142, 153 Die Kamera mit SuperNova nutzen, 137 Das Menü Hilfe, 11 Die Maus zum Lesen benutzen, 61 Das zuletzt gelesene Buch öffnen, 129 Die Schaltfläche, 10 Datum und Uhrzeit lesen, 57 Die Taste sprechen, die Sie drücken, 69 Den automatischen Wechsel zwischen Landessprachen aktivieren, 47 Die Vergrößerung ein- oder ausschalten, 23 Den Betrachter einschalten, 137, 151 Dokument Leser, 105 Den Bildausschnitt verschieben, 141, 154 Dokument Leser schließen, 108 Den Cursor mit den Routingtasten bewegen, 87 Dokument Leser starten, 105 Den entfernten Computerbildschirm anzeigen, Dolphin Cursor, 97 150 Dolphin Cursor (Allgemein), 177 Den tatsächlichen Inhalt des Bildschirms Dolphin Cursor (Bewegung), 178 präsentieren, 77 Dolphin Cursor (Mouse Control), 182 Dialogfeld, 207, 209, 216, 220, 222, 227, 265, 270, 271 Dolphin Cursor aktivieren, 97 Dialogfeld allgemeine Interneteinstellungen, 274 Dolphin Cursor ausschalten, 97 Dialogfeld Allgemeine Touch Screen Dolphin Cursor Auswahl, 184 Einstellungen, 272 Dolphin USA Produkt Support, 13 Dialogfeld Anwendungseinstellungen, 210 Dialogfeld Connect and View Einstellungen, 224 E Dialogfeld Einstellungen für Bibliothek Scannen Eine Datei scannen und lesen, 123 und Lesen, 264 Eine geeignete Kamera erwerben, 136

Eine Verbindung zum Computer mit der Fokusverfolgung abschalten, 76 Präsentation herstellen, 149 Fortlaufend lesen, 58 Einen Fixbereich mit der Maus erstellen, 35 G Einen Fixbereich mit der Tastatur bearbeiten. 34 Gast Modus und Abgesicherter Modus, 113 Einen Fixbereich mit der Tastatur löschen, 34 General - Erweiterte Optionen - Dialogfeld, 274 Einen Überwachungsbereich mit Tasten erstellen, 33 Geschwindigkeit verändern, 44 Einführung in die Systemsteuerung von Großbuchstaben ansagen, 64 SuperNova, 17 Größe und Position des Betrachters verändern. Eingaben auf einem Touchscreen, 162 Einstellen der Berührungsempfindlichkeit, 162 Größe und Position eines vergrößerten Fenster verändern, 26 Einstellung des Vergrößerungsfensters, 190 Н Einstellungen in der Systemsteuerung von SuperNova, 20 Hilfe auf der Dolphin Webseite, 11 Einstellungen speichern, 120 Hilfe für die Systemsteuerung von SuperNova, 10 Einstellungen zum Autofokus, 143 Hilfe zu einer Anwendung bekommen, 6 Einstellungsdateien., 117 Ein-und ausblenden der Symbolleiste des In der Hilfe navigieren, 7 Betrachters, 139, 152 Informationen in den Statusmodule der Erleichtert das Auffinden des Focus, 39, 40 Braillezeile, 94 Erweitertes Lesen ab hier, 60 Installation des PCs, 136 Erweitertes Produkt Training, 14 Installation und Konfiguration, 15 F K Farbe, Schriftart und Symbole in der Laufschrift Kamera Einstellungen, 149 verändern, 103

Favoriten für Nachrichten, Radiosender und

Fixbereiche anzeigen oder verbergen, 36

Podcast einstellen, 132

Feste Vergrößerungsfenster, 32

Fenster lesen, 55

Fokus lesen, 54

Klicken und lesen, 61

Support, 13

Kurztaste lesen, 56

Kontakt zu ihrem Dolphin Händler, 12

Kontaktieren Sie den Dolphin UK Produkt

Nutzen Sie die Schnellreferenz, 5

L 0 Laufschrift, 101, 193 Objektsuche, 195 OCR Viewer Bild, 145 Laufschrift starten, 101 Lautstärke verändern, 44 Öffnen einer Datei im Leser von SuperNova:, Lesen ab hier, 176 Öffnen eines Buches von einer Online Bibliothek... Lesen ab hier mit dem Dolphin Cursor, 59 128, 129 Lesen eines Nachrichtenartikels, 131 Öffnen, kopieren oder löschen eines Buches, 130 Lesen steuern, 106 Optionen, 255, 257 Lesen und Eingabe., 51 Optionen des Dolphin Cursors, 254 Lesestimme ändern, 46 Ρ M Persönliche Notizen hinzufügen, 9 Machen Sie den Zeiger leichter zu sehen, 41 Podcast hören, 132 Markierten Text lesen, 53 Profile, 109 Menü und Dialogfeld Braille Cursor, 261 R Menü und Dialogfeld Braille Eingabe, 253 Radio hören, 131 Menü und Dialogfeld Braille Layout, 256 Referenz, 207 Menüeintrag, 211 Registerkarte Ausführlichkeit (Braille), 263 Mit dem Dolphin Cursor Suchbefehl suchen, 100 Registerkarte Erweiterung, 235 Modus der Vergrößerung verändern, 25 Registerkarte Fixbereiche (Braille), 263 N Routingtasten, 254 Nächstes Tastenkommando von SuperNova S ignorieren, 165 Scannen und Lesen eines Bildes aus der Navigation über den Bildschirm, 83 Zwischenablage, 125 Neue Darstellung Dialogfeld, 208 Scannen und Lesen von gedrucktem Material, 124 Neues Script Menü Item, 209 Schließen der Systemsteuerung von SuperNova, Neuzuordnung eines Tastenkommandos von 22 SuperNova, 166 Schnellnavigationstasten für Microsoft Word, 202

Schnelltastenkonflikte, 165

Situations Einstellungen erzeugen, 118 So finden Sie Ihre Produktversionsnummer und Ihre Seriennummer., 14 Sounds benutzen, um Großbuchstaben zu kennzeichnen, 66 Sprache, 171 Sprache - Erweiterte Optionen - Dialogfeld, 248 Sprache - Stimmeneinstellungen - Dialogfeld, 236 Sprache - Tastenecho - Dialogfeld, 241 Sprache - Zeichenecho - Dialogfeld, 241 Sprache Dialogfeld Allgemeine Meldungen, 246 Sprache Dialogfeld Ansage von Textformaten, 242 Spracheinstellungen., 43 Sprechtasten, 173 Starte SuperNova zum ersten Mal, 15 Status lesen, 55 Steuerelement lesen, 54 Stil, 261 Stimme ändern, 45 SuperNova beenden, 16 SuperNova Leser Tastaturkommandos, 133 SuperNova starten, 15 SuperNova Symbolleiste für Touch Befehle, 162 SuperNova Systemsteuerung, 17 Synthesizer ändern, 48 Systemsteuerung Schema, 270

Т

Tasten zur Schnellnavigation, 201, 202

Tasten zur Schnellnavigation für den Web Browser, 200

Tastenhilfe, 5

Tastenkommando, 169

Tastenkommandos kennenlernen, 16

Tastenkommandos von SuperNova abschalten, 165

Tastenkommandos, um sich in der Systemsteuerung von SuperNova zu bewegen., 19

Text an der Mauszeigerposition lesen, 62

Text mit dem Dolphin Cursor markieren, 99

Textattribute prüfen, 89

Texteingabe, 196

Tonhöhe verändern, um Großbuchstaben während der Eingabe zu kennzeichnen, 68

Touchscreen, 159

Touchscreen Gesten, 160

Touchscreen Terminologie, 159

U

Überprüfen, wo Sie sind, 57

Unterstützung für SuperNova, 11

V

Vergrößerung, 23, 185

Vergrößerung - Erweiterte Optionen - Dialogfeld, 230

Visuelle Konfiguration - Dialogfeld, 212

W

Wechsel zwischen Applikation und Hilfe, 8

Wechseln zwischen digitaler und optischer Vergrößerung, 143

Whiteboard Einstellungen, 156

Wie Sie Hilfe erhalten, 5

Wort lesen, 51

Ζ

Zeichen, 254

Zeichen lesen, 51

Zeile lesen, Zeile bis zum Cursor lesen und Zeile ab dem Cursor lesen., 52

ZoomText zu SuperNova Begriffe vergleichen, 203

Zwischen Betrachter und Desktop wechseln, 138, 151

Zwischen den Hilfethemen wechseln, 8